

coflex™ Interlaminar Implant

Package contents

The package contains one coflex™ implant.

Description

The coflex™ implant provides anatomic vertebral flexibility. Flexion and extension are allowed relative to a neutral position which corresponds to the almost parallel position of the two wings.

Material

The coflex™ implant is made from wrought titanium 6-aluminum 4-vanadium alloy (ISO 5832-3). It is supplied sterile and is available in numerous sizes.

Intended use

The coflex™ implant is intended for permanent implantation between the spinous processes of 1 or 2 lumbar motion segments and controls segmental motion in cases of lumbar stenosis or mild degenerative instability. The coflex™ implant may also be used in up to 2 lumbar motion segments adjacent to fused level(s).

Indications

Radiographically confirmed moderate to severe stenosis, isolated to 1 or 2 levels, in the region of L1 to L5 in a patient with or without concomitant low back pain, including conditions such as stable grade 1 spondylolisthesis.

Interlaminar stabilization is performed after microsurgical decompression of stenosis at the affected level(s). The coflex™ implant may also be used in up to 2 lumbar motion segments adjacent to fused level(s).

Contraindications

Do not use the coflex™ implant in cases of:

- Any medical or surgical condition precluding the potential benefit of spinal surgery
- Acute or chronic systemic, spinal or localized infections
- Systemic and metabolic diseases
- Obesity
- Pregnancy
- Dependency on pharmaceutical drugs, drug abuse, or alcoholism
- Lack of patient cooperation
- Foreign body sensitivity to the implant material
- Spondylolisthesis greater than grade 1 or unstable spondylolisthesis
- Scoliosis greater than 25 degrees
- Significant osteopenia

Adverse reactions

Adverse reactions may include:

- Clinical failure (i.e. pain or injury) due to bending, loosening, wear and tear, fracture of implant, loss of fixation, dislocation and/or migration
- Pain and/or abnormal sensations due to the presence of the implant
- Primary and/or secondary infections
- Allergic reactions to implant material
- Neurological injury
- Vertebrae fracture
- Injury to vessels, nerves and organs
- Hematoma and/or impaired wound healing; hemorrhage
- Venous thrombosis, lung embolism, and cardiac arrest
- Death



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05



Safety precautions

- Prior to use, thoroughly read these instructions for use and become familiar with the surgical technique.
- Keep the instructions for use accessible to all staff.
- The operating surgeon must have a thorough command of both the hands-on and conceptual aspects of the established operating techniques. Proper surgical performance of the implantation is the responsibility of the operating surgeon.
- The manufacturer is not responsible for any complications arising from incorrect diagnosis, choice of incorrect implant, incorrect operating techniques, the limitations of treatment methods or inadequate asepsis.
- Under no circumstances may modular implant components from different suppliers be combined.
- Each patient's record shall document the implant used (name, article number, lot number).
- During the postoperative phase, in addition to mobility and muscle training, it is of particular importance that the physician keeps the patient well informed about post-surgical behavioral requirements.
- Damage to the weight-bearing structures can give rise to loosening, dislocation and migration, as well as other complications. To ensure the earliest possible detection of such catalysts of implant dysfunction, the implant must be checked periodically post operative using appropriate techniques.
- Fracture of the coflex™ implant wing may occur during preparation when the wings are bent open or during insertion when the wings are crimped.



- Never reuse an implant. Although the implant may appear undamaged, previous stresses may have created non-visible damage that could result in implant failure.



- Never use implants if the packaging is damaged. An implant with damaged packaging might be damaged itself and thus may not be used.



- Never use implants that are past their expiration date.



MRI compatibility

Non-clinical testing has demonstrated that the coflex™ Interlaminar Implant is MR Conditional. It can be scanned safely under the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5-Tesla (1.5T) or 3.0-Tesla (3.0T)
- Spatial gradient field of up to:
 - 11,230 G/cm (112.3 T/m) for 1.5T systems
 - 5,610 G/cm (56.1 T/m) for 3.0T systems.
- Maximum whole body averaged specific absorption rate (SAR) of:
 - 2.0 W/kg for 15 minutes of scanning in Normal Operating Mode at 1.5T
 - 2.0 W/kg for 15 minutes of scanning in Normal Operating Mode at 3.0T.

3.0T RF heating

In non-clinical testing with body coil excitation, the coflex™ Interlaminar Implant produced a temperature rise of less than 3.5 °C at a maximum whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2.0 W/kg, as assessed by calorimetry for 15 minutes of scanning in a 3.0T Siemens Trio (MRC20587) MR scanner with SYNGO MR A30 4VA30A software.



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

1.5T RF heating

In non-clinical testing with body coil excitation, the coflex™ Interlaminar Implant produced a temperature rise of less than 3.5 °C at a maximum whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2.0 W/kg, as assessed by calorimetry for 15 minutes of scanning in a 1.5T Siemens Espree (MRC30732) MR scanner with SYNGO MR B17 software.

 *The RF heating behavior does not scale with static field strength. Devices which do not exhibit detectable heating at one field strength may exhibit high values of localized heating at another field strength.*

MR Artifact

In testing using a 3.0T system with spin-echo sequencing, the shape of the image artifact follows the approximate contour of the device and extends radially up to 19 mm from the implant.

Storage, inspection and sterilization

Storage

The implant is individually packed in protective packaging that is labeled according to its contents.

 The implant is sterilized with gamma sterilization (25 kGy minimum).

- Always store the implant in the original protective packaging.
- Do not remove the implant from the packaging until immediately before use.
- Store the implant in a dry and dust-free place (standard hospital environment).

Disinfection / cleaning

The coflex™ implant is not designed to be disinfected or cleaned by the user.

Resterilization

 The coflex™ implant is not designed to be resterilized by the user.

Procedure

The coflex™ implant must be implanted only with the applicable coflex™ trial and instruments. The coflex™ trial and instruments are available from the manufacturer at any time.

Preoperative

The operating surgeon draws up an operation plan specifying and documenting the following:

- Implant component(s) and their dimensions.
- Proper position of the implant component(s) between the spinous processes.
- Determination of intraoperative orientation points.

The following conditions must be fulfilled prior to application:

- All required implant component(s) are readily available.
- Highly aseptic operating conditions are present.
- All requisite implantation instruments must be available and in working order, including the coflex™ trial

 *Never use or process damaged or defective instruments. Contact your local representative or dealer for repair or replacement.*

 *The use of an instrument for tasks other than those for which they are intended may result in damaged / broken instruments or patient injury.*

- The operating surgeon and operating room team must be thoroughly familiar with the operating technique, as well as the range of implants and instruments to be applied. Complete information on these subjects must be readily available at the workplace.

- The operating surgeon must be especially trained in spinal surgery, biomechanical principles of the spine and the relevant operating techniques.

The operating procedure must be explained to the patient, and the patient's understanding of the following information must be documented:

- The patient is aware of the risks associated with neurosurgery, general surgery, orthopedic surgery and with general anesthesia.
- The patient has been informed about the advantages and disadvantages of the implant procedure and about possible alternative treatments.
- The implant can fail due to excessive load, wear and tear, or infection.
- The service life of the implant is determined by body weight and physical activity. The implant must not be subjected to overload through extreme strain, or through work-related or athletic activities.
- Corrective surgery may be necessary if the implant fails.
- The patient must have their physician carry out followup examinations of the implant at regular intervals.

Intraoperative

Prior to use, please read the coflex™ product brochure and become familiar with the surgical technique, the corresponding implants and the instruments.

-  • Prior to use, verify the integrity of the sterile packaging. Never use implants if the packaging is damaged.
-  • Prior to use, check the product expiration date. Never use implants that are past their expiration date.

Perform microsurgical decompression and measure interspinous space utilizing the trial portion of the instrument. Load the coflex™ implant on the insertion portion of the instrument and introduce into the prepared site. If desired, the wings of the coflex™ implant may be opened with the coflex™ bending pliers and closed with the coflex™ crimping pliers. Only bend the wings open as much as necessary to safely introduce the implant.

Postoperative

- Reiterate preoperative instructions to the patient.
- Ensure that the patient is aware of physical activity restrictions and possible adverse reactions.

During the first six weeks after surgery the patient should avoid any strenuous physical activity. Examples of strenuous physical activity include lifting more than 5 Kg. The patient should not do sports until the doctor agrees to do so. Sports include swimming, golf, tennis, running, and jogging among others. If the patient is too active too soon after surgery, this may result in implant-related or -unrelated complications postoperatively. This could cause pain. The patient could need further surgery.

The patient should tell the doctor as soon as possible after the surgery if there is pain or swelling in the back or numbness in the legs or buttocks. These symptoms can be a sign that the coflex™ implant is not working properly. More surgery may be needed. The patient should inform the doctor about any traumatic event e.g. fall.

Revision surgery / implant removal

The coflex™ implant is intended for permanent implantation and is not intended for removal. When device removal is necessary, please follow these instructions:

- Use adequate surgical approach to visualize coflex.
- The coflex™ implant can be removed using standard instruments like chisels, forceps and pliers.
- Care has to be taken to remove bone overgrowing the wings of the device.



- Then the wings can be carefully bent open using a small bone chisel before the device can be taken out using pliers or forceps.
- On special request Paradigm Spine offers a revision instrument that is not part of the standard set. Additional procedures may be necessary to stabilize the spine following coflex™ implant removal, including implantation of a new coflex™ implant or spinal fusion.

Warranty

All warranty rights are lost if repairs or modifications are carried out by an unauthorized service center. The manufacturer does not take responsibility for any effects on safety, reliability or performance of the product if the product is not used in conformity with the instructions for use. Technical alterations reserved.

For further information

Please contact Paradigm Spine or your authorized representative if further information on this product is needed.

Patent

For patent information see www.surgalign.com

Symbols

	Manufacturer
	Date of manufacture
	Use-by date
LOT	Lot number
REF	Catalog number
QTY	Content of usable units(s)
STERILE R	Sterilized using irradiation
	Do not resterilize
	Do not use if package is damaged
	Keep dry
	Do not reuse
	Consult instructions for use at this website. http://efu.surgalign.com
	Caution
	MR conditional
	CE-marking according to directive 93/42/EEC 0123



coflex™ interlaminares Implantat

Verpackungsinhalt

Die Packung enthält ein coflex™-Implantat.

Beschreibung

Das coflex™-Implantat sorgt für anatomische Flexibilität in der Wirbelsäule. Es erlaubt Beugung und Streckung bezogen auf eine Neutralstellung, in der die beiden Flügel annähernd parallel zueinander sind.

Material

Das coflex™-Implantat besteht aus einer Titan 6-Aluminium 4-Vanadium-Schmiedelegierung (ISO 5832-3). Es wird steril geliefert und ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Verwendungszweck

Das coflex™-Implantat ist für die dauerhafte Implantation zwischen den Dornfortsätzen in einem oder zwei lumbalen Bewegungssegmenten vorgesehen und kontrolliert die Segmentbewegung in Fällen von lumbaler Stenose oder leichter degenerativer Instabilität. Das coflex™-Implantat kann auch auf bis zu zwei lumbalen, an die fusionierte(n) Ebene(n) angrenzenden Bewegungssegmenten verwendet werden.

Indikationen

Radiologisch bestätigte mäßige oder schwere Stenose, beschränkt auf eine oder zwei Ebenen, in Region L1 bis L5, mit oder ohne begleitende Schmerzen im unteren Rückenbereich, einschließlich stabiler Spondylolisthese bis Grad 1. Die interlaminare Stabilisierung erfolgt nach der mikrochirurgischen Dekompression der Stenose auf der (den) betroffene(n) Ebene(n). Das coflex™-Implantat kann auch auf bis zu zwei lumbalen, an fusionierte(n) Ebene(n) angrenzende Bewegungssegmente verwendet werden.

Kontraindikationen

coflex™-Implantat nicht verwenden bei:

- Medizinischen oder chirurgischen Zuständen, die den möglichen Nutzen eines chirurgischen Eingriffs an der Wirbelsäule ausschließen
- Akuten oder chronischen systemischen, spinalen oder lokalen Infektionen
- Systemischen Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen
- Fettleibigkeit
- Schwangerschaft
- Medikamenten- oder Drogenmissbrauch oder Alkoholsucht
- Mangelnder Mitarbeit des Patienten
- Fremdkörperempfindlichkeit gegen das Implantatmaterial
- Spondylolisthese höher als Grad 1 oder instabile Spondylolisthese
- Skoliose über 25 Grad
- Signifikanter Osteopenie

Nebenwirkungen

Mögliche Nebenwirkungen sind:

- Klinisches Versagen (d. h. Schmerzen oder Verletzung) aufgrund eines verbogenen, gelösten, verschlissenen oder gebrochenen Implantats, bei Ausbruch aus der Verankerung, Dislokation und/oder Migration des Implantats
- Durch das Implantat ausgelöste Schmerzen und/oder Fehlempfindungen
- Primäre oder sekundäre Infektionen
- Allergische Reaktionen auf das Implantatmaterial
- Neurologische Schäden
- Wirbelfrakturen
- Verletzung von Blutgefäßen, Nerven und Organen

- Hämatome und/oder Wundheilungsstörungen, Blutungen
- Venöse Thrombosen, Lungenembolie und Herzstillstand
- Tod



Sicherheitshinweise

- Vor der Verwendung Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und sich mit der Operationstechnik vertraut machen
- Gebrauchsanweisung für das gesamte Personal zugänglich aufzubewahren.
- Der Operateur muss sowohl theoretisch als auch praktisch die anerkannten Operationstechniken beherrschen. Der Operateur trägt die Verantwortung für die sachgemäße Implantation.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Komplikationen aufgrund fehlerhafter Diagnose, falscher Implantatwahl, falscher Operationstechniken, Grenzen der Behandlungsmethode oder ungenügender Asepsis.
- Modulare Implantatkomponenten unterschiedlicher Hersteller dürfen nicht kombiniert werden.
- Das eingesetzte Implantat (mit Name, Bestellnummer und Lotnummer) muss in der Akte des Patienten vermerkt werden.
- In der postoperativen Phase ist neben Mobilitäts- und Muskeltraining besonders darauf zu achten, dass der behandelnde Arzt den Patienten angemessen über die postoperativen Verhaltensregeln informiert.
- Schäden an kraftübertragenden Strukturen können dazu führen, dass das Implantat sich löst, und Dislokation und Migration sowie andere Komplikationen verursachen. Um die frühestmögliche Erkennung der Faktoren sicherzustellen, die eine Implantat-Fehlfunktion begünstigen, das Implantat nach der Operation regelmäßig mit geeigneten Verfahren prüfen.
- Es kann zu einem Bruch am Flügel des coflex™-Implantats kommen, wenn die Flügel bei der Präparation aufgebogen werden oder wenn die Flügel beim Einsetzen zugeborgen werden.



- Implantate niemals wieder verwenden. Auch wenn das Implantat nicht beschädigt zu sein scheint, können frühere Belastungen unsichtbare Schäden verursacht haben, die zu Implantatversagen führen können



- Niemals Implantate aus beschädigten Verpackungen verwenden. Ein Implantat mit beschädigter Verpackung kann selbst beschädigt und daher unbrauchbar sein.



- Niemals Implantate mit überschrittenem Verfallsdatum verwenden.



Kompatibilität mit MRT

In nichtklinischen Prüfungen wurde nachgewiesen, dass das coflex™ interlaminare Implantat bedingt MR-sicher ist. MRT-Aufnahmen können unter folgenden Bedingungen sicher erfolgen:

- Statisches Magnetfeld von 1,5 Tesla (1,5 T) oder 3,0 Tesla (3,0 T)
- Räumliches Gradientenfeld von bis zu:
 - 11.230 G/cm (112,3 T/m) für Systeme mit 1,5 T
 - 5.610 G/cm (56,1 T/m) für Systeme mit 3,0 T
- Maximale gemittelte Ganzkörper-SAR (Spezifische Absorptionsrate) von:
 - 2,0 W/kg für 15 Minuten Untersuchung im normalen Betriebsmodus bei 1,5 T
 - 2,0 W/kg für 15 Minuten Untersuchung im normalen Betriebsmodus bei 3,0 T

HF-Erwärmung mit 3,0 T

In nichtklinischen Prüfungen zeigte das coflex™ interlaminare Implantat bei Erregung mit der Körperspule einen Temperaturanstieg von weniger als 3,5 °C bei einer maximalen über den ganzen Körper gemittelten Absorptionsrate (SAR) von 2,0 W/kg, wie durch



Kalorimetrie bei 15 Minuten Untersuchung im 3T-MRTSystem Trio von Siemens (MRC20587) mit der Software SYNGO MR A30 4VA30A ermittelt.

HF-Erwärmung mit 1,5 T

In nichtklinischen Prüfungen zeigte das coflex™ interlaminare Implantat bei Erregung mit der Körperspule einen Temperaturanstieg von weniger als 3,5 °C bei einer maximalen über den ganzen Körper gemittelten Absorptionsrate (SAR) von 2,0 W/kg, wie durch Kalorimetrie bei 15 Minuten Untersuchung im 1,5T-MRTSystem Espree von Siemens (MRC20587) mit der Software SYNGO MR B17 ermittelt.

 *Die HF-Erwärmung verhält sich nicht relativ zur Stärke des statischen Felds. Geräte, die bei einer Feldstärke keine messbare Erwärmung zeigen, können bei einer anderen Feldstärke eine starke lokale Erwärmung auftreten lassen.*

MR-Artefakte

Bei Prüfungen mit einem 3T-System mit Spin-Echo-Sequenz folgt die Form des Abbildungsartefakts der ungefähren Kontur des Produkts und erstreckt sich radial bis zu 19 mm vom Implantat.

Lagerung, Inspektion und Sterilisation

Lagerung

Das Implantat wird einzeln verpackt in einer entsprechend beschrifteten Schutzverpackung geliefert.

 Das Implantat ist durch Gamma-Bestrahlung (mind. 25 kGy) sterilisiert.

- Implantat stets in der Original-Schutzverpackung lagern.
- Implantat erst unmittelbar vor dem Einsatz aus der Verpackung nehmen.

 • Implantat an einem trockenen und staubfreien Ort (Standard- Klinikumgebungsbedingungen) lagern.

Desinfektion/Reinigung

Das coflex™-Implantat ist nicht für eine Desinfektion oder Reinigung durch den Anwender vorgesehen.

Resterilisation

 Das coflex™-Implantat ist nicht für eine Resterilisation durch den Anwender vorgesehen.

Verfahren

Die Implantation des coflex™-Implantats darf nur unter Verwendung des entsprechenden coflex™-Probeimplantats und der zugehörigen Instrumente erfolgen. Das coflex™-Probeimplantat und die Instrumente sind jederzeit beim Hersteller erhältlich.

Präoperativ

Der Operateur stellt einen Operationsplan auf, in dem die folgenden Punkte spezifiziert sind und dokumentiert werden:

- Implantatkomponente(n) und ihre Abmessungen
- Richtige Positionierung der Implantatkomponenten zwischen den Dornfortsätzen
- Festlegung intraoperativer Orientierungspunkte.

Vor der Anwendung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Alle erforderlichen Implantatkomponenten verfügbar
- Hochseptische Operationsbedingungen
- Alle benötigten Implantationsinstrumente vorhanden und funktionsfähig, einschließlich des coflex™-Probeimplantats

 *Beschädigte oder defekte Instrumente nicht verwenden und nicht wiederaufbereiten. Reparatur oder Ersatz beim örtlichen Vertreter oder Händler anfordern.*

 *Der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch eines Instruments kann zur Beschädigung/Zerstörung des Instruments und zur Verletzung des Patienten führen.*

- Operateur und Operationsteam kennen Informationen zur Operationstechnik und zu den vorgesehenen Implantaten und Instrumenten. Diese sind vor Ort vollständig vorhanden.
- Der Operateur muss ein entsprechend ausgebildeter Spezialist für Wirbelsäulenenchirurgie sein und mit den biomechanischen Gegebenheiten der Wirbelsäule und den relevanten Operationstechniken vertraut sein.

Der Patient wurde über den Eingriff aufgeklärt und sein Einverständnis über folgende Informationen dokumentiert:

- Der Patient ist sich der Risiken im Zusammenhang mit neurochirurgischen, allgemeinchirurgischen und orthopädisch-chirurgischen Eingriffen sowie der Risiken einer Operation unter Vollnarkose bewusst.
- Der Patient wurde über die Vor- und Nachteile einer Implantation und über mögliche alternative Behandlungsmethoden informiert.
- Überbelastung, Verschleiß oder Infektion können zu Implantatversagen führen.
- Die Lebensdauer des Implantats hängt vom Körpergewicht und den körperlichen Aktivitäten des Patienten ab. Das Implantat darf nicht durch Extrembelastungen, körperliche Arbeit oder sportliche Aktivitäten überbelastet werden.
- Bei Implantatversagen kann ein Revisionseingriff erforderlich werden.
- Der Patient muss sich einer regelmäßigen ärztlichen Nachkontrolle des Implantats unterziehen.

Intraoperativ

Vor der Verwendung die coflex™-Produktbroschüre sorgfältig lesen und mit der Operationstechnik, den entsprechenden Implantaten und Instrumenten vertraut machen.

 • Vor der Verwendung die Unversehrtheit der Sterilverpackung prüfen. Niemals Implantate aus beschädigten Verpackungen verwenden.

 • Vor der Verwendung das Verfallsdatum prüfen. Niemals Implantate mit überschrittenem Verfallsdatum verwenden.

Mikrochirurgische Dekompression durchführen und interspinösen Abstand mit Hilfe der Probeseite des Instruments messen. Das coflex™-Implantat auf die Einsetzeite des Instruments setzen und in die präparierte Stelle einbringen.

Falls gewünscht, können die Flügel des coflex™-Implantats mit der coflex™-Biegezange aufgebogen und mit der coflex™-Crimpzange zugebogen werden. Biegen Sie die Flügel nur so weit wie nötig auf, um das Implantat sicher einzubringen.

Postoperativ

- Dem Patienten nochmals die präoperativen Anweisungen nahebringen.
- Sicherstellen, dass sich der Patient der Beschränkungen seiner körperlichen Aktivitäten und der möglichen Nebenwirkungen bewusst ist.

In den ersten sechs Wochen nach der Operation sollten Patienten jede anstrengende körperliche Tätigkeit vermeiden. Ein Beispiel für anstrengende körperliche Tätigkeiten ist das Heben von Lasten über 5 kg. Bis sie die ärztliche Freigabe dafür bekommen, sollten Patienten keinen Sport treiben, weder Schwimmen noch Golf, Tennis, Laufsport oder sonstige Bewegungsdisziplinen. Wenn Patienten zu früh nach der Operation zu aktiv sind, kann dies zu postoperativen Komplikationen im Zusammenhang mit dem Implantat oder unabhängig davon führen. Solche Komplikationen können Schmerzen verursachen und unter Umständen könnte der Patient eine weitere Operation benötigen.

Patienten sollten dem Arzt so rasch wie möglich nach der Operation berichten, ob Schmerzen oder Schwellungen im Rücken oder Taubheitsgefühle in den Beinen oder im Gesäß vorliegen. Solche



Symptome können ein Zeichen dafür sein, dass das coflex™-Implantat nicht ordnungsgemäß funktioniert. In diesem Fall könnte möglicherweise eine weitere Operation erforderlich sein. Patienten sollten ihren Arzt über jedes traumatische Ereignis informieren, z. B. Stürze.

Revisionseingriff/Implantatentfernung

Das coflex™-Implantat ist für die dauerhafte Implantation bestimmt und nicht für eine Entfernung vorgesehen. Falls eine Entfernung erforderlich ist, sind folgende Anweisungen einzuhalten:

- Stellen Sie das coflex™-Implantat mit geeigneten chirurgischen Verfahren dar.
- Das coflex™-Implantat kann mit Standardinstrumenten wie Meißel und verschiedenen Zangen entfernt werden.
- Besondere Sorgfalt muss auf die Entfernung von über die Flügel des Implantats gewachsenem Knochenmaterial gelegt werden.
- Dann können die Flügel mit einem kleinen Knochenmeißel vorsichtig aufgebogen werden, wonach das Implantat mit einer Zange entnommen werden kann.

Auf Anforderung ist bei Paradigm Spine ein Revisionsinstrument erhältlich, das nicht Bestandteil des Standard-Instrumentensatzes ist. Möglicherweise sind nach der Entfernung des coflex™-Implantats weitere Verfahren zur Stabilisierung der Wirbelsäule erforderlich, z. B. die Implantation eines neuen coflex™-Implantats oder eine Wirbelkörperfusion.

Garantie

Bei Reparaturen oder Modifikationen durch unautorisierte Personen oder Stellen erlöschen alle Garantierechte. Wenn das Produkt nicht gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet wird, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit des Produkts. Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit bei Paradigm Spine oder Ihrem autorisierten Paradigm Spine-Vertreter.

Patent

Für Patentinformationen siehe www.surgalign.com

Symbolen

	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Verwendbar bis
	Chargencode
	Artikelnummer
	Anzahl der verwendbaren Einheiten
	Sterilisiert durch Bestrahlung
	Nicht erneut sterilisieren
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Trocken aufbewahren
	Nicht wiederverwenden
	Gebrauchsanweisung auf dieser Webseite beachten.
	Achtung
	Bedingt MR-sicher
	CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG



Implant interlaminaire coflex™

Contenu du conditionnement

Le conditionnement contient un implant coflex™.

Description

L'implant coflex™ assure la souplesse anatomique dans la colonne vertébrale. Il permet la flexion et l'extension par rapport à une position neutre dans laquelle les deux ailettes sont pratiquement parallèles l'une par rapport à l'autre.

Matériel

L'implant coflex™ est composé d'un alliage de forge titane 6-aluminium 4-vanadium (ISO 5832-3). Il est stérile à la livraison et existe en différentes tailles.

Champ d'application

L'implant coflex™ est prévu pour une implantation durable entre les apophyses épineuses dans un ou deux segments mobiles lombaires et contrôle le mouvement des segments dans les cas de sténose lombaire ou de légère instabilité dégénérative. L'implant coflex™ peut également être utilisé dans jusqu'à 2 segments de mobilité lombaire adjacents aux plans fusionnés.

Indication

Sténose modérée à sévère confirmée par radiographie, isolée à 1 ou 2 plans, dans la région de L1 à L5 chez un patient avec ou sans douleurs concomitante du bas du dos, y compris les conditions telles qu'un spondylolisthesis stable de degré 1. La stabilisation interlaminaire est effectuée après la décompression microchirurgicale de la sténose dans le(s) plan(s) concerné(s). L'implant coflex™ peut également être utilisé dans jusqu'à 2 segments de mobilité lombaire adjacents aux plans fusionnés.

Contre-indications

Ne pas utiliser l'implant coflex™ dans les cas suivants:

- États médicaux ou chirurgicaux excluant l'utilité probable d'une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale
- Infections aiguës ou chroniques systémiques, spinales ou locales
- Affections systémiques et troubles du métabolisme
- Adiposité
- Grossesse
- Abus de médicaments ou de drogues, alcoolisme
- Manque de coopération du patient
- Hypersensibilité au matériau de l'implant
- Spondylolisthesis supérieur au degré 1 ou spondylolisthesis instable
- Scoliose supérieure à 25 degrés
- Ostéopénie marquée

Effets secondaires

Les effets indésirables possibles sont les suivants:

- Défaillance clinique (c.-à-d. douleurs ou lésion) due à un implant tordu, détaché, usé ou brisé, en cas de disjonction hors de l'ancrage, de dislocation et/ou de migration de l'implant
- Douleurs et/ou sensations fictives provoquées par l'implant
- Infections primaires ou secondaires
- Réactions allergiques au matériau de l'implant
- Lésions neurologiques
- Fractures vertébrales
- Lésion de vaisseaux sanguins, de nerfs ou d'organes
- Hématomes et/ou troubles de la cicatrisation, hémorragies
- Thromboses veineuses, embolie pulmonaire et arrêt cardiaque
- Décès



Consignes de sécurité

- Lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation et se familiariser avec la technique chirurgicale.
- Conserver le mode d'emploi en un lieu accessible à tout le personnel.
- Le chirurgien doit maîtriser en théorie comme en pratique les techniques chirurgicales reconnues. Le chirurgien porte la responsabilité de l'implantation correcte.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des complications survenues du fait d'un diagnostic erroné, d'un mauvais choix de l'implant, de techniques chirurgicales inadaptées, des limites de la méthode thérapeutique ou d'une asepsie insuffisante.
- Ne combiner en aucun cas entre eux des composants d'implants modulaires de différents fabricants.
- L'implant mis en place doit être consigné dans le dossier du patient (avec nom, référence et numéro de lot).
- En phase postopératoire, on veillera en plus de l'entraînement musculaire et de mobilité, à ce que le médecin traitant informe le patient de manière appropriée sur les règles de comportement à suivre après l'opération.
- Des lésions des structures portantes peuvent entraîner le détachement de l'implant et provoquer une dislocation et une migration ou d'autres complications. Pour garantir un dépistage aussi précoce que possible des facteurs favorisant un dysfonctionnement de l'implant, contrôler régulièrement l'implant après l'opération avec des procédés adaptés.
- Une fracture de l'ailette de l'implant coflex™ peut se produire durant la préparation lorsque les ailettes sont ouvertes par dépliage ou durant l'insertion lorsque les ailettes sont pliées.



- Ne jamais réutiliser les implants. Même si l'implant ne semble pas détérioré, des contraintes antérieures peuvent avoir provoqué des dommages invisibles qui pourraient entraîner une défaillance de l'implant.



- N'utilisez jamais des implants si l'emballage est endommagé. Un implant dont l'emballage est endommagé peut être lui-même endommagé et ne peut donc pas être utilisé.



- N'utilisez jamais des implants ayant dépassé leur date d'expiration.



Compatibilité IRM

Des tests non cliniques ont démontré que l'implant interlaminaire coflex™ est compatible sous conditions avec la résonance magnétique. L'examen est possible en sécurité dans les conditions suivantes:

- champ magnétique statique de 1,5 tesla (1,5 T) ou 3,0 teslas (3,0 T)
- Champ de gradient spatial allant jusqu'à:
 - 11.230 G/cm (112,3 T/m) pour les systèmes 1,5 T
 - 5.610 G/cm (56,1 T/m) pour les systèmes 3,0 T
- Taux moyen maximum d'absorption spécifique du corps entier de:
 - 2,0 W/kg pendant 15 minutes de balayage en mode de fonctionnement normal à 1,5 T
 - 2,0 W/kg pendant 15 minutes de balayage en mode de fonctionnement normal à 3,0 T

3,0 T chauffage RF

Dans des tests non cliniques avec excitation de l'antenne corps, l'implant interlaminaire coflex™ a produit une augmentation de température inférieure à 3,5 °C au taux maximum d'absorption



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

spécifique du corps entier de 2,0 W/kg, tel qu'évalué par calorimétrie pendant 15 minutes de balayage dans un scanner d'IRM 3,0 T Siemens Trio (MRC20587) avec logiciel SYNGO MR A30 4VA30A.

1,5 T chauffage RF

Dans des tests non cliniques avec excitation de l'antenne corps, l'implant interlaminaire coflex™ a produit une augmentation de température inférieure à 3,5 °C au taux maximum d'absorption spécifique du corps entier de 2,0 W/kg, tel qu'évalué par calorimétrie pendant 15 minutes de balayage dans un scanner IRM 3,0 T Siemens Trio (MRC20587) avec logiciel SYNGO MR A30 4VA30A.

 *Le comportement de chauffage RF n'est pas proportionnel à l'intensité du champ statique. Les dispositifs qui ne montrent pas d'échauffement détectable à une intensité de champ peuvent déployer des valeurs élevées de chauffage localisé pour une autre intensité de champ.*

Artéfact de RM

Lors du test avec un système 3,0 T avec séquençage de l'écho de spin, la forme de l'anomalie d'image suit le contour approximatif du dispositif et s'étend radialement jusqu'à 19 mm de l'implant.

Stockage, inspection et stérilisation

Stockage

L'implant est livré sous conditionnement individuel dans un emballage de protection portant une inscription correspondante.

 L'implant est stérilisé par rayonnement gamma (au moins 25 kGy).

- Toujours stocker l'implant dans l'emballage de protection d'origine.
- Ne sortir l'implant de l'emballage qu'immédiatement avant l'utilisation.
-  • Stocker l'implant en un endroit sec et sans poussière (environnement hospitalier standard).

Décontamination/Nettoyage

L'implant coflex™ n'est pas conçu pour être désinfecté ou nettoyé par l'utilisateur.

Restérilisation

 L'implant coflex™ n'est pas conçu pour être restérilisé par l'utilisateur.

Procédé

L'implant coflex™ doit être implanté uniquement avec l'implant d'essai coflex™ et les instruments appropriés. L'implant d'essai coflex™ et les instruments sont disponibles à tout moment auprès du fabricant.

Avant l'opération

Le chirurgien établit un planning chirurgical spécifiant les points suivants:

- Composant(s) d'implant et ses (leurs) dimensions
- Positionnement correct du (des) composant(s) d'implant entre les apophyses épineuses
- Détermination des points d'orientation intraopératoires

Avant l'application, les conditions suivantes doivent être remplies:

- Présence de tous les composants d'implant nécessaires
- Conditions opératoires hautement aseptiques
- Tous les instruments d'implantation requis présents et en bon état de marche, y compris l'implant d'essai coflex™

 *Ne pas utiliser et ne pas retraiter des instruments endommagés ou défectueux. Demander au représentant local ou au négociant d'assurer la réparation ou le remplacement.*

 *L'utilisation non conforme aux fins prévues d'un instrument peut entraîner une détérioration/une destruction de l'instrument et des blessures sur le patient.*

- Le chirurgien et l'équipe chirurgicale connaissent les informations relatives à la technique chirurgicale et aux implants et instruments prévus. Ces informations sont complètes et disponibles sur place.
- Le chirurgien doit être spécialisé en chirurgie de la colonne vertébrale, formé en conséquence et familiarisé avec les caractéristiques biomécaniques de la colonne vertébrale ainsi qu'avec les techniques chirurgicales concernées.

Le patient a été renseigné sur l'intervention et son accord sur les informations suivantes dûment consigné:

- Le patient est conscient des risques liés aux interventions de neurochirurgie, de chirurgie générale, de chirurgie orthopédique, de même que des risques d'une opération sous anesthésie générale.
- Le patient a été informé sur les avantages et les inconvénients d'une implantation et sur d'éventuelles méthodes alternatives de traitement.
- Une contrainte excessive, l'usure ou une infection peuvent entraîner une défaillance de l'implant.
- La durée de vie de l'implant est fonction du poids corporel et des activités physiques du patient. L'implant ne doit pas être soumis à des contraintes excessives dues à des charges extrêmes, au travail physique ou aux activités sportives.
- Une intervention de révision peut s'avérer nécessaire en cas de défaillance de l'implant.
- Le patient doit se soumettre à un contrôle médical postérieur régulier de l'implant.

En cours d'opération

Avant utilisation, lisez la brochure de produit coflex™ et familiarisez-vous avec la technique chirurgicale, les implants correspondants et les instruments.

-  • Avant utilisation, vérifiez l'intégrité de l'emballage stérile. N'utilisez jamais des implants si l'emballage est endommagé.
-  • Avant utilisation, vérifiez la date d'expiration du produit. N'utilisez jamais des implants ayant dépassé leur date d'expiration.

Effectuez ensuite une décompression microchirurgicale et mesurez l'espace interépineux à l'aide de la partie d'essai de l'instrument. Chargez l'implant coflex™ sur la partie d'insertion de l'instrument et introduisez-le sur le site préparé. Si désiré, les ailettes de l'implant coflex™ peuvent être ouvertes avec les pinces de flexion coflex™ et fermées avec les pinces de pliage coflex™. Dépliez les ailettes uniquement de la quantité nécessaire pour introduire l'implant en toute sécurité.

Après l'opération

- Rappeler une fois encore au patient les instructions données avant l'opération.
- S'assurer que le patient a pris conscience des restrictions de ses activités physiques et des effets secondaires possibles.

Durant les six premières semaines après l'opération, le patient devrait éviter toute activité physique ardue. Des exemples d'activité physique ardue incluent le levage de poids supérieurs à 5 kg. Le patient ne devrait pas pratiquer de sports avant que le médecin ne donne son accord. Les sports incluent la natation, le golf, le tennis, la course à pied et le jogging, entre autres. Si le patient est trop actif trop tôt après l'opération, ceci peut entraîner des complications postopératoires liées ou non à l'implant.

Ceci pourrait provoquer des douleurs. Le patient pourrait avoir besoin d'une opération supplémentaire. Le patient doit signaler au médecin dès que possible après l'opération s'il ressent des douleurs ou un gonflement dans le dos ou un engourdissement dans les jambes ou les fesses. Ces symptômes peuvent être un signe que



L'implant coflex™ ne fonctionne pas correctement. Une opération supplémentaire peut être nécessaire. Le patient doit informer le médecin de tout événement traumatique, p. ex. une chute.

Intervention de révision/Retrait de l'implant

L'implant coflex™ est destiné à une implantation permanente et son enlèvement n'est pas prévu. Si l'enlèvement du dispositif est nécessaire, veuillez suivre ces instructions:

- Utiliser une approche chirurgicale adéquate pour visualiser l'implant coflex.
- L'implant coflex™ peut être enlevé à l'aide d'instruments standard tels que des ciseaux, forceps et pinces.
- Du soin doit être apporté pour enlever les tissus osseux ayant entouré les ailes du dispositif.
- Les ailes peuvent alors être ouvertes avec précaution à l'aide d'un petit ciseau pour os avant de pouvoir retirer le dispositif à l'aide de pinces ou de forceps.

Sur demande spéciale, Paradigm Spine propose un instrument de révision qui ne fait pas partie du jeu standard. Des procédures supplémentaires peuvent être nécessaires pour stabiliser la colonne vertébrale suite à l'enlèvement de l'implant coflex™, incluant l'implantation d'un nouvel implant coflex™ ou une fusion spinale.

Garantie

Tous les droits à garantie expirent en cas de réparations ou de modifications par des personnes ou des organismes non autorisés. En cas d'utilisation du produit non conforme au présent mode d'emploi, le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les conséquences sur la sécurité, la fiabilité et le fonctionnement du produit. Sous réserve de modifications techniques.

Autres informations

Vous obtiendrez davantage d'informations auprès de Paradigm Spine ou de votre représentant agréé Paradigm Spine.

Brevet

Pour des informations sur les brevets, consultez www.surgalign.com

Symboles

	Fabricant
	Date de fabrication
	Utiliser avant le
	Désignation du lot
	Référence
	Contenu de l'emballage
	Stérilisé par irradiation
	Ne pas restériliser
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Conserver au sec
	Ne pas réutiliser
	Consulter le mode d'emploi sur ce site Web
	Mise en garde
	Compatible sous conditions avec RM
	Label CE conformément à la directive 93/42/CEE



Implante interlaminar coflex™

Contenido del envase

El envase contiene un implante coflex™.

Descripción

El implante coflex™ proporciona la flexibilidad anatómica en la columna vertebral. Permite movimientos de flexión y de extensión respecto de una posición neutra en la que ambas aletas se encuentran prácticamente en paralelo.

Material

El implante coflex™ se compone de una aleación forjable de titanio/aluminio/vanadio (Ti6Al4V) (ISO 5832-3). Se suministra estéril y está disponible en varios tamaños.

Finalidad de uso

El implante coflex™ está previsto para implantación permanente entre las apófisis espinosas en uno o dos segmentos móviles lumbares y controla el movimiento del segmento en casos de estenosis lumbar o de inestabilidad degenerativa leve. El implante coflex™ también puede utilizarse hasta en 2 segmentos móviles lumbares adyacentes al/ a los nivel/es fusionados.

Indicación

Estenosis moderada o grave confirmada radiográficamente, limitada a uno o dos niveles, de L1 a L5 y acompañada o no de dolor, en la zona lumbar inferior, incluyendo condiciones como la espondilolistesis de grado 1 estable. La estabilización interlaminar se logra tras una descompresión microquirúrgica de la estenosis en el/ los nivel/es afectado/s. El implante coflex™ también puede utilizarse hasta en 2 segmentos móviles lumbares adyacentes al/ a los nivel/es fusionados.

Contraindicaciones

No aplicar el implante coflex™ en los siguientes casos:

- Situaciones médicas o quirúrgicas que lleven a desestimar una intervención quirúrgica en la columna vertebral
- Infecciones sistémicas agudas o crónicas, o infecciones vertebrales o locales
- Patologías sistémicas y enfermedades metabólicas
- Obesidad
- Embarazo
- En caso de abuso de drogas, medicamentos o alcohol
- Escasa colaboración del paciente
- Rechazo al material del implante
- Espondilolistesis mayor que la espondilolistesis de grado 1 o inestable
- Escoliosis de más de 25 grados
- Osteopenia significativa

Efectos secundarios

Pueden darse los siguientes efectos secundarios:

- Fracaso clínico (es decir, dolor o lesiones) causado por torcedura, aflojamiento, desgaste o rotura del implante, por desandlaje, dislocación y/o migración del implante
- Dolor o malestar provocados por el implante
- Infecciones primarias o secundarias
- Reacciones alérgicas al material del implante
- Lesiones neurológicas
- Fracturas vertebrales
- Lesión de vasos sanguíneos, nervios u órganos internos
- Hematomas y/o alteraciones de la cicatrización, hemorragias
- Trombosis venosas, embolia pulmonar y paro cardíaco
- Muerte



Advertencias de seguridad

- Antes de utilizar el producto, leer detenidamente las instrucciones de manejo y familiarizarse con la técnica quirúrgica.
- Debe garantizarse que todo el personal tenga acceso a las instrucciones de manejo.
- El cirujano deberá dominar tanto la teoría como la práctica de las técnicas quirúrgicas reconocidas. El cirujano se responsabilizará de realizar la implantación de forma adecuada.
- El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por complicaciones derivadas de un diagnóstico incorrecto, de la elección de un implante incorrecto, de una técnica quirúrgica inadecuada, de las limitaciones del tratamiento o bien de una asepsia insuficiente.
- No se pueden combinar componentes modulares de implantes de fabricantes diferentes.
- Anotar el implante utilizado en el historial del paciente (indicando el nombre, el número de referencia y el número de lote).
- En la fase postoperatoria el paciente, además de ejercitar la movilidad y los músculos, deberá ser informado adecuadamente por el terapeuta de las pautas de comportamiento a seguir después de la intervención.
- Si se dañan las estructuras que transmiten la fuerza, podría producirse un aflojamiento del implante, ocasionando la dislocación y la migración del mismo, u otras complicaciones. Es necesario revisar el implante con los métodos adecuados y periódicamente después de la intervención con el fin de detectar precozmente los factores que pueden favorecer una disfunción del implante.
- Puede ocurrir la rotura de la aleta de implante coflex™ si las aletas se abren torcida durante la preparación, o cuando se doblan durante la inserción.



- No reutilizar nunca los implantes. A pesar de que el implante no esté aparentemente dañado, es posible que los esfuerzos soportados con anterioridad hayan provocado daños no visibles que a su vez podrían causar el fracaso del implante.



- Jamás utilice implantes cuyo envoltorio esté dañado. Un implante con un envoltorio dañado podría no encontrarse en perfectas condiciones y, por lo tanto, no se podrá utilizar.



- Jamás utilice un implante después de su fecha de caducidad.



Compatibilidad MRI

Pruebas no clínicas han demostrado que el implante interlaminar coflex™ es MR condicional. Éste se puede escanear de forma segura en las condiciones siguientes:

- Campo magnético estático de 1,5 Tesla (1,5 T) ó 3,0 Tesla (3,0 T)
- Campo de gradiente espacial de hasta:
 - 11.230 G/cm (112,3 T/m) para sistemas de 1,5 T
 - 5.610 G/cm (56,1 T/m) para sistemas de 3,0 T
- Cuerpo entero máximo promedio de la tasa de absorción específica (SAR) de:
 - 2,0 W/kg para 15 minutos de escaneo en modo de funcionamiento normal a 1,5 T
 - 2,0 W/kg para 15 minutos de escaneo en modo de funcionamiento normal a 3,0 T



3,0 T calefacción RF

En las pruebas no clínicas con excitación del cuerpo de la bobina, el implante interlaminar coflex™ produjo un aumento de temperatura de menos de 3,5 °C en un cuerpo entero máximo promedio de tasa de absorción específica (SAR) de 2,0 W/kg, como evaluado mediante calorimetría de 15 minutos de exploración en un 3,0 T Siemens Trio (MRC20587) MR escáner con software SYNGO MR A30 4VA30A.

1,5 T calefacción RF

En las pruebas no clínicas con excitación del cuerpo de la bobina, el implante interlaminar coflex™ produjo un aumento de temperatura de menos de 3,5 °C en un cuerpo entero máximo promedio de tasa de absorción específica (SAR) de 2,0 W/kg, como evaluado mediante calorimetría de 15 minutos de exploración en un 1,5 T Siemens Espree (MRC30732) MR escáner con software SYNGO MR B17.



El calentamiento por calefacción RF no escala con la intensidad del campo estático. Los dispositivos que no presentan calefacción detectable en una intensidad de campo pueden mostrar valores altos de calentamiento localizados en otra intensidad de campo.

Artefacto MR

En pruebas usando un sistema 3,0 T con secuenciación eco de espín, la forma del artefacto de la imagen sigue el contorno aproximado del dispositivo y se extiende radialmente hasta 19 mm desde el implante.

Almacenamiento, inspección y esterilización

Almacenamiento

El implante se suministra en un envase protector individual con la rotulación correspondiente.

STERILE R El implante se ha esterilizado por rayos gamma (mín. 25 kGy).

- Almacenar el implante siempre en el interior de su envase protector original.
- No extraer el implante del envase hasta el momento de su utilización.
- Almacenar el implante en un lugar seco y libre de polvo (un entorno de hospital estándar).

Desinfección/Limpieza

El implante coflex™ no está diseñado para ser desinfectado o limpiado por el usuario.

Reesterilización

NON STERILE El implante coflex™ no está diseñado para ser reesterilizado por el usuario.

Método

El implante coflex™ sólo podrá implantarse utilizando su implante de prueba coflex™ e instrumental correspondiente. El implante de prueba coflex™ e instrumental pueden solicitarse al fabricante en cualquier momento.

Antes de la intervención

El cirujano elaborará un plan quirúrgico en el que se especificarán los siguientes puntos:

- Componente/s del implante y sus dimensiones
 - Correcta colocación del/de los componente/s del implante entre las apófisis espinosas
 - Determinación de los puntos de orientación intraoperatorios
- Antes de la aplicación deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Disponibilidad de todos los componentes del implante necesarios
 - El quirófano debe encontrarse en unas condiciones asépticas en sentido estricto
 - Todos los instrumentos necesarios para la implantación están disponibles y funcionan correctamente, incluyendo el implante de prueba coflex™



No utilizar ni limpiar o reesterilizar instrumentos dañados o defectuosos. Deberá exigirse que el representante o el distribuidor local los repare o los cambie.



El uso indebido de un instrumento puede provocar su deterioro o su destrucción y, además, puede ser la causa de lesiones en el paciente.

- El cirujano y el equipo de quirófano conocen la información sobre la técnica quirúrgica y sobre los implantes e instrumentos a utilizar. Dicha información se encuentra completa y disponible in situ.
- El cirujano deberá ser un especialista debidamente formado en cirugía de la columna vertebral y conocer bien los datos biomecánicos de la columna vertebral y las técnicas quirúrgicas relevantes.

Debe informarse previamente al paciente sobre la intervención y deberá contarse con su consentimiento sobre los siguientes puntos:

- El paciente conoce los riesgos relacionados con las intervenciones neuroquirúrgicas, de cirugía general y ortopédicas y de los riesgos que conlleva una operación bajo anestesia general.
- El paciente ha sido informado sobre las ventajas e inconvenientes de la implantación y sobre los posibles tratamientos alternativos.
- La sobrecarga, el desgaste o una infección pueden provocar el fracaso del implante.
- La durabilidad del implante depende del peso corporal y de las actividades físicas que realice el paciente. El implante no deberá soportar cargas extremas y con él no se podrá realizar un trabajo físico duro ni practicar deportes que requieran un elevado esfuerzo físico.
- En caso de fracaso del implante podría resultar necesaria una operación de revisión.
- El paciente deberá someterse a un examen médico periódico del implante.

Durante la intervención

Antes de su utilización, lea el folleto del producto coflex™ y familiarícese con la técnica quirúrgica, los implantes correspondientes y el instrumental.



- Antes de su utilización, verifique la integridad del envoltorio estéril. Jamás utilice implantes cuyo envoltorio esté dañado.



- Antes de su utilización, compruebe la fecha de caducidad del producto. Jamás utilice un implante después de su fecha de caducidad.

Efectuar la descompresión microquirúrgica y utilizar el componente de prueba del instrumental para medir el espacio interespinoso. Cargar el implante coflex™ en el aplicador del instrumental e introducirlo en el lecho del implante preparado. Si se desea, las aletas del implante coflex™ pueden abrirse con las pinzas de torcer coflex™ y cerrarse con las pinzas de doblar coflex™. Torcer las aletas abiertas sólo como sea necesario, para introducir con toda seguridad el implante.

Después de la intervención

- Volver a explicar al paciente las instrucciones dadas antes de la intervención.
- Asegurarse de que el paciente es consciente de las restricciones en cuanto a su actividad física y de los posibles efectos secundarios.

Durante las primeras seis semanas después de la cirugía, el paciente debe evitar cualquier actividad física extenuante. Ejemplos de actividad física extenuante incluyen levantamiento de más de 5 kg. El paciente no debe practicar deportes hasta que el médico lo permita. Los deportes incluyen natación, golf, tenis, correr, y jogging entre



otros. Si el paciente es muy activo demasiado pronto después de la cirugía, esto puede dar lugar a complicaciones postoperatorias relacionadas o no relacionadas con el implante.

Esto podría causar dolor. El paciente podría necesitar cirugía adicional.

El paciente debe informar al médico tan pronto como sea posible después de la cirugía si hay dolor o hinchazón en la espalda o entumecimiento en las piernas o los glúteos. Estos síntomas pueden ser señal de que el implante coflex™ no funciona correctamente. Se puede necesitar más cirugía. El paciente debe informar al médico sobre cualquier caso traumático, p.ej. caída.

Operación de revisión/Extracción del implante

El implante coflex™ está destinado a la implantación permanente y no está previsto para la extracción. Cuando sea necesario extraer el dispositivo, siga estas instrucciones:

- Utilice un procedimiento quirúrgico adecuado para visualizar el coflex.
- El implante coflex™ se puede extraer usando instrumentos estándar como cinceles, fórceps y pinzas.
- Se debe tener cuidado para eliminar el crecimiento óseo que cubre las alas del dispositivo.
- A continuación, las alas pueden ser cuidadosamente dobladas con un cincel de hueso pequeño antes de que el dispositivo se pueda sacar empleando pinzas o fórceps.

A pedido especial, Paradigm Spine ofrece un instrumento de revisión que no forma parte del set estándar. Pueden ser necesarios procedimientos adicionales para estabilizar la columna vertebral después de la extracción del implante coflex™, incluyendo la implantación de un nuevo implante coflex™ o una fusión espinal.

Garantía

Cualquier reparación o modificación en el producto realizada por personas o centros no autorizados, invalidará todos los derechos de garantía. Si el producto no se utiliza de acuerdo con estas instrucciones de manejo, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los efectos que ello pudiera tener sobre la seguridad, la fiabilidad y la capacidad operativa del producto. Sujeto a modificaciones técnicas.

Información adicional

Puede solicitar más información en cualquier momento a Paradigm Spine o al representante autorizado de Paradigm Spine.

Patentar

Para información sobre patentes, visite
www.surgalign.com

	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Fecha de caducidad
	Número de lote
	N.º de referencia
	Contenido de unidad(es) utilizables
	Esterilizado mediante radiación
	No reesterilizar
	No utilizar si el envase está roto
	Mantener seco
	No volver a usar
	Consultar las instrucciones de manejo en esta página web
	Precaución
	MR condicional
	Identificación CE según la directiva 93/42/CEE

Símbolos



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
 Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
 2023-05



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

Impianto interlaminare coflex™

Contenuto della confezione

La confezione contiene un impianto coflex™.

Descrizione

L'impianto coflex™ assicura la flessibilità anatomica della colonna vertebrale. Esso permette la flessione ed estensione rispetto ad una posizione neutra, in cui le due ali sono all'incirca parallele l'una all'altra.

Materiale

L'impianto coflex™ è realizzato in lega di titanio 6-alluminio 4-vanadio per fucinatura (ISO 5832-3). L'impianto è fornito sterile ed è disponibile in diversi formati.

Destinazione d'uso

L'impianto coflex™ è progettato per l'impianto permanente tra le apofisi spinali in uno o due segmenti di movimento lombare, di cui controlla il movimento nei casi di stenosi lombare o lieve instabilità degenerativa. L'impianto coflex™ può essere utilizzato anche in fino a due segmenti di movimento lombare adiacenti a livelli saldati.

Indicazioni

Stenosi moderata o grave, confermata radiologicamente, limitata a uno o due livelli, nel tratto L1 a L5, accompagnata o meno da dolori alla parte bassa della schiena, comprese condizioni quali spondilolistesi stabile di primo grado. La stabilizzazione interlaminare si effettua previa decompressione microchirurgica della stenosi al livello interessato (o ai livelli interessati). L'impianto coflex™ può essere utilizzato anche in fino a due segmenti di movimento lombare adiacenti a livelli saldati.

Controindicazioni

Non usare l'impianto coflex™ in presenza di:

- Condizioni mediche o chirurgiche che escludano la possibile utilità di un intervento chirurgico alla Colonna vertebrale
- Infezioni acute o croniche sistemiche, spinali o locali
- Patologie sistemiche o metaboliche
- Obesità
- Gravidanza
- Abuso di farmaci, tossicodipendenza o alcoolismo
- Insufficiente collaborazione del paziente
- Sensibilità al materiale dell'impianto
- Spondilolistesi maggiore del primo grado o spondilolistesi instabile
- Scoliosi maggiori di 25 gradi
- Osteopenia significativa

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali possibili sono:

- Fallimento clinico (ovvero dolori o lesioni) dovuto a deformazione, allentamento, usura o rottura dell'impianto, sua fuoriuscita dall'ancoraggio, dislocazione e/o migrazione
- Dolori e/o parestesie causati dall'impianto
- Infezioni primarie o secondarie
- Reazioni allergiche al materiale dell'impianto
- Lesioni neurologiche
- Fratture vertebrali
- Lesioni a carico di vasi sanguigni, nervi ed organi
- Ematomi e/o anomalie nella guarigione della ferita, emorragie
- Trombosi venose, embolie polmonari ed arresto cardiocircolatorio
- Decesso



Avvertenze relative alla sicurezza

- Prima dell'impiego leggere attentamente le istruzioni per l'uso e familiarizzare con la tecnica operatoria.
- Conservare le istruzioni per l'uso in modo che siano accessibili per tutto il personale.
- Il chirurgo deve padroneggiare sia la teoria che la pratica delle tecniche operatorie riconosciute. Il medico operante è responsabile del corretto impianto.
- Il produttore non risponde di eventuali complicanze dovute ad errata diagnosi, scelta dell'impianto non corretta, tecniche operatorie sbagliate, ai limiti intrinseci della metodica di trattamento o carente asetticità.
- Non combinare componenti modulari per impianti di diversi produttori.
- L'impianto utilizzato (nome, codice d'ordine e codice del lotto) deve essere indicato nella cartella del paziente.
- Nella fase postoperatoria, oltre alla fisioterapia ed al training muscolare, particolarmente importante è che il medico curante informi in maniera idonea sulle regole comportamentali da seguire dopo l'intervento.
- Danni alle strutture di trasmissione delle forze possono far sì che l'impianto si allenti, causando dislocazioni e migrazioni, nonché altre complicanze. Per assicurare un riconoscimento più tempestivo possibile dei fattori che favoriscono un cattivo funzionamento dell'impianto dopo l'intervento controllare regolarmente l'impianto con procedimenti idonei.
- La frattura dell'aletta dell'impianto coflex™ può verificarsi durante la preparazione se le alette vengono deformate durante l'apertura o durante l'inserimento se le alette sono crimpate.



- Non riutilizzare mai gli impianti. Anche se l'impianto non appare danneggiato, precedenti sollecitazioni possono aver causato danni invisibili, che possono determinarne il fallimento.



- Non utilizzare impianti se la confezione è danneggiata. Un impianto da una confezione danneggiata può infatti essere esso stesso danneggiato e pertanto non deve essere usato.



- Non utilizzare in nessun caso gli impianti dopo la loro data di scadenza.



Compatibilità con esami radiografici a risonanza magnetica (MRI)

Test non clinici hanno dimostrato che l'impianto interlaminare coflex™ ha una compatibilità RM condizionata. Il suo esame radiografico risulta sicuro nelle seguenti condizioni:

- Campo magnetico statico di intensità pari a 1,5 Tesla (1,5 T) o a 3,0 Tesla (3,0 T)
- Campo di gradiente spaziale fino a:
 - 11.230 G/cm (112,3 T/m) per sistemi 1,5 T
 - 5.610 G/cm (56,1 T/m) per sistemi 3,0 T
- Tasso di assorbimento specifico (SAR) Massimo dell'intero corpo pari a:
 - 2,0 W/kg per 15 minuti di esame radiologico nel modo operativo normale a 1,5 T
 - 2,0 W/kg per 15 minuti di esame radiologico nel modo operativo normale a 3,0 T

Riscaldamento RF a 3,0 T

In test non clinici con eccitazione del corpo tramite bobina, l'impianto interlaminare the coflex™ ha prodotto un aumento di temperatura minore di 3,5 °C con un tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo dell'intero corpo pari a 2,0 W/kg, come valutato tramite metodo calorimetrico per 15 minuti di esame radiologico in



uno scanner RM Siemens Trio (MRC20587) MR da 3,0 T con software SYNGO MR A30 4VA30A.

Riscaldamento RF a 1,5 T

In test non clinici con eccitazione del corpo tramite bobina, l'impianto interlaminare the coflex™ ha prodotto un aumento di temperatura minore di 3,5 °C con un tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo dell'intero corpo pari a 2,0 W/kg, come valutato tramite metodo calorimetrico per 15 minuti di esame radiologico in uno scanner RM Siemens Espree (MRC30732) MR da 1,5 T con software SYNGO MR B17.

 *Il comportamento di riscaldamento RF non è scalabile con l'intensità del campo statico. I dispositivi che non presentano un riscaldamento rilevabile in corrispondenza di una specifica intensità del campo possono presentare alti valori di riscaldamento localizzato in corrispondenza di un'altra intensità del campo.*

Artefatto RM

In test eseguiti mediante un sistema a 3,0 T con sequenza spin-echo, la forma dell'artefatto dell'immagine segue il profilo approssimato del dispositivo e si estende in direzione radiale fino a 19 mm dall'impianto.

Conservazione, ispezione e sterilizzazione

Conservazione

L'impianto è fornito confezionato singolarmente in un imballo protettivo che riporta le diciture del caso.

 L'impianto è sterilizzato a raggi gamma (min. 25 kGy).

- Conservare sempre l'impianto nell'imballo protettivo originale.
- Estrarre l'impianto dalla confezione soltanto immediatamente prima dell'uso.

 • Conservare l'impianto in un luogo asciutto e privo di polvere (ambiente ospedaliero standard).

Disinfezione/Pulizia

L'impianto coflex™ non è idoneo per essere disinfectato o pulito dall'utilizzatore.

Risterilizzazione

 L'impianto coflex™ non è idoneo per essere risterilizzato dall'utilizzatore.

Procedimento

L'impianto coflex™ può essere impiantato soltanto con il relativo impianto di prova coflex™ ed i relativi strumenti.

L'impianto di prova coflex™ e gli strumenti possono essere richiesti al produttore in qualsiasi momento.

Prima dell'intervento

Il medico operante deve effettuare una pianificazione dell'intervento in cui siano specificati i seguenti punti:

- Componente (o componenti) dell'impianto e relative dimensioni
- Corretto posizionamento del componente (o dei componenti) dell'impianto tra le apofisi spinali
- Definizione dei punti di riferimento intraoperatori

Prima dell'impiego devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

- Tutti gli impianti richiesti devono essere effettivamente disponibili
- Le condizioni operatorie devono essere altamente asettiche
- Tutti gli strumenti necessari all'impianto, compreso l'impianto di prova coflex™, devono essere disponibili ed idonei a funzionare

 *Non utilizzare e non sottoporre nuovamente a preparazione sterile gli strumenti danneggiati o guasti. Richiedere la riparazione o sostituzione al rappresentante o rivenditore locale.*

 *L'utilizzo non conforme alla destinazione d'uso di uno strumento può causarne il danneggiamento/la distruzione, nonché lesioni a carico del paziente.*

- Il medico operante e l'équipe chirurgica devono conoscere perfettamente le informazioni relative alla tecnica operatoria, e agli impianti e strumenti previsti. Tali informazioni devono essere interamente disponibili in loco.
- Il medico operante deve essere uno specialista in chirurgia spinale dotato di idonea formazione e deve conoscere perfettamente le caratteristiche biomeccaniche della colonna vertebrale, nonché padroneggiare le tecniche operatorie relevanti.

Il paziente deve essere stato informato sull'intervento e deve aver fornito, con evidenza, il suo consenso rispetto a quanto segue:

- Il paziente è consapevole dei rischi correlati agli interventi neurochirurgici, di chirurgia generale e chirurgia ortopedica, nonché dei rischi correlati agli interventi in anestesia totale.
- Il paziente è stato informato su vantaggi e svantaggi di un impianto e sui metodi di trattamento alternative possibili.
- Sovraccarichi, usura o infezioni possono portare al fallimento dell'impianto.
- La vita di servizio dell'impianto dipende dal peso corporeo e dalle attività fisiche del paziente. L'impianto non deve essere sovraccaricato con sollecitazioni estreme, lavoro fisico o sport pesanti.
- In caso di fallimento dell'impianto può rendersi necessario un intervento di revisione.
- Il paziente deve regolarmente assoggettarsi a visite mediche di follow-up dell'impianto.

Durante l'intervento

Prima dell'uso leggere attentamente il prospetto del prodotto coflex™ e familiarizzare con la tecnica chirurgica, con l'impianto stesso e con gli strumenti da utilizzare.

- Prima dell'uso verificare l'integrità della confezione sterile. Non utilizzare impianti se la confezione è danneggiata.
- Prima dell'uso controllare la data di scadenza del prodotto. Non utilizzare in nessun caso gli impianti dopo la loro data di scadenza.

Eseguire la decompressione microchirurgica e misurare lo spazio interspinoso con il componente di prova dello strumento. Caricare l'impianto coflex™ sul componente inseritore dello strumento ed introdurlo nella sede preparata per l'impianto. Se necessario, le alette dell'impianto coflex™ possono essere aperte con le pinze di sagomatura coflex™ e chiuse con le pinze di crimpatura coflex™. Piegare le alette aperte solo dello stretto necessario per introdurre l'impianto in modo sicuro.

Dopo l'intervento

- Ribadire al paziente le istruzioni preoperatorie.
- Accertarsi che il paziente sia consapevole delle limitazioni alle proprie attività fisiche e dei possibili effetti collaterali.

Durante le prime sei settimane successive all'intervento chirurgico il paziente deve evitare di praticare attività faticose. Un'attività fisica faticosa è anche il sollevamento di pesi maggiori di 5 kg. Il paziente non deve praticare sport finché il medico lo ritenga opportuno. Gli sport includono, tra gli altri, il nuoto, il golf, il tennis, la corsa podistica e lo jogging. L'attività fisica eccessiva del paziente svolta in un periodo troppo vicino all'intervento chirurgico può causare complicazioni postoperatorie correlate o non correlate all'impianto.

Potrebbero insorgere dei dolori e potrebbe essere necessario un ulteriore intervento chirurgico. Dopo l'intervento chirurgico il paziente deve comunicare al medico prima possibile l'eventuale insorgenza di dolori o di gonfiore di schiena o di intorpidimenti delle gambe o delle natiche. Questi sintomi possono indicare che l'impianto coflex™ non sta funzionando correttamente. Può rendersi necessario un ulteriore intervento chirurgico. Il paziente deve



informare il medico di eventuali eventi traumatici, ad esempio di cadute.

Intervento di revisione/Espianto

L'impianto coflex™ è progettato per l'impianto permanente e solitamente non viene espiantato. Per l'eventuale rimozione del dispositivo si prega di attenersi alle seguenti istruzioni:

- Adottare un adeguato approccio chirurgico per visualizzare il coflex.
- L'impianto coflex™ può essere espiantato mediante strumenti standard quali scalpelli, forcipi e pinze.
- È necessario prestare attenzione a rimuovere il tessuto osseo cresciuto sulle alette del dispositivo.
- Le alette possono essere poi piegate e aperte mediante un piccolo scalpello per osso prima di estrarre il dispositivo per mezzo di pinze o forcipi.

Su richiesta, Paradigm Spine offre uno strumento di revisione non facente parte del set standard del dispositivo. Può essere necessario adottare ulteriori procedure per stabilizzare la spina dorsale in seguito all'espiantazione del coflex™, tra le quali l'implantazione di un nuovo coflex™ o la fusione spinale.

Garanzia

Eventuali riparazioni o modifiche effettuate da persone o centri non autorizzati comportano il decadere dei diritti di garanzia. Se il prodotto non è utilizzato in conformità alle presenti istruzioni per l'uso, il produttore non risponde delle relative ripercussioni sulla sicurezza, l'affidabilità e l'idoneità funzionale.

Modifiche tecniche riservate.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste in qualsiasi momento a Paradigm Spine o al rappresentante Paradigm Spine autorizzato.

Brevetto

Per informazioni sui brevetti vedere www.surgalign.com

Simboli

	Produttore
	Data de produzione
	Data di scadenza
	Indicazione del lotto
	Codice d'ordine
	Conteúdo de unidade(s)
	Sterilizzazione a raggi
	Non risterilizzare
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Conservare al riparo dall'umidità
	Non riutilizzabile
	Consultare le istruzioni per l'uso sul sito web indicato.
	Attenzione
	Compatibilità RM condizionata
	Marchio CE conforme alla direttiva 93/42/CEE



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05

0123



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

Implante interlaminar coflex™

Conteúdo da embalagem

A embalagem contém um implante coflex™.

Descrição

O implante coflex™ oferece flexibilidade anatómica na coluna vertebral, permitindo uma flexão e extensão a partir da posição neutra, em que as duas orelhas ficam mais ou menos uma paralela à outra.

Material

O implante coflex™ é composto de uma liga forjada de titânio 6-alumínio 4-vanádio (ISO 5832-3). Ele é fornecido de forma esterilizado e é disponível em vários tamanhos.

Aplicações

O implante coflex™ está previsto para uma implantação duradoura entre as apófises vertebrais em um ou dois segmentos lombares, por forma a controlar o movimento dos segmentos nos casos de estenose lombar ou instabilidade degenerativa ligeira. O implante coflex™ também pode ser utilizado, no máximo, em dois segmentos lombares móveis adjacentes ao(s) nível(is) fundido(s).

Indicação

Estenose média ou grave confirmada radiograficamente, limitada a um ou dois níveis, na zona L1–L5, com ou sem dores concomitantes na região lombar, incluindo patologias tais como espondilolistese estável de grau 1. A estabilização interlaminar faz-se após uma descompressão microcirúrgica da estenose no(s) nível (níveis) afectado(s). O implante coflex™ também pode ser utilizado, no máximo, em dois segmentos lombares móveis adjacentes ao(s) nível(is) fundido(s).

Contra-indicações

O implante coflex™ é contra-indicado no caso de:

- Estado geral ou cirúrgico que possa excluir o efeito pretendido pela intervenção cirúrgica na coluna vertebral
- Infecções agudas ou crónicas na coluna vertebral, locais ou do tipo sistémico
- Afecções sistémicas ou metabólicas
- Obesidade
- Gravidez
- Abuso de medicamentos ou drogas, ou dependência alcoólica
- Falta de colaboração por parte do doente
- Hipersensibilidade aos materiais usados no implante
- Espondilolistese superior a grau 1 ou espondilolistese instável
- Escoliose superior a 25 graus
- Osteopenia significante

Efeitos secundários

Os possíveis efeitos secundários incluem:

- Insuficiência clínica (i.e. dores ou ferimento) devido a um implante curvo, solto, desgastado ou quebrado no caso de relaxamento da cama de fixação, deslocação e/ou migração do implante
- Dores e/ou distúrbio da sensibilidade induzidos pelo implante
- Infecções primárias ou secundárias
- Reacções alérgicas ao material do implante
- Lesões neurológicas
- Fracturas vertebrais
- Lesão de vasos sanguíneos, nervos e órgãos
- Hematomas e/ou perturbações da cicatrização de feridas, hemorragias
- Trombosas venosas, embolia pulmonar e paragem cardíaca
- Morte



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05



Indicações de segurança

- Antes do uso, ler as instruções de uso com atenção e familiarizar-se com a técnica cirúrgica.
- Manter as instruções de uso acessíveis a todo o pessoal operatório.
- O cirurgião deverá dominar, tanto na teoria como na prática, as técnicas reconhecidas de operação. O cirurgião assume a responsabilidade por uma implantação correcta.
- O fabricante não se responsabiliza por complicações decorrentes de um diagnóstico errado, uma escolha de implante inadequado, técnicas cirúrgicas erradas, limites que possam vir a impor-se aos métodos de tratamento ou assepsia insuficiente.
- Não devem ser utilizados componentes modulares de implante provenientes de diferentes fabricantes.
- O implante usado deve ser apontado no dossier do doente (com nome, número de encomenda e número de lote).
- Na fase pós-operatória, para além do exercício de recuperação da força muscular e da mobilidade, há que se prestar especial atenção para que o médico assistente informe o doente, de forma adequada, sobre as regras de comportamento pós-operatórias.
- Possíveis danos nas estruturas que suportam o peso do corpo podem fazer com que o implante se solte e podem causar deslocação, migração e outras complicações. Por forma a assegurar uma detecção tão precoce quanto possível de factores que possam afectar o funcionamento do implante, é indispensável controlar regularmente o implante após a intervenção mediante métodos apropriados.
- Poderá ocorrer fractura da orelha do implante coflex™ durante a preparação quando as orelhas são dobradas para fora ou durante a inserção quando as orelhas são apanhadas.



- Nunca voltar a usar o implante. Mesmo quando o implante não parece estar danificado, as cargas que incidiram anteriormente sobre o implante podem ter causado danos invisíveis que podem conduzir a uma falha do implante.
- Nunca utilize implantes cuja embalagem esteja danificada. Um implante com uma embalagem danificada pode estar ele próprio danificado e, como tal, não pode ser usado.
- Nunca utilizar implantes cujo prazo de validade já tenha expirado.



Compatibilità con esami radiográfici a risonanza magnética (MRI)

Testes não clínicos demonstraram que o implante interlaminar coflex™ é condicional para RM. O exame de RM pode ser efectuado de forma segura se forem cumpridas as seguintes condições:

- Campo magnético estático de 1,5-Tesla (1,5 T) ou de 3,0-Tesla (3,0 T)
- Campo com gradiente espacial até:
 - 11.230 G/cm (112,3 T/m) para sistemas de 1,5 T
 - 5.610 G/cm (56,1 T/m) para sistemas de 3,0 T
- Taxa de absorção específica média máxima para o corpo inteiro de:
 - 2,0 W/kg para 15 minutos de RM em Modo de Funcionamento Normal a 1,5 T
 - 2,0 W/kg para 15 minutos de RM em Modo de Funcionamento Normal a 3,0 T

Aquecimento por RF de 3,0 T

Em testes não clínicos com excitação da bobina de corpo, o implante interlaminar coflex™ produziu um aumento de temperatura inferior a 3,5 °C com uma taxa de absorção específica (SAR) média máxima de corpo inteiro de 2,0 W/kg, de acordo com os resultados da análise



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

calorimétrica para 15 minutos de ressonância magnética efectuada através de um dispositivo Siemens Trio (MRC20587) de 3,0 T equipado com software SYNGO MR A30 4VA30A.

Aquecimento por RF de 1,5 T

Em testes não clínicos com excitação da bobina de corpo, o implante interlaminar coflex™ produziu um aumento de temperatura inferior a 3,5 °C com uma taxa de absorção específica (SAR) média máxima de corpo inteiro de 2,0 W/kg, de acordo com os resultados da análise calorimétrica para 15 minutos de ressonância magnética efectuada através de um dispositivo Siemens Espree (MRC30732) de 1,5 T equipado com software SYNGO MR B17.

 *Não se pode estabelecer correspondência entre o comportamento térmico da RF e a intensidade do campo estático. Os dispositivos que não apresentem um valor térmico detectável numa determinada intensidade de campo poderão apresentar valores térmicos elevados localizados numa outra intensidade de campo.*

Artefacto de RM

Em testes com um sistema de 3,0 T com sequência eco de "spin", o formato do artefacto da imagem segue aproximadamente os contornos do dispositivo e estende-se radialmente até 19 mm do implante.

Armazenamento, inspecção e esterilização

Armazenamento

O implante é embalado individualmente numa embalagem de protecção, devidamente etiquetada.

 O implante foi esterilizado com radiação gama (pelo menos 25 kGy).

- Proteger o implante sempre na embalagem de protecção original.
- Tirar o implante da embalagem apenas pouco antes da sua utilização.

 • Guardar o implante em local seco e sem pó (ambiente hospitalar normativo).

Desinfecção/Limpeza

O implante coflex™ não foi concebido para ser desinfetado ou limpo pelo utilizador.

Reesterilização

 O implante coflex™ não foi concebido para ser reesterilizado pelo utilizador.

Método

O implante coflex™ só deve ser implantado com o implante de ensaio e os instrumentos coflex™ aplicáveis. O implante de ensaio e os instrumentos coflex™ podem ser adquiridos no fabricante sempre que se achar necessário.

Antes da intervenção

O cirurgião estabelece um plano de operação que deve especificar o seguinte:

- O(s) componente(s) do implante e as suas dimensões
 - A localização correcta do(s) componente(s) do implante entre as apófises vertebrais
 - Determinação dos pontos de orientação intraoperatórios
- Antes da utilização, há que se satisfazer os seguintes pressupostos:
- Todo(s) o(s) componente(s) do implante estão disponíveis
 - Presença de condições de operação altamente assépticas
 - Todos os instrumentos necessários para a implantação estão presentes e em condições operacionais, inclusive o implante de ensaio coflex™

 *Não usar nem reprocessar os instrumentos que apresentem danos ou defeitos. Mandar reparar ou deixar substituir no agente ou no revendedor local.*

 *O uso de um instrumento para fins não conformes ao destino original pode danificar/destruir o instrumento e causar ferimentos no doente.*

- O cirurgião e a equipa operatória conhecem as informações necessárias à técnica de operação, bem como aos implantes e instrumentos previstos para a intervenção. Estas estão completamente disponíveis no local.
- O cirurgião deve ser um especialista devidamente formado na cirurgia da coluna vertebral e deve estar familiarizado com a anatomia biomecânica da coluna vertebral e as técnicas cirúrgicas relevantes.

O doente foi informado sobre a intervenção, e foi documentado o seu consentimento relativamente às seguintes informações:

- O doente está ciente dos riscos associados a intervenções neurocirúrgicas, de cirurgia geral e ortopédico-cirúrgicas, bem como dos riscos de uma operação realizada em anestesia geral.
- O doente foi informado sobre as vantagens e desvantagens associadas à utilização do implante, bem como sobre possíveis métodos de tratamento alternativos.
- Cargas excessivas, desgaste e infecção podem causar uma falha do implante.
- A vida útil de um implante depende do peso corporal e das actividades físicas do doente. É proibido expor o implante a esforços excessivos, trabalho físico ou actividades desportivas.
- No caso de falha do implante, pode ser necessário realizar uma cirurgia revisional.
- O doente terá que se submeter periodicamente a um controlo médico do implante.

Durante a cirurgia

Antes da utilização, leia o folheto do produto coflex™ e familiarize-se com a técnica cirúrgica, os respetivos implantes e os instrumentos.



- Antes da utilização, verifique a integridade da embalagem estéril. Nunca utilize implantes cuja embalagem esteja danificada.



- Antes da utilização, verifique o prazo de validade do produto. Nunca utilize implantes cujo prazo de validade já tenha expirado.

Realizar uma descompressão microcirúrgica e medir a cavidade interespinal com a ajuda da peça de ensaio do instrumento. Fixar o implante coflex™ na parte introdutora do instrumento e inserir na cama preparada. Se pretendido, as orelhas do implante coflex™ poderão ser abertas com as pinças para dobrar coflex™ e fechadas com as pinças de apanhar coflex™. Dobre as orelhas para fora apenas o necessário para introduzir o implante em segurança.

Após a cirurgia

Após a cirurgia

- Explicar novamente ao doente as instruções relativas ao comportamento pós-operatório.
- Certificar-se de que o doente tem plena consciência dos possíveis efeitos secundários da cirurgia e do facto de que as suas actividades físicas ficam limitadas.

Nas primeiras seis semanas após a cirurgia, o doente deve evitar qualquer atividade física vigorosa. Exemplos de atividade física vigorosa incluem levantar pesos superiores a 5 kg. O doente não deve praticar desporto sem consentimento médico. Os desportos incluem, entre outros, natação, golfe, ténis, corrida e jogging. Se logo após a cirurgia o doente exagerar na atividade física, poderá ter complicações pós-operatórias relacionadas ou não com o implante. Poderá sentir dores. Poderá ter de ser submetido a outra cirurgia.

Após a cirurgia, o doente deverá informar o médico logo que possível se sentir dor ou tumefação na região lombar ou dormência nos membros inferiores ou nas nádegas. Estes sintomas podem ser um sinal de que o implante coflex™ não está a funcionar



adequadamente. Poderá ser necessária outra cirurgia. O doente deverá informar o médico de qualquer episódio traumático, por ex. uma queda.

Cirurgia revisional/Remoção do implante

O implante coflex™ destina-se a uma implantação permanente pelo que, normalmente, não volta a ser removido. Se for necessário remover o dispositivo, siga as seguintes instruções:

- Utilize uma abordagem cirúrgica adequada para visualizar o coflex.
- O implante coflex™ pode ser removido utilizando instrumentos padronizados, como cincéis, fórceps e alicates.
- É necessária precaução na remoção do osso que cresceu sobre as orelhas do dispositivo.
- De seguida, as orelhas podem ser cuidadosamente dobradas para fora com um pequeno cincel de osso, antes do dispositivo ser removido com um alicate ou fórceps.

Mediante pedido especial, a Paradigm Spine oferece um instrumento de revisão que não faz parte do conjunto padronizado.

Poderá ser necessário realizar procedimentos adicionais para estabilizar a coluna após a remoção de um implante coflex™, incluindo a implantação de um novo implante coflex™ ou a fusão da coluna vertebral.

Garantia

Toda e qualquer reparação ou modificação que seja realizada por pessoas ou entidades não autorizadas conduz à extinção dos direitos decorrentes da garantia. Se o produto não for utilizado de acordo com as instruções de uso, o fabricante não se responsabiliza por consequências daí resultantes sobre a segurança, fiabilidade e operacionalidade do produto.

Reservado o direito de proceder a alterações técnicas.

Informações pormenorizadas

Para obter mais informações, poderá contactar a qualquer altura o fabricante Paradigm Spine ou o representante autorizado da Paradigm Spine.

Patente

Para informações sobre patentes veja www.surgalign.com

Símbolos

	Fabricante
	Data de fabrico
	Data de validade
	Designação do lote
	Nº de encomenda
	Conteúdo de unidade(s) utilizável(utilizáveis)
	Esterilização por radiação
	Não reesterilizar
	Não utilizar caso a embalagem esteja danificada
	Guardar em local seco
	Não reutilizar
	Consultar as instruções de uso neste sítio da Internet.
	Precaução
	Condisional para RM
	Marcação CE segundo a Directiva 93/42/CEE



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

coflex™ interlaminair implantaat

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat een coflex™- implantaat.

Beschrijving

Het coflex™- implantaat zorgt voor anatomische flexibiliteit in de wervelkolom. Het maakt een buiging en strekking mogelijk ten opzichte van een neutrale stand, waarin de beide vleugels ongeveer parallel staan.

Materiaal

Het coflex™- implantaat bestaat uit een titanium 6-aluminium 4-vanadium-smeedlegering (ISO5832-3). Het wordt steriel geleverd en is beschikbaar in verschillende maten.

Gebruiksdoel

Het coflex™- implantaat is bestemd voor permanente implantatie tussen de doornuitsteeksels in één of twee lumbale bewegingssegmenten en controleert de segmentbeweging in geval van lumbale stenose of lichte degenerative instabiliteit. Het coflex™- implantaat kan tevens worden gebruikt in maximaal 2 lumbale bewegingssegmenten grenzend aan het/de gefuseerde niveau(s).

Indicaties

Radiografisch bevestigde matige tot ernstige stenose, beperkt tot 1 of 2 niveaus, in het bereik L1 tot L5 en wel of niet gepaard gaand met lage rugpijn, inclusief aandoeningen zoals stabiele spondylolisthese van klasse 1. De interlaminair stabilisatie gebeurt na de microchirurgische decompressie van de stenose op het (de) betreffende niveau(s). Het coflex™- implantaat kann tevens worden gebruikt in maximaal 2 lumbale bewegingssegmenten grenzend aan het/de gefuseerde niveau(s).

Contra-indicaties

Gebruik het coflex™- implantaat niet bij:

- Medische of chirurgische toestanden die de mogelijke baten van een chirurgische ingreep aan de wervelkolom uitsluiten
- Acute of chronische systemische, spinale of lokale infecties
- Systemische aandoeningen en stofwisselingsziekten
- Zwaarlijvigheid
- Zwangerschap
- Medicatie- of drugsmisbruik of alcoholverslaving
- Gebrek aan medewerking vanwege de patiënt
- Overgevoeligheid voor het implantaatmateriaal
- Spondylolisthese ernstiger dan klasse 1 of onstabiele spondylolisthese
- Scoliose van meer dan 25 graden
- Significante osteopenie

Bijwerkingen

Mogelijke ongewenste effecten:

- Klinisch falen (m.n. pijn of verwonding) ten gevolge van een verwronken, losgekomen, versleten of gebroken implantaat, bij loskomen uit de verankering, dislocatie en/of migratie van het implantaat
- Dor het implantaat veroorzaakte pijn en/of paresthesieën
- Primaire of secundaire infecties
- Allergische reacties op het implantaatmateriaal
- Neurologische schade
- Wervelfracturen
- Beschadiging van bloedvaten, zenuwen en organen
- Hematomen en/of wondhelingsstoomisen, bloedingen
- Venieuze trombosen, longembolie en hartstilstand
- Overlijden



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05



Veiligheidsinstructies

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor het gebruik en zorg ervoor dat u zich de operatietechniek eigen maakt.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een plaats die toegankelijk is voor al het personeel.
- De operatuer moet de erkende operatietechnieken zowel theoretisch als ook praktisch beheersen. De operatuer is verantwoordelijk voor de oordeelkundige implantatie.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor complicaties ten gevolge van een foutieve diagnose, verkeerde implantaatkeuze, verkeerde operatietechnieken, bperkingen van de behandelmethode of gebrek aan asepsis.
- Er mogen geen modulaire implantaatcomponenten van verschillende fabrikanten worden gecombineerd.
- Het gebruikte implantaat moet (met naam, bestelnummer en lotnummer) in het patiëntdossier worden genoteerd.
- In de postoperatieve fase dient man er naast de mobiliteits- en spiertraining ook op toe te zien dat de behandelende arts de patiënt grondig informeert over de postoperatieve gedragsregels.
- Beschadiging van de kraattoverbrengende structuren kan leiden tot loskomen van het implantaat, dislocatie en migratie en andere complicaties. Om eventuele factoren die kunnen bijdragen tot het falen van het implantaat vroegtijdig op te sporen, moet het implantaat na de operatie regelmatig met gepaste technieken worden gecontroleerd.
- Breuk van een vleugel van het coflex-TM-implantaat kann optreden tijdens de voorbereiding wanneer de vleugels open worden gebogen of tijdens insertie wanneer de vleugels dicht worden gebogen.



- Hergebruik nooit implantaten. Ook als het implantaat nog intact lijkt, kunnen vroege belastingen onzichtbare schade hebben veroorzaakt, die tot implantaatfalen kan leiden.



- Gebruik nooit implantaten uit beschadigde verpakkingen. Een implantaat in een beschadigde verpakking kan zelf beschadigd zijn en mag om die reden niet worden gebruikt.



- Gebruik nooit implantaten waarvan de vervaldatum is verlopen.



Compatibiliteit met MRI

Niet-klinische tests hebben aangetoond dat het coflex™ interlaminaire Implantaat MRI-veilig is onder bepaalde voorwaarden (MR Conditional). Onder de volgende voorwaarden kan het veilig worden gescand:

- Statisch magnetisch veld van 1,5 Tesla (1,5T) of 3,0 Tesla (3,0 T)
- Spatiële veldgradiënt tot:
 - 11.230 G/cm (112,3 T/m) voor 1,5 T-systemen
 - 5.610 G/cm (56,1 T/m) voor 3,0 T-systemen
- Maximale specifieke absorptieratio (SAR), gemiddeld over het gehele lichaam, van:
 - 2,0 W/kg gedurende 15 minuten scannen in normale bedrijfstoestand bij 1,5 T
 - 2,0 W/kg gedurende 15 minuten scannen in normale bedrijfstoestand bij 3,0 T

3,0 RF-opwarming

In niet-klinische tests met lichaamsspoelexcitatie produceerde het coflex™ interlaminaireimplantaat een temperatuurstijging van minder dan 3,5°C onder een maximale specifieke absorptieratio (SAR), gemiddeld over het gehele lichaam, van 2,0 W/kg, bepaald



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

met calorimetrie gedurende 15 minuten scannen in een 3,0 T Siemens Trio (MRC20587) MRI-Scanner met SYNGO MR A30 4VA30A software.

1,5 RF-opwarming

In niet-klinische tests met lichaamsspoelexcitatie produceerde het coflex™ interlaminaire Implantaat een temperatuurstijging van minder dan 3,5°C onder een maximale specifieke absorptieratio (SAR), gemiddeld over het gehele lichaam, van 2,0 W/kg, bepaald met calorimetrie gedurende 15 minuten scannen in een 1,5 T Siemens Espree (MRC30732) MRI-Scanner met SYNGO MR B17 software.

 *Het RF-opwarmingsgedrag schaalt niet met de statische veldsterkte. Instrumenten die geen meetbare opwarming vertonen bij één bepaalde veldsterkte kunnen hoge lokale opwarming vertonen bij een andere veldsterkte.*

MRI-artefact

In tests met een 3,0 T-systeem met spin-echo sequenties volgt de vorm van het beeldartefact globaal de contour van het instrument en strekt het zich uit tot 19 mm radiale afstand van het implantaat.

Bewaring, inspectie en sterilisatie

Bewaring

Het coflex™ implantaat wordt individueel verpakt in een beschernde verpakking met opschrift geleverd.

 Het implantaat is met gammastralen (min. 25 kGy) gesteriliseerd.

- Bewaar het implantaat altijd in zijn originele beschermende verpakking
- Haal het implantaat pas net voor het gebruik uit de verpakking.
- Bewaar het implantaat in een droge en stofvrije ruimte (normale ziekenhuisomstandigheden).

Desinfectering/Reiniging

Het coflex™-implantaat is nieuw geschikt voor desinfectering of reiniging door de gebruiker.

Resterilisatie

 Het coflex™-implantaat is niet geschikt voor resterilisatie door de gebruiker.

Procédé

Het coflex™-Implantaat mag uitsluitend worden geïmplanteerd met bijbehorende coflex™- trialimplantaat en instrumenten.

Coflex™.trialimplantaat en instrumenten zijn te allen tijde verkrijgbaar bij de fabrikant..

Preoperatief

De operateur stelt een operatieplan op, waarin de volgende punten worden gespecificeerd:

- Implantaatcomponent(en) en hun afmetingen
- Juiste positionering van de implantaatcomponent(en) tussen de doornuitsteeksels
- Bepaling van de intraoperatieve oriëntatiepunten

Voor de toepassing moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- Alle noodzakelijke implantaatcomponenten ter beschikking
- Uiterst aseptische operatieomstandigheden
- Alle benodigde implantatie-instrumenten aanwezig en gebruiksklaar, inclusief het coflex™-proefimplantaat

 *Beschadigde of defecte instrumenten mogen niet meer worden gebruikt of opnieuw gereinigd/gesteriliseerd. Laat ze repareren of vervangen door uw plaatselijke vertegenwoordiger of dealer.*

 *Het ondoelmatige gebruik van een instrument kann tot beschadiging/vernieling van het instrument en tot verwonding van de patiënt leiden.*

- De operateur en het operatieteam kennen de informatie over de operatietechniek en de voorziene implantaten en instrumenten. Deze ligt per plaatse volledig ter inzage.

- De operateur moet een gekwalificeerd specialist in chirurgie van de wervelkolom zijn en vertrouwd zijn met de biomechanische eigenschappen van de wervelkolom en de relevante operatietechnieken.

De patiënt wordt over de ingreep geïnformeerd en heeft zich schriftelijk akkoord verklaard met de volgende informatie:

- De patiënt is zich bewust van de risico's van neurochirurgie, algemene chirurgie en orthopedisch-chirurgische ingrepen, alsook van de risico's van een operatie onder volledige narcose.
- De patiënt is geïnformeerd over de voor- en nadelen van een implantaat en over mogelijk alternatieve behandelmethoden.
- Overbelasting, slijtage en infecties kunnen leiden tot implantaatfalen.
- De levensduur van het implantaat is afhankelijk van het lichaamsgewicht en de lichamelijke activiteiten van de patiënt. Het implantaat mag niet worden overbelast door extreme belasting, zware lichamelijke inspanningen of sport.
- Wanneer het implantaat faalt, kann een revisieoperatie noodzakelijk zijn.
- De patiënt moet de toestand van het implantaat regelmatig door zijn arts laten controleren.

Intraoperatief

Lees voor gebruik de coflex™-productbrochure aandachtig door en maak uzelf vertrouwd met de chirurgische techniek, de bijbehorende implantaten en de instrumenten.

- Controleer voor gebruik dat de steriele verpakking onbeschadigd is. Gebruik nooit implantaten uit beschadigde verpakkingen.

- Controleer voor gebruik de productvervaldatum. Gebruik nooit implantaten waarvan de vervaldatum is verlopen.

Voer micr chirurgische decompressie uit en meet de interspiale ruimte met het triadeel van het instrument. Zet het coflex™-implantaat op het insertiedeel van het instrument en introduceer het op de geprepareerde locatie. Indien gewenst kunnen de vleugels van het coflex™-implantaat worden opengebogen met de coflex™-bugitang en dichtgebogen met de coflex™-crimp tang. Buig de vleugels slechts zover open als nodig om het implantaat veilig te kunnen introduceren.

Postoperatief

- Herinner de patiënt nogmaals aan de preoperatieve instructies.
- Zorg ervoor dat de patiënt zich bewust is van de beperkingen die gelden voor zijn lichamelijke activiteiten en de mogelijke ongewenste effecten.

Gedurende de eerste zes weken na de ingreep moet de patient elke zware lichamelijke inspanning vermijden. Een voorbeeld van zware lichamelijke inspanning is tillen van meer dan 5 kg. De patient mag geen sport beoefnen tot de arts hierover testemming geeft. Sport omvat onder andere zwemmen, golf, tennis, hardlopen en joggen. Als de patient te snel na de ingreep te actief is, kan dat leiden tot implantaatgerelateerde en -ongerelateerde postoperatieve complicaties.

Deze kunnen pijn veroorzaken. Mogelijk heeft de patient dan aanvullende chirurgie nodig.

Na de ingreep moet de patient zijn arts zo snel mogelijk op de hoogte stellen bij het optreden van pijn of zwellingen in de rug of gevoelloosheid in benen of billen. Deze symptomen kunnen een aanwijzing zijn dat het coflex™ implantaat niet goed werkt. Mogelijk is dan aanvullende chirurgie nodig. De patient moet zijn arts op de hoogte stellen van eventuele traumatische geburtenissen, bv. Vallen.



Revisieoperatie/implantaatverwijdering

Het coflex™ implantaat is bedoeld voor permanente implantatie en wordt onder normale omstandigheden niet verwijderd. Voer onderstaande istructies uit wanneer het instrument moet worden verwijderd:

- Gebruik een doelmatige chirurgische aanpak om zicht te krijgen op het coflexTM implantaat.
- Het coflexTM implantaat kann worden verwijderd met standaard instrumenten, zoals beitels en tangen.
- Eventuele botovergroei over de vleugels van het implantaat moet zorgvuldig worden verwijderd.
- Vervolgens kunnen de vleugels voorzichtig worden opengebogen met heulp van een kleine botbeitel en kann het instrument met een tang worden verwijderd.

Op speciaal verzoek biedt Paradigm Spine een revisieinstrument aan, dat niet is inbegrepen in de standaard set. Na verwijdering van het coflex™ implantaat kunnen aanvullende procedures zijn vereist om de ruggengraat te stabiliseren, waaronder implantatie van een nieuw coflex™ implantaat of spinale fusie.

Garantie

Bij reparaties of aanpassingen door niet-geautoriseerde personen of instanties vervalt elke aanspraak op garantie. De fabrikant kann niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen voor de veiligheid, betrouwbaarheid en goede werking van het product, indien het product niet volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt. Technische wijzigingen voorbehouden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Paradigm Spine-vertegenwoordiger.

Patent

Voor patent-informatie zie www.surgalign.com

Symbolen

	Fabrikant
	Productiedatum
	Uiterste gebruiksdatum
	Batchidentificatie
	Bestelnummer
	Aantal bruikbare eenheden
	Gesteriliseerd door 21ctivi van bestraling
	Niet resteriliseren
	Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is
	Droog bewaren
	Niet hergebruiken
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op deze website.
	Voorzichtig
	CE-certificatie conform richtlijn 93/42/EEG



Μεσοπετάλιο εμφύτευμα coflex™

Περιεχόμενο

Η συσκευασία περιέχει ένα εμφύτευμα coflex™.

Περιγραφή

Το εμφύτευμα coflex™ παρέχει ανατομική σπονδυλική ευκαμψία. Επιτρέπονται η κάμψη και η έκταση σε σχέση με την ουδέτερη θέση που αντιστοιχεί στην σχεδόν παράλληλη θέση των δύο πτερύγων.

Υλικό

Το εμφύτευμα coflex™ κατασκεύαζεται από κατεργασμένο κράμα τιτανίου 6-αλουμινίου 4-βαναδίου (ISO 5832-3). Παρέχεται στείρο και είναι διαθέσιμο σε πολλά μεγέθη.

Προριζόμενη χρήση

Το εμφύτευμα coflex™ προορίζεται για μόνιμη εμφύτευση ανάμεσα στις ακανθωδεις αποφύσεις 1 ή 2 τμήματα οσφυϊκής κίνησης και ελέγχει την τρηματική κίνηση σε περιπτώσεις οσφυϊκής στένωσης ή ήπιας εκφυλιστικής αστάθειας. Το εμφύτευμα coflex™ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε έως και 2 τμήματα οσφυϊκής κίνησης παρακείμενα ενός ή περισσότερων επιπέδων που έχουν υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία.

Ενδείξεις

Ακτινοσκοπικά επιβεβαιωμένη μέτρια έως σοβαρή στένωση απομονώμενη σε 1 ή 2 επίπεδα, στην περιοχή των O1 έως O5 σε ασθενή με ή χωρίς ταυτόχρονη οσφυαλγία, συμπεριλαμβανομένων παθήσεων όπως η σπονδυλούλισθηση σταθερού βαθμού 1. Η μεσοπετάλια σταθεροποίηση εκτελείται μετά από μικροχειρουργική αποσυμπίεση της στένωσης στα επηρεαζόμενα επίπεδα. Το εμφύτευμα coflex™ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε έως και 2 τμήματα οσφυϊκής κίνησης παρακείμενα ενός ή περισσότερων επιπέδων που έχουν υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία.

Αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε το εμφύτευμα coflex™ στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Οποιαδήποτε ιατρική ή χειρουργική πάθηση που αποκλείει το πιθανό όφελος χειρουργικής επέμβασης στην σπονδυλική στήλη
- Οξείες ή χρόνιες συστημικές λοιμώξεις της σπονδυλικής στήλης ή τοπικές
- Συστημικές ή μεταβολικές νόσου
- Πλασαρκία
- Κύηση
- Εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες, κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοολισμός
- Απουσία συνεργασίας του ασθενή
- Ευαισθησία ξένου σώματος που αφορά το υλικό του εμφυτεύματος
- Σπονδυλούλισθηση βαθμού υψηλότερου του 1 ή ασταθής σπονδυλούλισθηση
- Σκολίωση υψηλότερη των 25 μοιρών
- Σημαντική οστεοπενία

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Κλινική αστοχία (δηλ., πόνος ή τραυματισμός) λόγω κάμψης, χαλάρωσης, φθοράς, θραύσης του εμφυτεύματος, απώλειας καθηλωσης, μετατόπισης ή/ και μετακίνησης
- Πόνος ή/και μη φυσιολογική αίσθηση λόγω της παρουσίας του εμφυτεύματος
- Πρωτοπαθείς ή/και δευτεροπαθείς λοιμώξεις
- Άλλεργικές αποκρίσεις στο υλικό του εμφυτεύματος
- Νευρολογικός τραυματισμός

- Κάταιγμα σπονδύλων

- Τραυματισμός αγγείων, νεύρων και οργάνων

- Αιμάτωμα ή/και διαταραγμένη επούλωση τραύματος, αιμορραγία

- Φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή και καρδιακή ανακοπή

- Θάνατος



Προφυλάξεις ασφαλείας

- Πριν τη χρήση, διαβάστε ενδελεχώς αυτές τις οδηγίες χρήσης και εξοικειωθείτε με την χειρουργική τεχνική.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε μέρος προσβάσιμο από το σύνολο του προσωπικού.


- Ο εκτελών χειρουργός πρέπει να είναι απόλυτος κύριος και των πρακτικών και των θεωρητικών πλευρών των καθιερωμένων χειρουργικών τεχνικών. Η σωστή χειρουργική εκτέλεση της εμφύτευσης τελεί υπό την ευθύνη του εκτελούντος χειρουργού.

- Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν επιπλοκές που προκύπτουν από λανθασμένη διάγνωση, επιλογή λανθασμένου εμφυτεύματος, λανθασμένες χειρουργικές τεχνικές, τους περιορισμούς των μεθόδων αγωγής ή ανεπαρκή ασημία.

- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός τυμημάτων αρθρωτών εμφυτευμάτων από διαφορετικούς προμηθευτές.
- Ο φάκελος κάθε ασθενή πρέπει να τεκμηριώνεται το εμφύτευμα που χρησιμοποιήθηκε (ονομασία, αριθμός είδους, αριθμός παρτίδας).

- Κατά τη μετεγχειρητική φάση, εκτός από την κινητικότητα και την εξάσκηση των μυών, έχει ιδιαίτερη σημασία να κρατά ο ιατρός καλά ενήμερο τον ασθενή σχετικά με τις μετεγχειρητικές απαιτήσεις συμπεριφοράς.

- Ζημιά σε δομές που φέρουν βάρος μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση, μετατόπιση και μετακίνηση, καθώς και άλλες επιπλοκές. Για να διασφαλιστεί ο δυνατόν συντομότερος εντοπισμός τέτοιου είδους αποφασιστικών σημείων δυσλειτουργίας του εμφυτεύματος, το εμφύτευμα πρέπει να ελέγχεται περισσικά μετεγχειρητικά με χρήση κατάλληλων τεχνικών.

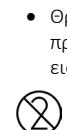

- Μην επαναχρησιμοποιείτε ποτέ ένα εμφύτευμα. Αν και το εμφύτευμα μπορεί να μοιάζει άθικτο, παλαιότερες καταπονήσεις μπορεί να έχουν δημιουργήσει μη ορατή ζημιά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστοχία του εμφυτεύματος.



- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εμφυτεύματα, εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. Ένα εμφύτευμα του οποίου η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά μπορεί να έχει και το ίδιο υποστεί ζημιά, και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.



- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εμφυτεύματα που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους.



Συμβατότητα με MRI

Μη κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι το μεσοπετάλιο εμφύτευμα coflex™ είναι ασφαλές υπό προϋποθέσεις για χρήση με μαγνητική τομογραφία. Μπορεί να σαρωθεί με ασφάλεια υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- Στατικό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla (1,5 T) ή 3,0 Tesla (3,0 T)

- Χωρικό βαθμιδωτό πεδίο έως και:

- 11.230 G/cm (112,3 T/m) για συστήματα 1,5 T

- 5.610 G/cm (56,1 T/m) για συστήματα 3,0 T

- Μέγιστη μέση τιμή ρυθμού ειδικής απορρόφησης (SAR) για ολόσωμη έκθεση:



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

- 2,0 W/kg για 15 λεπτά σάρωσης σε κανονικό τρόπο λειτουργίας στα 1,5 T
- 2,0 W/kg για 15 λεπτά σάρωσης σε κανονικό τρόπο λειτουργίας στα 3,0 T

Θέρμανση ραδιοσυχνοτήτων 3,0 T

Σε μη κλινικές δοκιμές με διέγερση πηνίου σώματος, το Μεσοπετάλιο εμφύτευμα coflex™ παρουσίασε αύξηση της θερμοκρασίας μικρότερη από 3,5 °C σε μέγιστη μέση τιμή ρυθμού ειδικής απορρόφησης (SAR) για ολόσωμη έκθεση 2,0 W/kg, όπως υπολογίστηκε βάσει θερμιδομετρίας για 15 λεπτά σάρωσης σε ένα μαγνητικό τομογράφο 3,0 T Siemens Trio (MRC20587) με λογισμικό SYNGO MR A30 4VA30A.

Θέρμανση ραδιοσυχνοτήτων 1,5 T

Σε μη κλινικές δοκιμές με διέγερση πηνίου σώματος, το Μεσοπετάλιο εμφύτευμα coflex™ παρουσίασε αύξηση της θερμοκρασίας μικρότερη από 3,5°C σε μέγιστη μέση τιμή ρυθμού ειδικής απορρόφησης (SAR) για ολόσωμη έκθεση 2,0 W/kg, όπως υπολογίστηκε βάσει θερμιδομετρίας για 15 λεπτά σάρωσης σε ένα μαγνητικό τομογράφο 1,5T Siemens Espree (MRC30732) με λογισμικό SYNGO MR B17.

 **H συμπεριφορά θέρμανσης ραδιοσυχνοτήτων δεν κλιμακώνεται ανάλογα με την ισχύ του στατικού πεδίου. Συσκευές που δεν επιδεικνύουν εντοπίσμη θέρμανση σε κάποια ισχύ πεδίου μπορεί να επιδείξουν υψηλές τιμές τοπικής θέρμανσης σε άλλη ισχύ πεδίου.**

Ψευδοεικόνα MR

Κατά τις δοκιμές με χρήση συστήματος 3,0 T με ακολουθία παλμών ηχούς περιστροφής (spin-echo), το σχήμα της ψευδοεικόνας ακολουθεί προσεγγιστικά το περίγραμμα της συσκευής και εκτείνεται ακτινικά έως 19 mm από το εμφύτευμα.

Αποθήκευση, επιθεώρηση και αποστείρωση

Αποθήκευση

Τα εμφυτεύματα συσκευάζεται μεμονωμένα σε προστατευτική συσκευασία που επισημαίνεται σύμφωνα με τα περιεχόμενά της.

STERILE R Το εμφύτευμα αποστειρώνεται με αποστείρωση με ακτίνες γάμμα (25 kGy κατ' ελάχιστον).

- Αποθηκεύετε πάντα το εμφύτευμα στην αρχική προστατευτική συσκευασία.
- Μην αφαιρείτε το εμφύτευμα από τη συσκευασία μέχρι αμέσως πριν τη χρήση.

 • Αποθηκεύετε το εμφύτευμα σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη (τυπικό νοσοκομειακό περιβάλλον).

Απολύμανση/καθαρισμός

Το εμφύτευμα coflex™ δεν έχει σχεδιαστεί για απολύμανση ή καθαρισμό από το χρήστη.

Επαναπαστείρωση

 Το εμφύτευμα coflex™ δεν έχει σχεδιαστεί για επαναπαστείρωση από το χρήστη.

Διαδικασία

Το εμφύτευμα coflex™ πρέπει να εμφυτεύεται μόνο με το σχετικό δοκιμαστικό και εργαλεία coflex™. Το δοκιμαστικό και εργαλεία coflex™ διατίθενται από τον κατασκευαστή ανά πάσα στιγμή.

Προεγχειρητικά

Ο εκτελών χειρουργός συντάσσει ένα σχέδιο της χειρουργικής επέμβασης προσδιορίζοντας και τεκμηριώνοντας τα παρακάτω:

- Εξαρτήματα εμφυτεύματος και διαστάσεις τους.
- Σωστή θέση των εξαρτημάτων εμφυτεύματος ανάμεσα στις ακανθώδεις αποφύσεις.
- Προσδιορισμός των ενδοεγχειρητικών σημείων προσανατολισμού.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες:

- Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα εμφυτεύματος είναι άμεσα διαθέσιμα.
- Υφίστανται χειρουργικές συνθήκες υψηλής ασηψίας.
- Όλα τα απαιτούμενα εργαλεία εμφύτευσης πρέπει να είναι διαθέσιμα και λειτουργικά, συμπεριλαμβανούμενου του δοκιμαστικού coflex™

 **Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ή επεξεργάζεστε εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι ελαττωματικά. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή έμπορο για επισκευή ή αντικατάσταση.**

 **Η χρήση ενός εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις προοριζόμενες μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά/θραύση των εργαλείων ή τραυματισμό του ασθενή.**

- Ο εκτελών χειρουργός και η ομάδα του χειρουργέου πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένον με τη χειρουργική τεχνική, αλλά το ένυρος των εμφυτευμάτων και εργαλείων που πρόκειται να εφαρμοστούν. Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες στο χώρο εργασίας.

• Ο εκτελών χειρουργός πρέπει να έχει εκπαιδευτεί ιδιαίτερα στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, τις εμβιομηχανικές αρχές της σπονδυλικής στήλης και τις σχετικές χειρουργικές τεχνικές. Η χειρουργική διαδικασία πρέπει να εξηγηθεί στον ασθενή και πρέπει να τεκμηριωθεί η κατανόηση των παρακάτω πληροφοριών εκ μέρους του ασθενή:

- Ο ασθενής γνωρίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη νευροχειρουργική, τη γενική χειρουργική, την ορθοπαϊδική χειρουργική και τη γενική αναισθησία.
- Ο ασθενής έχει ενημερωθεί σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας εμφύτευσης και σχετικά με πιθανές εναλλακτικές θεραπείες.
- Το εμφύτευμα μπορεί να παρουσιάσει αστοχία λόγω υπερβολικού φορτίου, φθοράς ή λοίμωξης.
- Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εμφυτεύματος καθορίζεται από το σωματικό βάρος και τη σωματική δραστηριότητα. Το εμφύτευμα δεν πρέπει να υποβάλλεται σε υπερφόρτωση μέσω ακραίας καταπόνησης ή μέσω εργασιακών ή αθλητικών δραστηριοτήτων.
- Μπορεί να είναι απαραίτητη διορθωτική χειρουργική επέμβαση εάν παρουσιαστεί αστοχία του εμφυτεύματος.
- Ο ασθενής πρέπει να επιτρέψει στον ιατρό του να διεξαγάγει εξετάσεις παρακολούθησης του εμφυτεύματος σε τακτικά διαστήματα.

Ενδοεγχειρητικά

Πριν τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο προϊόντος coflex™ και εξοικειωθείτε με τη χειρουργική τεχνική, τα αντίστοιχα εμφυτεύματα και τα εργαλεία.

- Πριν τη χρήση, επαληθεύστε την ακεραιότητα της στείρας συσκευασίας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εμφυτεύματα, εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.
- Πριν τη χρήση, ελέγχετε την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εμφυτεύματα που έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους.

Εκτελέστε μικροχειρουργική αποσυμπίεση και μετρήστε το μεσακάνθι χώρο χρησιμοποιώντας το δοκιμαστικό τμήμα του εργαλείου. Φορτώστε το εμφύτευμα coflex™ στο τιμόνια εισαγωγής του εργαλείου και εισαγάγετε το στο προετοιμασμένο σημείο. Αν είναι επιθυμητό, τα πτερύγια του εμφυτεύματος coflex™ και να κλείσουν με την πένσα κάμψης coflex™. Κάμψτε τα πτερύγια να ανοίξουν με την πένσα πτύχωσης coflex™. Κάμψτε τα πτερύγια να ανοίξουν μόνο όσο είναι απαραίτητο για την ασφαλή εισαγωγή του εμφυτεύματος.

Μετεγχειρητικά

- Επαναλάβετε τις μετεγχειρητικές οδηγίες στον ασθενή.



- Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής γνωρίζει τους περιορισμούς σωματικής δραστηριότητας και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στη διάρκεια των πρώτων έξι εβδομάδων μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε κοπιώδη σωματική δραστηριότητα. Παραδείγματα κοπώδους σωματικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν την άρση άνω των 5 Kg. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να αθλεῖται μέχρι να συμφωνήσει σε αυτό ο ιατρός. Τα αθλήματα περιλαμβάνουν την κολύμβηση, το γκολφ, το τένις, το τρέξιμο και το τζόκινγκ μεταξύ άλλων. Αν ο ασθενής είναι υπερβολικά δραστήριος υπερβολικά σύντομα μετά την επέμβαση, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι επιπλοκές που σχετίζονται ή δεν σχετίζονται με το εμφύτευμα μετεγχειρτικά. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πόνο. Ο ασθενής θα μπορούσε να χρειαστεί πρόσθιτη χειρουργική επέμβαση. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώσει τον ιατρό όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την επέμβαση εάν προκύψει πόνος ή οίδημα στην πλάτη ή μούδιασμα στα πόδια ή τους γλουτούς. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αποτελούν σημάδι μη σωστής λειτουργίας του εμφυτεύματος coflex™. Μπορεί να χρειάζεται επιπλέον χειρουργική επέμβαση. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώσει τον ιατρό σχετικά με οποιαδήποτε τραυματικό συμβάν, π.χ. πτώση.

Αναθεωρητική χειρουργική/αφαίρεση εμφυτεύματος

Το εμφύτευμα coflex™ προορίζεται για μόνιμη εμφύτευση και δεν προορίζεται για αφαίρεση. Όταν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της συσκευής, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

- Χρησιμοποιήστε επαρκή χειρουργική προσπέλαση ώστε να έχετε οπτική εποπτεία του coflex.
- Το εμφύτευμα coflex™ μπορεί να αφαιρεθεί με χρήση τυπικών εργαλείων όπως σμύλες, λαβίδες και πένσες.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή για την αφαίρεση οστού που έχει αναπτυχθεί πάνω από τα πτερύγια της συσκευής.
- Κατόπιν, τα πτερύγια μπορούν να καμφθούν προσεκτικά ώστε να ανοίξουν χρησιμοποιώντας μια σμίλη μικρών οστών πριν μπορέσετε να αφαιρέσετε τη συσκευή μ χρήση πένσας ή λαβίδας.

Μετά από ειδικό αίτημα, η Paradigm Spine προσφέρει ένα εργαλείο αναθεωρησης που δεν αποτελεί μέρος του τυπικού σετ.

Μπορεί να είναι απαραίτητες πρόσθιτες διαδικασίες για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης μετά από αφαίρεση του εμφυτεύματος coflex™, συμπεριλαμβανομένης της εμφύτευσης ενός νέου εμφυτεύματος coflex™ ή της σπονδυλοδεσίας.

Εγγύηση

Όλα τα δικαιώματα εγγύησης χάνονται αν διεξαχθούν επισκευές ή τροποποιήσεις από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβιτς. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις στην ασφάλεια, αξιοπιστία ή απόδοση του προϊόντος αν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί σε συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης. Επιφυλάσσεται το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με την Paradigm Spine ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σας εάν χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν αυτό.

Διπλωματική ευρεσιτεχνίας

Για πληροφορίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βλ. www.surgalign.com

σύμβολα

	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Ημερομηνία λήξης
	Αριθμός παρτίδας
	Αριθμός καταλόγου
	Αριθμός χρησιμοποιούμενων μονάδων
	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας
	Μην επαναποτειρώνετε
	Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
	Να διατηρείται στεγνό
	Μην επαναχρησιμοποιείτε
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης σε αυτόν τον ιστότοπο.
	Προσοχή
	Συμβατό με σαρώσεις MR υπό όρους
 0123	Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/EEC



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05

 0123



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

Interlaminární implantát coflex™

Obsah

Balení obsahuje implantát coflex™.

Popis

Implantát coflex™ poskytuje anatomickou vertebrální flexibilitu. Je dovolena extenze a flexe vůči neutrální poloze, odpovídající téměř paralelní poloze obou křídel.

Materiál

Implantát coflex™ je vyroben ze slitiny titanu, hliníku 6 a vanadu 4 (ISO 5832-3). Dodává se sterilní a je k dispozici v mnoha velikostech.

Účel použití

Implantát coflex™ je určen k trvalé implantaci mezi trnové výběžky 1 nebo 2 bederních pohybových segmentů a řídí segmentální pohyb v případěch bederní stenózy nebo mírné degenerativní nestability. Implantát coflex™ lze také použít v až 2 bederních pohybových segmentech sousedících s fúzovanými segmenty.

Indikace

Radiograficky potvrzená středně závažná až závažná stenóza, izolovaná na 1 nebo 2 úrovni, v regionu L1 až L5 u pacientů s konkomitanční bolestí v dolní části zad či bez ní, včetně stavů jako je spondylolistéza stabilního stupně 1. Interlaminární stabilizace se provádí po mikrochirurgické dekomprezii stenózy na dané úrovni či daných úrovních. Implantát coflex™ lze také použít v až 2 bederních pohybových segmentech sousedících s fúzovanými segmenty.

Kontraindikace

Nepoužívejte implantát coflex™ v následujících případech:

- Jakýkoli zdravotní či chirurgický stav vylučující potenciální výhodu operace páteře
- Akutní nebo chronické, systémové, spinální nebo lokalizované infekce
- Systémové a metabolické choroby
- Obezita
- Těhotenství
- Léková závislost, drogová závislost nebo alkoholismus
- Nedostatečná spolupráce pacienta
- Citlivost na cizí těleso vůči materiálu implantátu
- Spondylolistéza větší než 1. Stupně nebo nestabilní spondylolistéza
- Skolioza větší než 25 stupňů.
- Závažná osteopenie

Nezádoucí účinky

Mezi nezádoucí účinky může patřit:

- Klinické selhání (to znamená bolest nebo zranění) vlivem ohnutí, uvolnění, opotřebení, fraktury implantátu, ztráty fixace, dislokace a/nebo migrace
- Bolest a/nebo abnormální pocit způsobené přítomností implantátu
- Primární a/nebo sekundární infekce
- Alergické reakce na materiál implantátu
- Neurologické zranění
- Frakturna obratlů
- Poranění cév, nervů a orgánů
- Hematom a/nebo zhoršené hojení rány, krvácení
- Žilní trombóza, plicní embolie a srdeční zástava
- Smrt



Bezpečnostní opatření

- Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití a seznamte se s operačním postupem.
- Uchovávejte návod k použití na místě přístupném pro veškerý personál.
- Operátor musí ovládat jak praktické tak koncepcionální aspekty daného operačního postupu.
- Za řádný chirurgický výkon implantace odpovídá operátor.
- Výrobce neodpovídá za žádné komplikace vzniklé v důsledku nesprávné diagnózy, volby nesprávného implantátu, nesprávných operačních technik, omezení léčebných metod nebo nedostatečné asepsy.
- Za žádných okolností nesmí být kombinovány komponenty modulárního implantátu od různých dodavatelů.
- Ve zdravotní dokumentaci musí být vždy zdokumentován použity implantát (název, katalogové číslo, číslo šarže).
- V průběhu pooperační fáze je důležité vedle pohybové a svalové rehabilitace, aby lékař pacienta dobře informoval o požadavcích na chování po operaci.
- Poškození struktur nesoucích zátěž může způsobit uvolnění, dislokaci a migraci i další komplikace. Pro zajištění a co nejčasnější odhalení takovéto komplikace je nutno implantát po operaci pravidelně sledovat s použitím vhodné techniky.
- Frakturna křídla implantátu coflex™, k níž může dojít v průběhu přípravy, když jsou křídla ohnuta otevřená nebo při zavádění, když jsou křídla ohnuta.



- Implantát nikdy nepoužívejte opakováně. Přestože se může zdát, že je implantát nepoškozený, předchozí namáhání mohla způsobit neviditelné poškození, které může mít za následek selhání implantátu.
- Implantáty nikdy nepoužívejte, pokud mají poškozený obal. Implantát s poškozeným obalem může být poškozený jako takový a proto se nesmí použít.
- Nikdy nepoužívejte implantáty po uplynutí data expirace.



Kompatibilita MRI

coflex™ je MR podmíněný. Lze jej bezpečně skenovat za následujících podmínek:

- Statické magnetické pole 1,5 Tesla (1,5 T) nebo 3,0 Tesla (3,0 T)
- Prostorové gradientové pole do:
 - 11 230 G/cm (112,3 T/m) pro systémy 1,5 T
 - 5 610 G/cm (56,1 T/m) pro systémy 3,0 T
- Maximální celotělová zprůměrovaná specifická míra absorpcie (SAR):
 - 2,0 W/kg při skenování po dobu 15 minut v normálním provozním režimu při 1,5 T
 - 2,0 W/kg při skenování po dobu 15 minut v normálním provozním režimu při 3,0 T

3,0 T VF zahřívání

V neklinickém testování s excitací tělové cívky vyvolal interlaminární implantát coflex™ zvýšení teploty nižší než 3,5 °C při maximální celotělové zprůměrované míře absorpcie (SAR) 2,0 W/kg, dle posouzení kalorimetrií při skenování po dobu 15 minut při 3,0 T skenerem MR Siemens Trio (MRC20587) se softwarem SYNGO MR A30 4VA30A.

1,5 T VF zahřívání

V neklinickém testování s excitací tělové cívky vyvolal interlaminární implantát coflex™ zvýšení teploty nižší než 3,5 °C při maximální celotělové zprůměrované míře absorpcie (SAR) 2,0 W/kg, dle posouzení kalorimetrií při skenování po dobu 15 minut při 1,5 T skenerem MR Siemens Espree (MRC30732) se softwarem SYNGO MR B17





Chování v oblasti VF zahřívání se nestupňuje s intenzitou statického pole. Zařízení, která nevykazují detekovatelné zahřívání při jedné intenzitě pole, mohou vykazovat vysoké hodnoty lokalizovaného zahřívání při jiné intenzitě pole.

MR artefakt

Při testování s použitím 3,0 T systému se sekvenováním spin echo sleduje tvar artefaktu zobrazení přibližnou konturu zařízení a rozšiřuje se radiálně do 19 mm od implantátu.

Skladování, kontrola a sterilizace

Skladování

Implantáty je jednotlivě balen v ochranném obalu, označeném podle obsahu.

STERILE R Implantát je sterilizován gama zářením (minimálně 25 kGy).

- Implantát vždy uchovávejte v originálním ochranném obalu.
- Implantát vyměte z obalu až bezprostředně před použitím.
- Skladujte implantát na suchém a bezprašném místě (standardní nemocniční prostředí).

Desinfekce / čištění

Implantát coflex™ není určen k tomu, aby byl desinfikován a čištěn uživatelem.

Resterilizace

NO STERILIZE Implantáty coflex™ není určen k tomu, aby byl desinfikován a čištěn uživatelem.

Postup

Implantát coflex™ musí být implantován pouze s použitím příslušného zkušebního implantátu coflex™ a nástrojů. Zkušební implantát a nástroje coflex™ si lze kdykoli objednat u výrobce.

Před operací

Operátor vypracuje operační plánspecifikující a dokumentující následující položky:

- Komponenty implantátů a jejich rozměry.
 - Správná poloha komponent/y implantátu mezi trnovými výběžky.
 - Určení orientačních bodů v průběhu operace.
- Před aplikací je nutno splnit následující podmínky:
- Všechny potřebné komponenty implantátu jsou na místě k dispozici.
 - Operační prostředí je vysoce sterilní.
 - Musí být k dispozici všechny implantační nástroje včetně zkušebního coflex™ a musí být v provozuschopném stavu.



Nikdy nepoužívejte a nezpracovávejte vadné nástroje. Kontaktujte místního zástupce nebo prodejce za účelem sjednání opravy nebo výměny.



Použití nástrojů k jiným úkonům než ke kterým jsou určeny může mít za následek jejich poškození/ rozbití nebo poranění pacienta.

- Operátor a tým operačního sálu musí být důkladně seznámen s operační technikou a rovněž se sortimentem implantátů a nástrojů, které je třeba použít. Úplné informace o těchto tématech musí být pohotově k dispozici na pracovišti.
- Operátor musí být speciálně výškolen ve spinální chirurgii, principech biomechaniky páteře a v příslušných operačních postupech.

Operační postup je nutno vysvětlit pacientovi a je nutno dokumentovat, že pacient rozumí následujícím informacím:

- Pacient si je vědom rizik ve spojení s neurochirurgickou operací, obecnou chirurgickou operací, ortopedickou operací a celkovou anestezí.
- Pacient je informován o výhodách a nevýhodách postupu implantace a o možných alternativních způsobech léčby.
- Implantát může selhat v důsledku nadměrného zatížení, opotřebení nebo infekce.



- Životnost implantátu je určována tělesnou hmotností a fyzickou aktivitou. Implantát nesmí být přetěžován extrémním namáháním nebo pracovními či sportovními činnostmi.
- V případě selhání implantátu může být nutná korekční operace.
- Pacient musí u svého lékaře absolvovat pravidelné kontroly implantátu.

V průběhu operace

Před použitím si prostudujte brožuru k výrobku coflex™ a seznamte se s chirurgickou technikou, příslušnými implantáty a nástroji.



• Před použitím ověřte neporušenosť sterilního balení. Implantáty nikdy nepoužívejte, pokud mají poškozený obal.



• Před použitím zkонтrolujte datum expirace výrobku. Nikdy nepoužívejte implantáty po uplynutí data expirace.

Proveďte mikrochirurgickou dekomprezii a změřte interspinální prostor s použitím zkušební části nástroje. Zavedte implantát coflex™ do zaváděné části nástroje a zavedte na připravené místo implantace. V případě potřeby lze křídla implantátu coflex™ otevřít s použitím ohýbacích kleští coflex™ a zavřít s použitím tvarovacích kleští coflex™. Ohněte křídla do otevřené polohy pouze do té míry, jak je nezbytné k bezpečnému zavedení implantátu.

Po operaci

- Zopakujte pacientovi předoperační pokyny.
- Zajistěte, aby si byl pacient vědom omezení fyzické aktivity a možných nezádoucích účinků.

V průběhu prvních šesti týdnů po operaci by se měl pacient vynout veškeré namáhavé fyzické aktivitě. Mezi příklady namáhavé fyzické aktivity patří zvedání břemena těžšího než 5 kg. Pacient nesmí sportovat, dokud mu to lékař nedovolí. Mezi sporty patří mimo jiné plavání, golf, tenis, běh a jogging. Pokud je pacient příliš aktivní příliš brzo po operaci, může to mít za následek pooperační komplikace související či nesouvisející s implantátem.

To může způsobovat bolest. Pacient bude možná potřebovat další operaci.

Pacient by měl po operaci informovat lékaře co nejdříve, pokud se u něj vyskytne bolest nebo otok v zádech nebo necitlivost končetin. Tyto symptomy mohou být známkou toho, že implantát coflex™ rádně nefunguje. Možná bude potřebná další operace. Pacient by měl informovat lékaře o traumatické příhodě, například pádu.

Revizní operace / odstranění implantátu

Implantát coflex™ je určen k trvalé implantaci a není určen k odstranění. Když je nutné prostředek odstranit, postupujte podle těchto pokynů:

- Použijte adekvátní chirurgický přístup pro vizualizaci implantátu coflex.
- Implantát coflex™ lze odstranit s použitím standardních nástrojů, jako jsou dláta, pinzety a kleště.
- Je třeba dbát na odstranění kosti přerůstající křídla prostředku.
- Pak lze křídla opatrně otevřít ohnutím s použitím malého kostního dláta dříve než bude možné prostředek vyjmout s použitím pinzety a kleští.

Na speciální žádost poskytuje Paradigm Spine revizní nástroj, který není součástí standardní sady. Mohou být nezbytné další postupy ke stabilizaci páteře po odstranění implantátů coflex™ včetně implantace nového implantátu coflex™ nebo spinální fúze.

Záruka

Veškeré záruční nároky se ruší v případě provedení oprav nebo úprav neautorizovaným servisním střediskem. Výrobce nepřijímá odpovědnost za žádné účinky na bezpečnost, spolehlivost nebo výkon výrobku, pokud výrobek není používán v souladu s návodom k použití. Technické změny vyhrazeny.



Pro získání dalších informací

Pokud potřebujete další informace o tomto výrobku, kontaktujte společnost Paradigm Spine nebo místního autorizovaného zástupce.

Patent

Další patentové informace naleznete na adrese www.surgalign.com

Symboly

	Výrobce
	Datum výroby
	Datum expirace
LOT	Číslo šarže
REF	Katalogové číslo
QTY	Obsah použitelné jednotky/použitelných jednotek
STERILE R	Sterilizováno zářením
	Nesterilizujte opakovaně
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Uchovávejte v suchu
	Nepoužívejte opakovaně
	Viz návod k použití na této webové stránce. http://www.surgalign.com
	Pozor
	MR podmíněný
0123	Označení CE podle směrnice 93/42/EHS



Implant interlaminarny coflex™

Zawartość

Opakowanie zawiera jeden implant coflex™.

Opis

Implant coflex™ zapewnia anatomiczną elastyczność kręgosłupa. Możliwe jest zginanie i prostowanie kręgosłupa od położenia pośredniego, które odpowiada niemal równoleglemu ułożeniu dwóch skrzydełek.

Materiał

Implant coflex™ jest wykonany ze stopu tytanu z domieszką 6% aluminium i 4% wanadu, (ISO 5832-3), poddanego przeróbce plastycznej. Jest dostarczany w stanie jałowym i dostępny w wielu rozmiarach.

Przeznaczenie

Implant coflex™ jest przeznaczony do wszczepienia na stałe pomiędzy wyrostkami kolczystymi 1 lub 2 ruchomych odcinków kręgosłupa lędźwiowego. Kontroluje on ruch tych odcinków w przypadkach stenozy lędźwiowej lub łagodnej niestabilności zwydrodnieniowej. Implant coflex™ można również stosować w maksymalnie 2 odcinkach ruchomych kręgosłupa lędźwiowego sąsiadujących z poziomem(poziomami) spondylodezy.

Wskazania

Potwierdzona badaniami radiologicznymi umiarkowana lub ciężka stenoza, występująca tylko na 1 lub 2 poziomach, w okolicy L1-L5 u pacjenta z jednocześnie występującym bólem w dolnej części pleców lub bez takiego bólu, łącznie ze stanami takimi jak stabilny kręgozmyk stopnia 1. Stabilizację interlaminarną wykonuje się po dekomprezji mikrochirurgicznej stenozy na poziomie(poziomach) jej występowania. Implant coflex™ można również stosować w maksymalnie 2 odcinkach ruchomych kręgosłupa lędźwiowego sąsiadujących z poziomem(poziomami) spondylodezy.

Przeciwwskazania

Implantu coflex™ nie należy stosować w następujących przypadkach:

- Jakiekolwiek schorzenia medyczne lub stany chirurgiczne ograniczające potencjalne korzyści z operacji kręgosłupa
- Ostre lub przewlekłe zakażenia ogólnoustrojowe, dotyczące kręgosłupa lub miejscowe
- Choroby ogólnoustrojowe i metaboliczne
- Otyłość
- Ciąża
- Uzależnienie od leków, narkomania lub alkoholizm
- Brak współpracy pacjenta
- Wrażliwość na materiał, z którego wykonany jest implant – reakcja na ciało obce
- Kręgozmyk powyżej stopnia 1 lub niestabilny kręgozmyk
- Skolioza powyżej 25 stopni
- Znacząca osteopenia

Działania niepożądane

Działania niepożądane mogą obejmować:

- Niepowodzenie kliniczne (tzn. ból lub uraz) spowodowane wygięciem, poluzowaniem, zużyciem, złamaniem implantu, utratą stabilizacji, przesunięciem i/ lub przemieszczeniem
- Ból i/lub nieprawidłowe odczucia spowodowane obecnością implantu
- Zakażenia pierwotne i/lub wtórne
- Reakcje alergiczne na materiał implantu
- Uraz neurologiczny
- Złamanie kręgu

- Obrażenie naczyń, nerwów i narządów
- Krwiak i/lub upośledzenie gojenia rany, krvotok
- Zakrzepica żylna, zatorowość płucna oraz zatrzymanie czynności serca
- Zgon



Środki ostrożności

- Przed zastosowaniem implantu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i zapoznać się z techniką chirurgiczną.
- Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla całego personelu.
- Chirurg przeprowadzający zabieg musi dokładnie znać aspekty praktyczne oraz koncepcyjne ustalonych technik operacyjnych. Za prawidłowe wykonywanie zabiegów wszczepiania implantów odpowiada chirurg przeprowadzający zabieg.
- Producent nie odpowiada za jakiekolwiek powikłania wynikające z nieprawidłowej diagnozy, wyboru niewłaściwego implantu, niewłaściwej techniki operacyjnej, ograniczeń metod leczenia oraz niewłaściwej aseptyki.
- W żadnym wypadku nie wolno łączyć elementów implantów dostarczanych przez różnych producentów.
- W dokumentacji każdego pacjenta należy zapisać zastosowany implant (nazwa, numer produktu, numer serii).
- W fazie pooperacyjnej, oprócz ćwiczeń mięśni I poprawiających zakres ruchów, szczególnie ważne jest poinformowanie pacjenta przez lekarza o wymogach dotyczących zachowania w okresie pooperacyjnym.
- Uszkodzenie struktur podtrzymujących może doprowadzić do poluzowania, przesunięcia i przemieszczenia oraz innych powikłań. Aby zapewnić jak najwcześniej wykrycie takich katalizatorów zaburzeń funkcji implantu, należy implant w okresie pooperacyjnym okresowo sprawdzać za pomocą odpowiednich technik.
- Podczas przygotowania implantu coflex™ może nastąpić złamanie jego skrzydełka, przy roginianiu skrzydełek do pozycji wyprostowanej lub podczas wkładania implantu, gdy skrzydełka są zwinięte.



- Nie należy nigdy ponownie używać danego implantu. Nawet jeśli implant wydaje się nieuszkodzony, wcześniejsze naprężenia mogły spowodować niewidoczne uszkodzenia, które mogą spowodować niewłaściwe działanie implantu.



- Nie należy nigdy używać implantu, jeśli opakowanie zostało uszkodzone. Implant, którego opakowanie zostało uszkodzone, może sam być uszkodzony i tym samym nie wolno go użyć.



- Nie należy nigdy używać implantów, których termin ważności upłynął.



Zgodność z badaniem metodą MRI

Badania niekliniczne wykazały, że implant interlaminarny coflex™ jest warunkowo bezpieczny podczas badania rezonansem magnetycznym MR. Skanowanie można bezpiecznie wykonać w następujących warunkach:

- Statyczne pole magnetyczne wynoszące 1,5 Tesli (1,5 T) lub 3,0 Tesli (3,0 T)
- Pole gradientu przestrzennego wynoszące maksymalnie:
 - 11.230 G/cm (112,3 T/m) dla systemów o mocy 1,5 T
 - 5.610 G/cm (56,1 T/m) dla systemów o mocy 3,0 T
- Maksymalna wartość współczynnika pochłaniania energii (SAR) uśrednionego względem masy ciała wynosząca:



- 2,0 W/kg dla 15 minut skanowania w normalnym trybie działania przy 1,5 T
- 2,0 W/kg dla 15 minut skanowania w normalnym trybie działania przy 3,0 T

Nagrzewanie w polu RF 3,0 T

W nieklinicznych badaniach z zastosowaniem cewki do badania całego ciała, implant interlaminarny coflex™ powodował powstawanie wzrostu temperatury mniejszego niż 3,5 °C przy maksymalnym dla całego ciała uśrednionym swoistym współczynnikiem pochłaniania energii (SAR) wynoszącym 2,0 W/kg, ocenionym przy użyciu kalorymetrii dla 15 minut obrazowania metodą MR w skanerze MR systemu Siemens Trio (MRC20587) o mocy 3,0 T, przy użyciu oprogramowania SYNGO MR A30 4VA30A..

Nagrzewanie w polu RF 1,5 T

W nieklinicznych badaniach z zastosowaniem cewki do badania całego ciała, implant interlaminarny coflex™ powodował powstawanie wzrostu temperatury mniejszego niż 3,5 °C przy maksymalnym dla całego ciała uśrednionym swoistym współczynnikiem pochłaniania energii (SAR) wynoszącym 2,0 W/kg, ocenionym przy użyciu kalorymetrii dla 15 minut obrazowania metodą MR w skanerze MR systemu Siemens Espree (MRC30732) o mocy 1,5 T, przy użyciu oprogramowania SYNGO MR B17.

 **Nagrzewanie przy skanowaniu w polu RF nie przekłada się na nagrzewanie w polu statycznym. Urządzenia, które nie wykazują wykrywalnego nagrzewania przy jednym natężeniu pola mogą wykazywać wysokie wartości miejscowego nagrzewania przy innym natężeniu pola.**

Artefakty w badaniu MR

Przy badaniu za pomocą systemu o mocy 3,0 T z zastosowaniem sekwencji Spin Echo kształt obrazu artefaktu odpowiada w przybliżeniu zarysowi urządzenia i wykracza na zewnątrz poza zarys implantu na maksymalnie 19 mm.

Przechowywanie, sprawdzanie i sterylizacja

Przechowywanie

Implenty są pakowane pojedynczo w opakowanie ochronne oznaczone zgodnie z zawartością.

 Implant jest sterylizowany promieniowaniem gamma (co najmniej 25 kGy).

- Implanty należy zawsze przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
- Implant należy wyjąć z opakowania dopiero bezpośrednio przed użyciem.

 • Implanty należy przechowywać w miejscu suchym i wolnym od pyłu (standardowe warunki szpitalne).

Dezynfekcja/czyszczenie

Implant coflex™ nie jest przeznaczony do dezynfekcji lub czyszczenia przez użytkownika.

Ponowna sterylizacja

 Implant coflex™ nie jest przeznaczony do ponownej sterylizacji przez użytkownika.

Procedura

Wszczepienia implantu coflex™ należy dokonywać wyłącznie przy użyciu właściwego przymiaru i narzędzi coflex™. Przymiar i narzędzia coflex™ można nabyć u producenta w dowolnym czasie.

Przed zabiegiem

Chirurg wykonujący zabieg zarysuje plan operacji, który określa i dokumentuje następujące kwestie:

- Element(-y) implantu i ich wymiary.
- Właściwe położenie elementów implantu pomiędzy wyrostkami kolczystymi.
- Określenie śródoperacyjnych punktów orientacyjnych.

Przed wszczepieniem implantu muszą być spełnione następujące warunki:

- Wszystkie wymagane element(-y) implantu muszą być łatwo dostępne.
- Konieczne jest zapewnienie wysoce aseptycznych warunków operacyjnych.
- Wszystkie wymagane narzędzia do operacyjne, łącznie z przymiarem coflex™ muszą być dostępne i ułożone w kolejności ich używania

 *Nie należy nigdy używać narzędzi uszkodzonych lub wadliwych. Należy skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem w celu ich naprawy lub wymiany.*

 *Stosowanie narzędzi do zadań innych niż zadania, do których jest przeznaczone, może doprowadzić do uszkodzenia lub zepsucia narzędzi albo obrażeń pacjenta.*

- Chirurg wykonujący zabieg oraz personel Sali operacyjnej musi dokładnie znać technikę operacji, jak również wszystkieimplanty i narzędzia, które mają zostać zastosowane. W miejscu pracy muszą być dostępne pełne informacje na ten temat.

- Chirurg wykonujący zabieg musi być w szczególności przeszkolony w zakresie chirurgii kręgosłupa, zasad biomechaniki kręgosłupa oraz odpowiednich technik operacyjnych.

Należy wyjaśnić pacjentowi przebieg zabiegu oraz udokumentować fakt zrozumienia przez pacjenta wymienionych poniżej informacji:

- Pacjent jest świadomy zagrożeń związanych z zabiegami neurochirurgii, chirurgii ogólniej, chirurgii ortopedycznej oraz znieczulenienia ogólnego.

- Pacjent został poinformowany o wadach i zaletach zabiegu wszczepienia implantu oraz możliwych terapiach alternatywnych.

- Implant może nie działać prawidłowo z powodu nadmiernego obciążenia, zużycia lub zakażenia.

- Okres użytkowania implantu określa masa ciała i aktywność fizyczną. Implant nie można poddawać nadmiernym obciążeniom poprzez skrajne naciąganie albo czynności związane z pracą lub uprawianiem sportu.

- W razie braku prawidłowego działania implantu może być konieczne przeprowadzenie zabiegu naprawczego.

- Pacjent musi zgłaszać się do swojego lekarza na regularne badania kontrolne implantu.

W trakcie zabiegu

Przed użyciem produktu coflex™ należy przeczytać jego broszurę informacyjną i zapoznać się techniką chirurgiczną, odpowiadającymi jej implantami i narzędziami.

 • Przed użyciem należy sprawdzić integralność jałowego opakowania. Nie należy nigdy używać implantu, jeśli opakowanie zostało uszkodzone.

 • Przed użyciem należy sprawdzić termin ważności produktu. Nie należy nigdy używać implantów, których termin ważności upłynął.

Należy przeprowadzić dekomprezję mikrochirurgiczną lub zmierzyć przestrzeń międzywyrostkową do wprowadzenia implantu za pomocą służącej do doboru rozmiaru części narzędzia. Założyć implant coflex™ do części narzędzia służącej do wprowadzania implantu i włożyć w przygotowane miejsce. W razie potrzeby skrzydełka implantu coflex™ można otworzyć za pomocą szczypiec do zginania coflex™ i zamknąć za pomocą szczypiec do zwijania coflex™. Skrzydełka należy zginać w celu ich otwarcia tylko w zakresie niezbędnym do bezpiecznego włożenia implantu.

Po zabiegu

- Należy powtórzyć pacjentowi instrukcje przekazane przed zabiegiem.



- Należy upewnić się, że pacjent jest świadomy ograniczeń dotyczących aktywności fizycznej i możliwych reakcji niepożądanych.

Podczas pierwszych sześciu tygodni po zabiegu pacjent powinien unikać wszelkich forsownych ćwiczeń fizycznych. Przykłady forsownych ćwiczeń fizycznych obejmują podnoszenie ponad 5 kg. Pacjent nie powinien uprawiać sportów, zanim lekarz nie wyrazi zgody. Sporty obejmują m.in. pływanie, grę w golfa, tenisa, bieganie i jogging. Zbyt wcześnie podjęcie aktywności fizycznej po zabiegu może doprowadzić do powikłań pooperacyjnych związanych lub niezwiązanych z implantem.

Może to powodować ból. Konieczne może być wykonanie następnego zabiegu.

W razie wystąpienia po zabiegu bólu lub obrzęku w obrębie pleców albo drętwienia nóg lub pośladków, pacjent powinien jak najszybciej powiadomić o tym lekarza. Objawy te mogą świadczyć o nieprawidłowym działaniu implant coflex™. Konieczne może być wykonanie następnego zabiegu. Pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich urazach, np. upadku.

Ponowy zabieg operacyjny i usunięcie implant

Implant coflex™ jest przeznaczony do wszechepiania na stałe i nie jest przeznaczony do usuwania. W razie konieczności usunięcia urządzenia należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Należy zastosować odpowiednią technikę chirurgiczną do uwidoczenia implantu coflex.
- Implant coflex™ można usunąć przy użyciu standardowych narzędzi, takich jak dłuta, kleszcze i szczypce.
- Należy uważnie usunąć kość obrastającą skrzydełka wyróbu.
- Następnie skrzydełka można ostrożnie otworzyć za pomocą małego dłuta do kości, zanim będzie można wyjąć wyrób szczypcami lub kleszczami.

Na oddzielne zamówienie firma Paradigm Spine oferuje narzędzie do usuwania implantu, które nie wchodzi w skład standardowego zestawu. Konieczne mogą być dodatkowe zabiegi w celu stabilizacji kręgosłupa po usunięciu implantu coflex™, w tym implantacja nowego implantu coflex™ lub spondylodeza.

Gwarancja

W razie dokonywania napraw lub modyfikacji wyróbu przez nieupoważniony ośrodek serwisowy następuje utrata wszelkich praw gwarancyjnych. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność lub działanie produktu w razie jego zastosowania niezgodnego z instrukcją użycia. Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

Dalsze informacje

W razie konieczności uzyskania dalszych informacji dotyczących tego produktu proszę skontaktować się z Paradigm Spine lub autoryzowanym przedstawicielem.

Patent

Informacje na temat patentu podano na stronie www.surgalign.com

	Producent
	Data produkcji
	Zużyć do
	Numer partii
	Numer katalogowy
	Liczba jednostek użytkowych
	Sterylizacja przez napromienianie
	Nie wyawaśniać powtórnie
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Przechowywać w suchym miejscu
	Nie używać ponownie
	Patrz instrukcja obsługi na tej stronie internetowej
	Przestroga
	Warunkowe stosowanie MR
	Oznaczenie CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG

Ikona



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

Интерламинарен имплант coflex™

Съдържание

Опаковката съдържа един имплант coflex™.

Описание

Имплантът coflex™ осигурява анатомична гръбначна гъвкавост. Позволява се флексия и екстензия спрямо неутралното положение, което съответства на почти успоредното положение на двата израства.

Материал

Имплантът coflex™ е изработен от кован титан 6-алуминиева 4-ванадиева сплав (ISO 5832-3). Доставя се стерилен и се предлага в много размери.

Предназначение

Имплантът coflex™ е предназначен за постоянна имплантация между игловидните апофизи на 1 или 2 лумбален двигателен сегмент и контролира сегментното движение в случаите на лумбална стеноза или лека дегенеративна нестабилност. Имплантът coflex™ може също да се използва в до 2 лумбални двигателни сегмента в съседство със сраснатото(ите) ниво(а).

Показания

Рентгенографско потвърдена умерена до тежка стеноза, изолирана в 1 или 2 нива, в областта на L1 до L5 при пациенти със или без съпътстваща болка в гърба, включително състояния като стабилна спондилолистеза от 1-вастепен.

Интерламинарната стабилизация се извършва след микрохирургична декомпресия на стенозата на засегнатото(ите) ниво(а). Имплантът coflex™ може също да се използва в до 2 лумбални двигателни сегмента в съседство със сраснатото(ите) ниво(а).

Противопоказания

Не използвайте импланта coflex™ в случаи на:

- Всяко медицинско или хирургическо състояние, което ще възпрепятства постигане на потенциална полза от хирургичната интервенция на гръбначния стълб
- Остри или хронични системни, гръбначни или локализирани инфекции
- Системни и метаболитни заболявания
- Затлъстяване
- Бременност
- Зависимост от лекарства, злоупотреба с наркотици или алкохолизъм
- Липса на сътрудничество от страна на пациента
- Чувствителност към материала на имплант
- Спондилолистеза над 1-ва степен или нестабилна спондилолистеза
- Сколиоза над 25 градуса
- Значителна остеопения

Нежелани реакции

Нежеланите реакции могат да включват:

- Клиничен неуспех (т.е. болка или нараняване), дължащ се на огъване, разхлабване, износване, фрактура на импланта, загуба на фиксация, изместване и/или миграция
- Болка и/или аномални усещания, дължащи се на присъствието на импланта
- Първични и/или вторични инфекции
- Алергични реакции към материала на имплант
- Неврологично увреждане
- Вертебрални фрактури

- Наранявания на съдове, нерви и органи
- Хематом и/или нарушенозаразстване на раната; хеморагия
- Венозна тромбоза, белодробна емболия и сърден арест
- Смърт



Предпазни мерки за безопасност

- Преди употреба внимателно прочетете тези инструкции за употреба и се запознайте с хирургичната техника.
- Съхранявайте инструкциите за употреба на достъпно за целия персонал място.
- Оперативният хирург трябва да владее задълбочено както практическите, така и концептуалните аспекти на установените оперативни техники. Правилното хирургично изпълнение на имплантацията е отговорност на оперативния хирург.
- Производителят не носи отговорност за каквито и да било усложнения, произтичащи от неправилно поставена диагноза, избор на неправилен имплант, неправилни оперативни техники, ограничения на методите на лечение или неадекватна асептика.
- При никакви обстоятелства не могат да бъдат комбинирани модулни имплантни компоненти от различни доставчици.
- В досието на всеки пациент трябва да се документира използвания имплант (наименование, артикулен номер, партиден номер).
- През постоперативната фаза, в допълнение към възстановяването на мобилността и мускулите, е особено важно лекарят да информира добре пациента за постхирургичните поведенчески изисквания.
- Увреждане на носещите тежестта структури може да доведе до разхлабване, изместване и миграция, както и до други усложнения. За да се осигури възможно най-ранното откриване на такива фактори, които ускоряват дисфункцията на импланта, имплантът трябва да се проверява периодично след операцията, като се използват подходящи техники.
- Фрактура на израства на импланта coflex™ може да възникне по време на подготовката, когато израстващите са огънати в отворено положение, или по време на поставяне, когато се кримпират.



- Никога не използвайте повторно имплант. Въпреки че имплантът може да изглежда неповреден, предишните натоварвания може да са причинили невидима повреда, което може да доведе до неуспешната му имплантация.



- Никога не използвайте импланти, ако опаковката е повредена. Имплант с повредена опаковка може да е повреден и по този начин да не може да се използва.



- Никога не използвайте импланти, чийто срок на годност е истекъл.



Съвместимост с МР

Неклинични изследвания показват условна съвместимост на интерламинарен имплант coflex™ с магнитен резонанс (МР). Той може да се сканира безопасно при следните условия:

- Статично магнитно поле от 1,5 Tesla (1,5T) и 3,0 Tesla (3,0T)
- Пространствен градиент на полето до:
 - 11 230 G/cm (112,3 T/m) за системи 1,5T
 - 5 610 G/cm (56,1 T/m) за системи 3,0T
- Максимална осреднена за цялото тяло специфична степен на абсорбция (SAR) от:
 - 2,0 W/kg за 15 минути сканиране в нормален режим на работа при 1,5T



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

- 2,0 W/kg за 15 минути сканиране в нормален режим на работа при 3,0T

Радиочестотно загряване при 3,0T

При неклинични изследвания с възбудждане на бобина за цяло тяло, интрапараспинарният имплант coflex™ е генерира повишението на температурата по-малко от 3,5°C при максимална осреднена за цялото тяло специфична степен на абсорбция (SAR) от 2,0 W/kg, както е оценено чрез калориметрия за 15 минути сканиране в магнитно-резонансен скенер 3,0T Siemens Trio (MRC20587) със софтуер SYNGO MR A30 4VA30A.

Радиочестотно загряване при 1,5T

При неклинични изследвания с възбудждане на бобина за цяло тяло, интрапараспинарният имплант coflex™ е генерира повишението на температурата по-малко от 3,5 °C при максимална осреднена за цялото тяло специфична степен на абсорбция (SAR) от 2,0 W/kg, както е оценено чрез калориметрия за 15 минути сканиране в магнитно-резонансен скенер 1,5T Siemens Espree (MRC30732) със софтуер SYNGO MR B17.

-  **Поведението на радиочестотно загряване не е съразмерно със силата на статичното поле.**
Устройства, които не показват откриваемо загряване при една сила на полето, могат да показват високи стойности на локализирано загряване при друга сила на полето.

Артефакти при МР

При тестване с 3,0T система със спин-ехо последователност, формата на артефакта на изображението следва приблизителния контур на устройството и се простира радиално до 19 mm от импланта.

Съхранение, инспекция и стерилизация

Съхранение

Имплантът е опакован отделно в защитна опаковка, която е етикетирана според съдържанието й.

 Имплантът е стерилизиран чрез гама лъчи (минимум 25 kGy).

- Винаги съхранявайте импланта в оригиналната защитна опаковка.
- Не изваждайте импланта от опаковката преди непосредственото му използване.
- Съхранявайте импланта на място, което е сухо и е без прах (стандартна болнична среда).

Дезинфекция/почистване

Имплантът coflex™ не е предназначен за дезинфекциране или почистване от потребителя.

Повторна стерилизация

 Имплантът coflex™ не е предназначен за повторно стерилизиране от потребителя.

Процедура

Имплантът coflex™ трябва да бъде имплантиран само с приложимите инструменти и пробни coflex™. Инструментите и пробните coflex™ се предлагат от производителя при заявка.

Предоперативна

Оперативният хирург изготвя оперативен план, който уточнява и документира следното:

- Компонент(и) на импланта и техните размери.
 - Правилното положение на компонента(ите) на импланта между игловидните апофизи.
 - Определяне на интраоперативните точки за ориентация.
- Трябва да бъдат изпълнени следните условия преди приложението:
- Всички необходими компоненти на импланта са налични.
 - Налице са високо асептични условия за работа.

- Всички необходими инструменти за имплантиране трябва да са на разположение и в работна последователност, включително пробния coflex™

-  **Никога не използвайте и не обработвайте повредени или дефектни инструменти. Свържете се с местния представител или дилър за ремонт или замяна.**
Използването на инструменти за задачи, различни от тези, за които са предназначени, може да доведе до повреда/счупване на инструментите или нараняване на пациента.

- Оперативният хирург и оперативният екип трябва да са добре запознати с оперативната техника, както и с гамата импланти и инструментите, които ще се използват. Пълната информация за тези артикули трябва да е на разположение на работното място.
- Оперативният хирург трябва да е специално обучен в гръбначната хирургия, биомеханичните принципи на гръбначния стълб и съответните оперативни техники. Оперативната процедура трябва да бъде обяснена на пациента и трябва да се документира разбирането на следната информация от него:
 - Пациентът е наясно с рисковете, свързани с неврохирургията, общата хирургия, ортопедичната хирургия и общата анестезия.
 - Пациентът е информиран за предимствата и недостатъците на процедурата за имплантиране и за възможните алтернативни лечения.
 - Имплантът може да не изпълнява своята функция поради прекомерно натоварване, износване и разкъсване или инфекция.
 - Животът на импланта се определя от телесното тяло и физическата активност. Имплантът не трябва да се подлага на претоварване чрез екстремни натоварвания, работа или спортни дейности.
 - Може да е необходима корективна операция, ако имплантът не изпълнява своята функция
 - Лекарят на пациента трябва да извърши последващи изследвания на импланта на редовни интервали от време.

Интраоперативна

Преди употреба, моля, прочетете продуктовата брошюра на coflex™ и се запознайте с хирургическата техника, съответните импланти и инструментите.

- Преди употреба проверете целостта на стериилната опаковка. Никога не използвайте импланти, ако опаковката е повредена.
- Преди употреба проверете датата на изтичане на срока на годност на продукта. Никога не използвайте импланти, чийто срок на годност е изтекъл.

Извършете микрохирургическа декомпресия и измерете интерспиналното пространство, използвайки пробната част на инструмента. Заредете импланта coflex™ върху частта за поставяне на инструмента и го вкарайте в препарираното място. Ако е необходимо, израствъците на импланта coflex™ могат да се отворят с клещите за извиване coflex™ и да се затворят с клещите за кримпиране coflex™. Огнете израствъците само толкова, колкото е необходимо, за да вкарвате импланта безопасно.

Постоперативна

- Повторете предоперативните указания на пациента.
 - Уверете се, че пациентът е наясно с ограниченията за физическа активност и възможните нежелани реакции.
- През първите шест седмици след операцията пациентът трябва да избяга всяка натоварваща физическа активност. Примери за натоварваща физическа активност включват вдигане на повече



от 5 кг. Пациентът не трябва да спортува, докато докторът не се съгласи да го прави. Спортът включва плуване, голф, тенис, бягане и джогинг и други. Ако пациентът е прекалено активен твърде скоро след операцията, това може да доведе до постоперативни усложнения, свързани или несвързани с имплантанта. Това може да причини болка. Пациентът може да се нуждае от допълнителна операция. Пациентът трябва да информира лекаря колкото е възможно по-скоро след операцията, ако има болка или подуване на гърба или изтръпване в краката или задните части. Тези симптоми могат да бъдат знак, че имплантът coflex™ не работи правилно. Може да е необходима допълнителна хирургична намеса. Пациентът трябва да информира лекаря за всяко травматично събитие, напр. падане.

Коригираща операция/отстраняване на имплантанта

Имплантът coflex™ е предназначен за постоянна имплантация и не е предназначен за отстраняване. Когато е необходимо премахване на изделието, следвайте следните инструкции:

- Използвайте подходящ хирургически подход, за да визуализирате coflex.
- Имплантът coflex™ може да се отстрани с помощта на стандартни инструменти като длето, форцепс и клещи.
- Трябва да се внимава, за да се премахне костното израстване над израстващите на изделието.
- След това израстващите могат внимателно да се огънат, като се използва малко длето за кости, преди изделието да може да бъде извадено с клещи или форцепс.

По специална заявка Paradigm Spine предлага инструмент за ревизия, който не е част от стандартния комплект.

Може да са необходими допълнителни процедури за стабилизиране на гръбначния стълб след отстраняване на имплантанта coflex™, включително имплантиране на нов имплант coflex™ или spinalна фузия.

Гаранция

Всички гаранционни права се изгубват, ако са извършени ремонти или модификации от неоторизиран сервизен център. Производителят не носи отговорност за каквито и да е ефекти върху безопасността, надеждността или производителността на продукта, ако продуктът не се използва в съответствие с инструкциите за употреба. Запазени технически изменения.

За повече информация

Моля, свържете се с Paradigm Spine или упълномощен представител, ако е необходима допълнителна информация за този продукт.

Патент

За информация за патента вижте www.surgalign.com

икона

	Производител
	Дата на производство
	Срок на годност
	Партиден номер
	Каталожен номер
	Съдържание на използваеми единици
	Стерилизирано с лъчение
	Да не се стерилизира повторно
	Да не се използва, ако опаковката е повредена
	Да се съхранява на сухо
	Да не се използва повторно
	Разгледайте инструкциите за употреба на този уеб сайт
	Внимание
	Условна съвместимост с МР
	Маркировка CE съгласно директива 93/42/EИО



coflex™ interlaminarinis implantas

Turinys

Pakuotėje yra vienas coflex™ implantas.

Aprašymas

coflex™ implantas užtikrina anatominių slankstelių lankstumą. Nugaras slanksteliai gali išlinkti ir paigėti neutralios padėties atžvilgiu, tai atitinka beveik lygiagrečią abiejų sparnų padėtį.

Medžiaga

coflex™ implantas pagamintas iš kaltinio titano 6-aluminio 4-vanadžio lydinio (ISO 5832-3). Jis pateikiamas sterilus ir jvairių dydžių.

Paskirtis

coflex™ implantas skirtas nuolatiniam implantavimui tarp 1 ar 2 juosmens judėjimo segmentų ataugų, jis valdo segmentų judėjimą juosmens stenozės ar nedidelio degeneratyvinio nestabilumo atveju. "coflex™" implant taip pat galima implantuoti prie iki 2-ų juosmens judėjimo segmentų šalia susijungusių lygių.

Indikacijos

Radiografiniu tyrimu patvirtinta vidutinio sunkumo arba sunki stenozė, izoliuota iki 1 ar 2 lygių, regione nuo L1 iki L5 pacientams, kurie galbūt nuolat kenčia skausmą apatinėje nugaros dalyje, išskaitant tokias būklės kaip stabili 1 laipsnio spondiolistėzė. Interlaminarinė stabilizacija atliekama po stenozės mikrochirurginio suspaudimo paveiktuose lygiuose. "coflex™" implant taip pat galima implantuoti prie iki 2-ų juosmens judėjimo segmentų šalia susijungusių lygių.

Kontraindikacijos

coflex™ implanto nenaudokite, jei yra:

- Medicininė ar chirurginė būklė, kuri neleistų užtikrinti potencialios stuburo chirurginės procedūros sėkmęs
- Ūminė ar létinė sisteminė, stuburo ar lokalizuota infekcija
- Sisteminis ir metabolinis susirgimas
- Nutukimas
- Néštumas
- Priklausomybė nuo vaistų, narkotinių medžiagų ar alkoholio
- Jei ligonis nebendradarbiauja
- Jei tikétinas organizmo jautrumas svetimkūniams ir implanto medžiagai
- Jei yra didesnė nei 1 laipsnio spondiolistėzė arba nestabili spondiolistėzė
- Jei yra didesnė nei 25 laipsnių skoliozė
- Reikšminga osteopenija

Neigiamos reakcijos

Gali pasireikšti tokios neigiamos reakcijos kaip:

- Klinikinė nesékmė (t. y., skausmas arba sužeidimas) dėl implanto sulinkimo, atsilaisvinimo arba lūžimo, fiksavimo atsilaisvinimo, pajudėjimo ir / ar migracijos
- Skausmas ir / arba nenatūralūs pojūčiai dėl implant buvimo
- Pirminė ir / arba antrinė infekcija
- Alerginė reakcija į implanto medžiagą
- Neurologinis pažeidimas
- Slankstelio skilimas
- Kraujagyslių, nervų ir organų pažeidimai
- Hematoma ir / arba žaizdos negijimas, hemoragija
- Venu trombozė, plaučių embolija ir širdies sustojimas
- Mirtis



Saugumo perspėjimai

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir susipažinkite su chirurgine technika.
- Laikykite instrukcijas visam personalui prieinamoje vietoje.
- Operuojantis chirurgas turi būti gerai susipažinęs su operavimo technikos teoriniais principais ir praktinėmis procedūromis. Už tinkamą operacijos techniką implantavimo metu atsako operuojantis chirurgas.
- Gamintojas neatsako už komplikacijas, kylančias iš neteisingos diagnozės, neteisingo implanto pasirinkimo, neteisingos operacijos technikos, gydymo metodų apribojimų ar neadekvatus asepsio.
- Jokiomis aplinkybėmis negalima kartu naudoti skirting tiekėjų modulinius implantų dalių.
- Kiekvieno paciento ligos istorijoje turi būti nurodytas panaudotas implantas (pavadinimas, prekės numeris ir partijos numeris).
- Po operacijos šalia mobilumo ir raumenų treniravimo taip pat labai svarbu, kad gydytojas tinkamai informuotų pacientus apie tai, kaip reikia elgtis po operacijos.
- Dėl svorij laikančių struktūrų pažeidimų implantas gali atsilaisvinti, pasislankti ir migruoti, gali atsirasti kitų komplikacijų. Siekiant užtikrinti, kad tokios implant disfunkcijos priežastys būtų aptiktos kaip galima anksčiau, implantą reikia reguliarai tikrinti taikant tinkamą pooperacinės priežiūros techniką.
- coflex™ implantas gali skilti paruošimo metu, jei sparnai atveriant yra sulenkiams, arba išleidimo metu, jei sparnai yra susukami.



- Nenaudokite implanto pakartotinai. Nors implantas gali atrodyti nepažeistas, ankstesnės jo apkrovos gali būti jų pažeidusios, dėl to jis gali nustoti tinkamai veikti.



- Nenaudokite implanto, jeigu pažeista jo pakuotė. Jei pažeista pakuotė, gali būti pažeistas pats implantas, dėl to jo naudoti negalima.



- Niekada nenaudokite implantų, jei jų tinkamumo naudoti laikotarpis yra pasibaigęs.



MR suderinamumas

Neklininiuose tyrimuose parodė, kad coflex™ interlaminarinio implanto naudojimas MR aplinkoje yra salygiškai saugus. Galimas saugus skenavimas laikantis tokijų sąlygų:

- Statinis magnetinis laukas 1,5 teslos (1,5 T) arba 3,0 teslos (3,0 T)
- Erdvinio gradiento laukas mažesnis nei
 - 11,230 G/cm (112,3 T/m) 1,5 T sistemose
 - 5,610 G/cm (56,1 T/m) 3,0 T sistemose
- Maksimalus viso kūno vidutinis specifinis absorbcijos rodiklis (SAR) yra
 - 2,0 W/kg per 15 minučių skenavimo normaliu operaciniu režimu su 1,5 T
 - 2,0 W/kg per 15 minučių skenavimo normaliu operaciniu režimu su 3,0 T

3,0 T RD šildymas

Neklininiame tyrime su kūno ritės sužadinimu coflex™ interlaminarinio implanto temperatūra pakilo mažiau nei 3,5°C su maksimalia viso kūno vidutinės specifinės sugerties sparta (SAR) = 2,0 W/kg, kaip tai buvo įvertinta naudojant kalorimetriją MR skanavimo metu (15 minučių) su 3,0 T "Siemens Trio" (MRC20587) MR skaneriu su SYNGO MR A30 4VA30A programine įranga.

1,5 T RD šildymas

Neklininiame tyrime su kūno ritės sužadinimu coflex™ interlaminarinio implanto temperatūra pakilo mažiau nei 3,5 °C su maksimalia viso kūno vidutinės specifinės sugerties sparta (SAR) = 2,0 W/kg, kaip tai buvo įvertinta naudojant kalorimetriją MR skanavimo



metu (15 minučių) su 1,5 T "Siemens Espree" (MRC30732) MR skaneriu su SYNGO MR B17 programine įranga.

 RD šildymo elgsena priklausomai nuo statinio lauko stiprumo nekinta. Prietaisai, kurie nerodo aptinkamo šildymo vieno stiprumo lauke, kitokio stiprumo lauke gali sukelti didelį vietinį šildymą.

MR artefaktai

Atliekant testavimą su 3,0 T sistema su sukama impulsu aido seką, artefakto forma apytikriaiai atitinko prietaiso kontūrus ir išsitempė radialiai iki 19 mm nuo implanto.

Laikymas, patikrinimas ir sterilizavimas

Laikymas

Implantas yra supakuotas atskirame apsauginiame maišelyje, kuris yra pažymetas atitinkamai pagal jo turinį.

 Implantas yra sterilizuotas švitinant gama spinduliais (min. 25 kGy).

- Implantą visada laikykite originalioje apsauginėje pakuočėje.
- Iš pakuočės implantą išimkite tik prieš pat jį panaudodami.
 • Laikykite implantą sausoje nedulkėtoje vietoje (standartinėje ligoninės aplinkoje).

Dezinfeikavimas / valymas

coflex™ implantas nėra skirtas dezinfekuoti ar valyti naudotojui.

Pakartotinis sterilizavimas

 coflex™ implantas nėra skirtas pakartotinai dezinfekuoti naudotojui.

Procedūra

coflex™ implantą reikia implantuoti tik su tinkamais coflex™ bandomaisiais implantais ir instrumentais. coflex™ bandomųjų implantų ir instrumentų bet kada galima įsigyti iš gamintojo.

Prieš operaciją

Operuojantis chirurgas parengia operacijos planą, išsiaiškina ir dokumentuoja tokius dalykus:

- Implanto komponentai ir jų matmenys.
 - Tinkama implanto komponentų padėtis tarp nugaros ataugų.
 - Tinkami implantų padėties nustatymo taškai operacijos metu.
- Prieš naudojant turi būti tenkinamos šios sąlygos:
- Turi būti paruošti ir prieinami visi reikalingi implant komponentai.
 - Užtikrintos visiškai aseptiškos operacijos sąlygos.
 - Turi būti paruošti ir tinkamai veikti visi reikalingi implantavimo procedūrai instrumental, įskaitant coflex™ bandomąjį implantą.

 Niekada nenaudokite pažeistų ar defektų turinčią instrumentų. Dėl remonto ar pakeitimų susisiekite su savo vietiniu atstovu.

 Naudojant instrumentą kitai nei numatyta paskirčiai, galima sugadinti arba sulaužyti instrumentą bei sužaloti pacientą.

- Operuojantis chirurgas ir operacinėje dirbanti komanda turi būti gerai susipažinusi su operacijos technika, naudojamais instrumentais bei implantais. Darbo vietoje turi būti galima lengvai prieiti prie išsamios informacijos apie šiuos dalykus.
- Operuojantis chirurgas turi būti apmokytas atliki nugaros ir stuburo operacijas, išmanyti stuburo biomechaninius principus ir atitinkamas operavimo technikas.

Pacientui reikia paaiškinti operacijos procedūrą, paciento patvirtinimas, kad jis šią informaciją suprato, turi būti dokumentuotas:

- Pacientas supranta apie riziką, susijusią su neurochirurgijos, bendrosios chirurgijos, ortopedinės chirurgijos ir bendrosios anestezijos procedūromis.
- Pacientas buvo informuotas apie implantavimo procedūros privalusius, trūkumus bei galimus alternatyvius gydymo būdus.

- Dėl per didelių apkrovų, nusidėvėjimo ar infekcijos implanto veikimas gali sutrūkti.
- Implanto veikimo trukmė priklauso nuo kūno svorio ir fizinio aktyvumo lygio. Implantą reikia saugoti nuo perteklinių apkrovų su ypatingu apkrovimu, su darbu susijusia veikla ar sportu.
- Implanto veikimo sutrikimo atveju gali reikėti atliki korekcinę chirurginę operaciją.
- Pacientas turi reguliarai lankytis pas gydytoją, kad pastarasis galėtų atliki implanto patikrinimus po implantavimo.

Operacijos metu

Prieš naudojimą perskaitykite coflex™ produkto lankstinuką, susipažinkite su chirurgine technika, atitinkamais implantais ir instrumentais. Prieš naudojimą patirkinkite, ar nepažeistas sterilišios pakuočės vientisumas. Nenaudokite implanto, jeigu pažeista jo pakuočė.

- Prieš naudojimą patirkinkite, ar nepažeistas sterilišios pakuočės vientisumas. Nenaudokite implanto, jeigu pažeista jo pakuočė.
 - Prieš naudojimą patirkinkite produkto tinkamumo pabaigos datą. Niekada nenaudokite implantų, jei jų tinkamumo naudoti laikotarpis yra pasibaigęs.
- Atlikite mikrochirurginę dekompreziją ir išmatuokite tarplankstelinę erdvę su bandomuoju implantu. Jdėkite coflex™ implantą į instrumento įleidimo dalį ir įleiskite į numatyta vietą. Jei reikia, coflex™ implanto sparnus galima atverti su coflex™ lenkimo replémis ir užverti su coflex™ sukimu replémis. Sparnų atverdami lenkite tik tiek, kad reikia, kad būtų galima saugiai įstatyti implantą.

Po operacijos

- Dar kartą pabrežkite pacientui, kad svarbu laikytis instrukcijų, kaip elgtis po operacijos.
- Įsitikinkite, kad pacientas žino apie fizinės veiklos ribojimą ir galimas neigiamas reakcijas.

Per pirmasias šešias savaites po operacijos pacientas turi vengti aktyviuosius fizinės veiklos su apkrovomis. Tokia fizinė veikla gali būti, pavyzdžiu, didesnių nei 5 kg svorii kėlimas. Pacientas turi nesportuoti, iki kol to neleis jo gydytojas. Toks sportavimas be kitų sporto šakų apima plaukimą, golfą, tenisą ir bégimą. Jei pacientas po operacijos per greitai grįžta prie aktyvių fizinės veiklos, tai gali sukelti susijusias arba nesusijusias pooperacines komplikacijas. Tai gali sukelti skausmą. Pacientui gali reikėti atliki papildomą operaciją.

Po operacijos pacientas turi kuo greičiau pranešti savo gydytojui, jei jaustų skausmą, atsirastų nugaros apačios patinimą, pradėtų nutiripti kojos ar sėdmens. Šie simptomai gali rodyti, kad "coflex™" implantas neveikia tinkamai. Gali reikėti daugiau operacijų. Pacientas turi informuoti gydytoją apie bet kokius potencialiai traumuojančius incidentus, pvz., jei jis nukrito.

Esamos situacijos patikrinimo / implanto pašalinimo operacijos

coflex™ implantas yra skirtas paliki implantuotas visa laiką, nėra numatyta jį išimti. Jei implantą reikėtų išimti, laikykites šių instrukcijų:

- Prieikite prie coflex naudodami atitinkamą chirurginę prieigos techniką.
- coflex™ implantą galima išimti su tokiais standartiniais instrumentais kaip kirstukai, žnyplės ir replés.
- Atsargiai pašalinkite kaulą, užaugusį virš prietaiso sparnų
- Po to sparnus galima atsargiai atverti lenkiant su mažu kaulų kirstuku, prieš išimant prietaisą su žnyplémis ar replémis.

Pagal specialų užsakymą "Paradigm Spine" gali pateikti specialų revizinių procedūrų instrumentą, kuris nejena į standartinį rinkinį. Gali reikėti taikyti papildomas procedūras, kad būtų galima stabilizuoti stuburą po "coflex™" implanto išėmimo, įskaitant naujo coflex™ implanto implantavimą arba nugaros srities fuziją.



Garantija

Jei remonto ar modifikavimo darbus atlieka neigaliotas aptarnavimo centras, garantija negalioja. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už jokių poveikjų produkto saugumui, patikimumui ar veikimui, jei produktas naudojamas ne pagal pateiktas naudojimo instrukcijas. Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.

Daugiau informacijos suteikti gali

Jei reikia daugiau informacijos apie šį produktą, susisiekite su "Paradigm Spine" arba jūsų įgaliotuoju atstovu.

Patentai

Informacijos apie patentus ieškokite svetainėje

www.surgalign.com

Simboliai

	Gamintojas
	Pagaminimo data
	Tinkamumo laiko pabaigos data
LOT	Partijos numeris
REF	Katalogo numeris
QTY <input type="checkbox"/>	Naudojamų vienetų skaičius
STERILE R	Sterilizuota spinduliuote
	Nesterilizuoti pakartotinai
	Nenaudokite, jei pakuotė pažeista
	Laikyti sausai
	Pakartotinai nenaudoti
	Peržiūrėkite naudojimo instrukcijas šioje svetainėje. http://www.surgalign.com
	Jspėjimas
	MR sąlyginis
0123	CE žymėjimas pagal Direktyvą 93/42/EEB



Paradigm Spine GmbH | Eisenbahnstrasse 84 | 78573 Wurmlingen | Germany
Phone +49 (0) 7461-963599-0 | Telefax: +49 (0) 7461-963599-20
info@surgalign.com | www.surgalign.com

LBL 0478 Rev. L
2023-05

0123



PARADIGM SPINE
the movement in spine care

coflex™ starpslāņu implantāts

Iepakojuma saturs

Iepakojumā ir viens coflex™ implantāts.

Aapraksts

Coflex™ implantāts nodrošina anatomaisku elastību mugurkaulā. Tas pieļauj noliekties un izstiepties attiecībā pret neitrālo pozīciju, kurā abi flangi ir aptuveni paralēli viens otram.

Materiāls

Coflex™ implantāts ir izgatavots no titāna 6-aluminija 4-vanādija kaltā sakausējuma (ISO 5832-3). Tas tiek piegādāts sterils un ir pieejams dažados izmēros.

Izmantošanas mērķis

Coflex™ implantāts ir paredzēts pastāvīgai implantācijai starp smailajiem izaugumiem vienā vai divos jostasvietas kustības segmentos un kontrolē segmenta kustību jostasvietas stenozei vai vieglas degeneratīvas nestabilitātes gadījumiem. Coflex™ implantātu var izmantot arī ne vairāk kā diviem jostasvietas kustības segmentiem, kas atrodas blakus apvienotajai(-ām) plaknei(-ēm).

Indikācijas

Radioloģiski apstiprināta mērena vai smaga stenoze, kas ierobežota ar vienu vai divām plaknēm, reģionā no L1 līdz L5 ar pienlaicīgām sāpēm muguras lejasdaļā vai bez tām, iekļaujot stabili spondilolistēzi līdz 1. klasei. Starpslāņu stabilizācija notiek pēc stenozes mikrokirurgiskās dekomprezijas ietekmētajā(-ās) plaknē(-ēs). Coflex™ implantātu var izmantot arī līdz diviem jostasvietas kustības segmentiem, kas atrodas blakus apvienotajai(-ām) plaknei(-ēm).

Kontrindikācijas

Neizmantojet coflex™ implantātu šādos gadījumos:

- medicīniski vai kirurgiski apstākļi, kas neļauj gūt labumu no mugurkaula operācijas;
- akūtas vai hroniskas sistēmiskas, mugurkaula vai lokālas infekcijas;
- sistēmiskas saslimšanas un vielmaiņas saslimšanas;
- ir korpulence;
- grūtniecība;
- neadekvāta medikamentu vai narkotiku lietošana vai alkohola atkarība;
- nevar sadarboties ar pacientu;
- svešķermenī jutība pret implanta materiālu;
- spondilolistēze, kas augstāka par 1. pakāpi, vai nestabila spondilolistēze;
- skolioze pārsniedz 25 grādus;
- nozīmīga osteopēnija.

Blakusparādības

Iespējamās blakusparādības:

- klīniska atteice (proti, sāpes vai trauma), kas radusies saliekta, valīga, nodiluša vai salūzuša implantāta dēļ, ja notikusi implantāta noenkušanās, dislokācija un/vai pārvietošanās;
- implantāta izraisītās sāpes un/vai nepatikamas sajūtas;
- primāras vai sekundāras infekcijas;
- alergiska reakcija pret implantāta materiālu;
- neuroloģiski bojāumi;
- mugurkaula lūzumi;
- asinsvadu, nervu un orgānu traumas;
- hematomas un/vai brūču dzīšanas traucējumi, asinošana;
- vēnu tromboze, plaušu embolija un sirds apstāšanās;
- nāve.



Drošības norādījumi

- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcijas un iepazīstieties ar operācijas metodi.
- Lietošanas instrukciju glabājiet visam personālam pieejamā vietā.
- Kirurgam ir jāpārvalda atzītās operācijas metodes gan teorētiski, gan praktiski. Ķirurgs ir atbildīgs par pareizu implantāciju.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par komplikācijām, kas radušas nepareizas diagnozes, nepareizas implantāta izvēles, nepareizu operācijas paņēmienu, ārstēšanas metožu ierobežojumu vai nepietiekamas aseptikas dēļ.
- Nedrīkst kombinēt dažādu ražotāju modulāros implantātu komponentus.
- Pacienta ierakstā ir jānorāda ievietotais implantāts (ar nosaukumu, pasūtījuma numuru un partijas numuru).
- Papildus mobilitātei un muskuļu treniņiem pēcoperācijas posmā īpaši jāievēro tas, lai ārstējošais ārsts pienācīgi informētu pacientu par pēcoperācijas uzvedības noteikumiem.
- Spēka pārneses struktūru bojājumi var izraisīt implantāta atbrīvošanos, dislokāciju un migrāciju, kā arī citas komplikācijas. Lai pēc iespējas drīzāk identificētu implantāta disfunkciju veicinošos faktorus, regulāri pārbaudiet implantātu, izmantojot atbilstošas procedūras.
- Coflex™ implantāta flangā var rasties lūzums, ja flangi tiek uzliekti sagatavošanas laikā vai saliekti ievietošanas laikā.



- Nekad neizmantojiet implantātu atkārtoti. Pat ja izskatās, ka implantāts nav bojāts, iepriekšējas noslodzes var izraisīt nerēdzamus bojājumus, kas var būt implantāta atteices iemesls.



- Nekad neizmantojiet implantātu no bojāta iepakojuma. Implantāts no bojāta iepakojumu var būt bojāts un tādēļ nav izmantojams.



- Nekad neizmantojiet implantātu, kuram ir beidzies derīguma termiņš.



Saderība ar MRT

Neklīniskajos pētījumos ir pierādīts, ka coflex™ starpslāņu implantāts ir nosacīti MR drošs. MRT skenēšanu var droši veikt, ievērojot šādus nosacījumus:

- Statiskais magnētiskais lauks ir 1,5 Tesla (1,5 T) vai 3,0 Tesla (3,0 T)
- Telpiskais gradiента lauks līdz:
 - 11,230 G/cm (112,3 T/m) 1,5 T sistēmām;
 - 5,610 G/cm (56.1 T/m) 3,0 T sistēmām;
- • Maksimālais vidējais visa kermenē SAR (īpatnējais absorbcijas koeficients):
 - 2,0 W/kg 15 minūtes ilgai izmeklēšanai normālā darba režīmā pie 1,5 T;
 - 2,0 W/kg 15 minūtes ilgai izmeklēšanai normālā darba režīmā pie 3,0 T;

AF sildīšana ar 3,0 T

Neklīniskos testos, stimulējot ar ķermenē spoli, coflex™ starpslāņu implantāta temperatūras pieaugums bija mazāk nekā 3,5 °C ar maksimālo pilno ķermenē absorbcijas koeficientu (SAR) 2,0 W/kg, kā noteikts ar Siemens 3T-MRTSystem Trio (MRC20587) 15 minūšu kalorimetrijas izmeklēšanā, izmantojot SYNGO MR A30 4VA30A programmatūru.

AF sildīšana ar 1.5 T

Neklīniskos testos, stimulējot ar ķermenē spoli, coflex™ starpslāņu implantāta temperatūras pieaugums bija mazāk nekā 3,5 °C ar maksimālo pilno ķermenē absorbcijas koeficientu (SAR) 2,0 W/kg, kā noteikts ar Siemens 1,5T-MRT-System Espree (MRC20587) 15 minūšu kalorimetrijas izmeklēšanā, izmantojot SYNGO MR B17 programmatūru.





AF sildišana relativi neattiecas pret statiskā lauka intensitāti. Ierīces, kuras viena lauka intensitātē neuzrāda izmērāmu uzsilšanu, var izraisīt spēcīgu vietējo uzsilšanu citā lauka intensitātē.

MR artefakti

Pārbaudē ar 3T sistēmu, izmantojot Spin-Echo secību, artefakta attēlošanas forma atbilst aptuvenajai produkta kontūrai un radiāli iestiepjas līdz 19 mm no implantāta.

Glabāšana, pārbaude un sterilizācija

Glabāšana

Implantātu piegādā atsevišķi iepakotu atbilstoši marķētā aizsargiepajumā.

STERILE Implantātu sterilizē ar gamma apstarošanu (vismaz ar 25 kGy).

- Implantāts ir vienmēr jāglabā oriģinālajā aizsargiepajumā.
- Izņemiet implantātu no iepakojuma tieši pirms lietošanas.
- Implantātu glabājet sausā vietā, kurā nav putekļu (standarta klinikas vides apstākļos).

Dezinfekcija/tīrišana

Nav paredzēts, ka lietotājs varētu veikt Coflex™ implantāta dezinficēšanu vai tīrišanu.

Atkārtota sterilizācija

Nav paredzēts, ka lietotājs varētu veikt Coflex™ implantāta atkārtotu sterilizēšanu.

Metode

Coflex™ implantātus drīkst implantēt, tikai izmantojot atbilstīgus coflex™ izmēģinājuma implantātus un attiecīgus instrumentus. Coflex™ izmēģinājuma implantātu un instrumentus vienmēr var saņemt no ražotāja.

Pirms operācijas

Kirurgs sastāda operācijas plānu, kurā ir konkretizēti šādi punkti:

- implantāta komponents(-i) un to izmēri;
- implantāta komponenta(-u) pareiza pozicionēšana starp smailajiem izaugumiem;
- intraoperatīvās orientācijas punktu noteikšana. Pirms lietošanas ir jāzīpilda šādi priekšnosacījumi:
- ir pieejami visi nepieciešamie implantātu komponenti;
- ir augsti aseptiski operācijas apstākļi;
- visi nepieciešamie implantācijas instrumenti ir pieejami un ir darba kārtībā, tostarp coflex™ izmēģinājuma implantāti.



Neizmantojet un no jauna nesagatavojiet bojātus vai defektīvus instrumentus. Pieprasiet remontu vai nomaiņu vietējam pārstāvījam vai izplatītājam.



Ja instruments tiek izmantots neatbilstoši, tas var izraisīt instrumenta bojājumus / iznīcināšanu un pacienta traumas.

- Kirurgs un operācijas darbgrupa pārķina operācijas tehniku un tai paredzētos implantātus un instrumentus. Tie ir pilnībā pieejami.
- Kīrurgam ir jābūt attiecīgi labi apmācītam speciālistam mugurkaula kīrurgijā un jāpārķina mugurkaula biomehāniskie apstākļi un ar to saistītās operācijas metodes.

Pacients ir informēts par procedūru, un ir dokumentēta viņa piekrišana saistībā ar šādu informāciju:

- Pacients ir informēts par riskiem, kas saistīti ar neurokīrurģijas, vispārējās kīrurgijas un ortopēdiskās kīrurgijas apdraudējumiem, kā arī par operācijas ar vispārējo anestēziju risku.
- Pacients ir informēts par implantācijas ieguvumiem un trūkumiem, kā arī iespējamām alternatīvām ārstēšanas metodēm.
- Pārslodze, nodilums vai infekcija var izraisīt implantāta atteici.

- Implantāta darbmūžs ir atkarīgs no pacienta ķermēja svara un fiziskās aktivitātes. Implantu nedrīkst pārslogot ar ekstremlu slodzi, fizisku darbu vai sportiskām aktivitātēm.
- Implantāta neveiksnes gadījumā var būt nepieciešama revīzijas operācija.
- Pacientam ir regulāri jāveic implantāta medicīniskās pārbaudes.

Operācijas laikā

Pirms izmantošanas uzmanīgi izlasiet coflex™ produkta brošūru un iepazīstieties ar operācijas tehniku, attiecīgajiem implantātiem un instrumentiem.



- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai sterila iepakojums ir neskarts. Nekad neizmantojet implantātu no bojāta iepakojuma.



- Pirms izmantošanas pārbaudiet derīguma terminu. Nekad neizmantojet implantātu, kuram ir beidzies derīguma terminš.

Veiciet mikrokīrurgisko dekomprimēšanu un izmēriet muguras iekšējos atstatumus, izmantojot instrumenta izmēģinājuma pusī. Uzlieciet coflex™ implantātu instrumenta ievietošanas pusē un ievietojet to sagatavotajā zonā. Ja nepieciešams, coflex™ implantāta flangus var uzlīcot ar coflex™ liekšanas knaiblēm un ielīcot ar coflex™ gofrēšanas knaiblēm. Salieciet flangus tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai nostiprinātu implantātu.

Pēc operācijas

- Pacientam vēlreiz atgādinet pirmsoperācijas norādījumus.
- Pārliecinieties, vai pacients apzinās savas fiziskās aktivitātes ierobežojumus un iespējamās blakusparādības.

Pirmās sešas nedēļas pēc operācijas pacientiem ir jāizvairās no jebkādām smagām fiziskajām aktivitātēm. Specīgas fiziskās aktivitātes piemērs ir par 5 kg lielāka smaguma celšana. Kamēr pacients nav saņēmis ārsta atlauju, viņam nevajadzētu nodarboties ar sportu (peldēšanu, golfu, tenisu, skriešanu vai citām kustību disciplīnām). Ja pacienti ir pārāk aktīvi pārmērīgi drīz pēc operācijas, tas var izraisīt pēcopērācijas komplikācijas saistībā ar implantātu vai neatkarīgi no tā. Šādas komplikācijas var izraisīt sāpes, un dažos gadījumos pacientam var būt nepieciešama revīzijas operācija.

Pacientiem pēc operācijas pēc iespējas ātrāk jāpazino ārstam par muguras sāpēm vai pietūkumu, vai notirpumu kājās vai sēžamvietā. Šādi simptomi var liecināt, ka coflex™ implantāts nedarbojas pareizi. Šādā gadījumā var būt nepieciešama cita operācija. Pacientiem jāinformē ārsti par jebkuru traumatisku notikumu, piemēram, kritienu.

Revīzijas operācija / implantāta izņemšana

Coflex™ implantātās ir paredzēts pastāvīgai implantācijai un nav paredzēts izņemšanai. Ja nepieciešama izņemšana, jāievēro tālāk sniegtie norādījumi.:

- Izgūstiet coflex™ implantātu ar atbilstošām kīrurgiskajām procedūrām.
- Coflex™ implantātu var izņemt ar standarta instrumentiem, piemēram, kaltu un dažādām knaiblēm.
- Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai no implantāta flangiem atdalītu izaugušo kaulu materiālu.
- Tad flangus var uzmanīgi uzliekt ar nelielu kaula kaltu un pēc tam implantātu izņemt ar knaiblēm.

Paradigm Spine pēc pieprasījuma nodrošinās revīzijas instrumentu, kas nav standarta instrumentu komplekta sastāvdaļa. Pēc coflex™ implantāta izņemšanas var būt nepieciešama papildu procedūra mugurkaula stabilizēšanai, piemēram, jauna coflex™ implantāta implantācija vai mugurkaula skriemelu apvienošana.



Garantija

Nesankcētu personu vai iestāžu veikta remonta vai modifikāciju gadījumā tiek anulētas visas garantijas tiesības. Ja produkts netiek izmantots saskaņā ar šo lietošanas instrukciju, ražotājs neuzņemas jebkādu atbildību par produkta drošību, uzticamību un funkcionalitāti. Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Papildinformācija

Papildinformāciju var iegūt, jebkurā laikā sazinoties ar Paradigm Spine vai savu pilnvaroto Paradigm Spine pārstāvi.

Patents

Patenta informāciju skatiet vietnē www.surgalign.com

Ikona

	Ražotājs
	Ražošanas datums
	Izlietot līdz
LOT	Partijas numurs
REF	Preces numurs
QTY	Izmantojamo vienību skaits
STERILE R	Sterilizēts apstarojot
	Nesterilizēt no jauna
	Neizmantot, ja ir bojāts iepakojums
	Glabāt sausumā
	Nelietot atkārtoti
	Iepazīstieties ar lietošanas instrukcijām šajā vietnē.
	Uzmanību
	Nosacīti MR drošs
	CE apzīmējums saskaņā ar direktīvu 93/42/EEC



Interlaminarni vsadek coflex™

Vsebina pakiranja

Pakiranje vsebuje en vsadek coflex™.

Opis

Vsadek coflex™ skrbi za anatomske fleksibilnosti hrbtenice. Dovoljuje fleksijo in ekstenzijo glede na nevralen položaj, ki ustreza skoraj vzporedni namestitvi obeh krilc.

Material

Vsadek coflex™ je izdelan iz kovane zlitine titana 6-aluminija 4-vanadija (ISO 5832-3). Dobavljen je sterilen in je na voljo v več velikostih.

Predvidena uporaba

Vsadek coflex™ je predviden za trajno vsaditev med trnaste izrastke ene ali dveh funkcionalnih enot lumbalnega dela hrbtenice ter nadzira gibanje funkcionalnih enot v primeru lumbalne stenoze ali blage degenerativne nestabilnosti. Vsadek coflex™ se lahko uporabi tudi pri največ dveh funkcionalnih enotah lumbalnega dela hrbtenice, ki se nahajata tik ob spojenem nivoju/spojenih nivojih.

Indikacije

Radiografsko potrjena zmerna do huda stenoza, izolirana na enega ali dva nivoja, v predelu od L1 do L5 pri bolniku s sočasnimi bolečinami v spodnjem delu hrbtenice ali brez takih bolečin, vključno s stanji, kot je stabilna spondilolisteza 1. stopnje.

Interlaminarna stabilizacija se izvede po mikrokirurški dekompreziji stenoze na prizadetem območju/prizadetih območjih. Vsadek coflex™ se lahko uporabi tudi pri največ dveh funkcionalnih enotah lumbalnega dela hrbtenice, ki se nahajata tik ob spojenem nivoju/spojenih nivojih.

Kontraindikacije

Vsadka coflex™ ne uporabljajte v naslednjih primerih:

- kakršno koli zdravstveno ali kirurško stanje, ki izključuje morebitne koristi kirurškega posega na hrbtenici;
- akutne ali kronične sistemske, spinalne ali lokalizirane okužbe;
- sistemske ali presnovne bolezni;
- debelost;
- nosečnost;
- odvisnost od zdravil, zloraba drog ali alkoholizem;
- pomanjkljivo sodelovanje s strani bolnika;
- občutljivost na material vsadka;
- spondilolisteza, višja od 1. stopnje, ali nestabilna spondilolisteza;
- skolioza za več kot 25 stopinj;
- znatna osteopenija.

Neželeni učinki

Neželeni učinki so med drugim lahko:

- klinična odpoved (tj. bolečina ali poškodba) zaradi ukrivljenosti, zrahljanja, obrabe, zloma vsadka, izgube fiksacije, dislokacije in/ali migracije vsadka;
- bolečina in/ali nenormalne zaznave;
- primarne in/ali sekundarne okužbe;
- alergijske reakcije na material vsadka;
- nevrološke poškodbe;
- zlom vretenc;
- poškodbe žilja, živcev ali organov;
- hematom in/ali poslabšano celjenje ran, krvavitev;
- venska tromboza, pljučna embolija in zastoj srca;
- smrt.



Previdnostni ukrepi

- Pred uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo in se seznanite s kirurško tehniko.
- Ta navodila za uporabo naj bodo dostopna vsemu osebju.
- Kirurg operater mora tako teoretično kot tudi praktično izvrstno obvladati sprejete operacijske tehnike. Kirurg operater je odgovoren za ustrezno kirurško vsaditev.
- Proizvajalec ni odgovoren za nikakršne zaplete, ki so posledica napačne diagnoze, izbire napačnega vsadka, nepravilne operacijske tehnike, omejitve metod zdravljenja ali neustrezne asepse.
- V nobenem primeru ni dovoljeno kombinirati modularnih komponent vsadkov različnih proizvajalcev.
- Uporabljeni vsadek (ime, številko izdelka, serijsko številko) je treba dokumentirati v bolnikovi kartoteki.
- V pooperativni fazi je treba poleg gibalne in mišične vadbe paziti zlasti na to, da lečeči zdravnik bolnika ustrezno informira o tem, kako je treba ravnati v pooperativnem obdobju.
- Poškodbe nosilnih struktur lahko pospešijo zrahljanje, dislokacijo ali migracijo vsadka ter tudi druge zaplete. Da bi lahko čim prej prepoznali dejavnike, ki povzročajo disfunkcijo vsadka, je treba v pooperativnem obdobju vsadke redno preverjati z ustreznimi tehnikami.
- Dozloma krilca vsadka coflex™ lahko pride med pripravo, ko sta krilci razprtji, ali med vstavljanjem, ko se krilci stisneta skupaj.
 - Vsadka ne uporabite znova. Čeprav vsadek morda ni videti poškodovan, je lahko predhodna obremenitev povzročila nevidne poškodbe, ki lahko privedejo do odpovedi vsadka.
 - Vsadkov ne smete uporabiti, če je pakiranje poškodovano. Če je pakiranje vsadka poškodovano, je lahko poškodovan tudi vsadek in ga zato ne smete uporabiti.
 - Vsadka ne uporabite, če mu je potekel rok uporabe.



Zdržljivost z MRI

Neklinična testiranja so pokazala, da je interlaminarni vsadek coflex™ pogojno varen za uporabo v MR-okolju. Slikanje je varno v naslednjih pogojih:

- statično magnetno polje 1,5 tesla (1,5 T) ali 3,0 tesla (3,0 T);
- prostorsko gradientno polje do:
 - 11.230 G/cm (112,3 T/m) za sisteme z 1,5 T,
 - 5.610 G/cm (56,1 T/m) za sisteme z 3,0 T.
- Maksimalna povprečna stopnja specifične absorpcije (SAR) za celo telo:
 - 2,0 W/kg pri 15 minutah slikanja v normalnem načinu delovanja pri 1,5 T
 - 2,0 W/kg pri 15 minutah slikanja v normalnem načinu delovanja pri 3,0 T

RF-segrevanje pri 3,0 T

Pri nekliničnih testiranjih z ekscitacijo s telesno tuljavo se je pri interlaminarnem vsadku coflex™ temperatura dvignila za manj kot 3,5 °C pri maksimalni povprečni stopnji specifične absorpcije (SAR) za celo telo, ki je znašala 2,0 W/kg, kot je bilo ocenjeno s kalorimetrijo pri 15 minutah slikanja s sistemom za MR-slikanje 3,0 T Siemens Trio (MRC20587) s programsko opremo SYNGO MR A30 4VA30A.

RF-segrevanje pri 1,5 T

Pri nekliničnih testiranjih z ekscitacijo s telesno tuljavo se je pri interlaminarnem vsadku coflex™ temperatura dvignila za manj kot 3,5 °C pri maksimalni povprečni stopnji specifične absorpcije (SAR) za celo telo, ki je znašala 2,0 W/kg, kot je bilo ocenjeno s kalorimetrijo pri 15 minutah slikanja s sistemom za MR-slikanje 1,5 T Siemens Espre (MRC30732) s programsko opremo SYNGO MR B17.





RF-segrevanje ni povezano z močjo statičnega električnega polja. Naprave, ki na eni stopnji jakosti ne kažejo izmerljivega segrevanja, lahko pri drugi jakosti kažejo visoko stopnjo lokalnega segrevanja.

Artefakti pri MRI

Pri testiranju, kjer sta bila uporabljen sistem 3,0 T in zaporedje spinskih odmenvov, je oblika artefakta na sliki sledila obrisu pripomočka in je segala radialno do 19 mm stran od vsadka.

Shranjevanje, pregledovanja in sterilizacija

Shranjevanje

Vsadek je pakiran posamično v zaščitni embalaži, ki je označena glede na njeno vsebino.

Vsadek je steriliziran z obsevanjem z gama žarki (min. 25 kGy).

- Vedno shranjujte v originalni zaščitni embalaži.
- Vsadek vzemite iz embalaže šele tik pred uporabo.
- Vsadek shranite na suhem in neprašnem mestu (standardno bolnišnično okolje).

Dezinfekcija/čiščenje

Vsadek coflex™ ni namenjen za dezinfekcijo ali čiščenje s strani uporabnika.

Ponovna sterilizacija

Vsadek coflex™ ni namenjen za ponovno sterilizacijo s strani uporabnika.

Postopek

Vsadek coflex™ se vsadi samo z uporabo ustreznih poskusnih komponent in instrumentov coflex™. Poskusne komponente in instrumenti coflex™ so vedno na voljo pri proizvajalcu.

Pred kirurškim posegom

Kirurg operater izdela načrt operacije, kjer opredeli in dokumentira:

- komponente vsadka in njihove dimenzije,
- pravilno namestitev komponent vsadka med trnastimi izrastki,
- določitev medoperacijskih orientacijskih točk.

Pred uporabo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Vse zahtevane komponente so na voljo in pripravljene.
- Izpolnjeni so visoko aseptični pogoji.
- Vsi potrebeni instrumenti za vsaditev so na voljo in delujejo, vključno s poskusnimi komponentami coflex™.



Nikoli ne uporabite poškodovanih ali okvarjenih instrumentov. Za popravilo ali zamenjavo poklicite lokalnega predstavnika ali trgovca.



Če instrument uporabite za naloge, za katere ni predviden, lahko pride do poškodb/zloma instrumenta ali poškodb bolnika.

- Kirurg operater in osebje v operacijski dvorani morajo biti popolnoma seznanjeni z operacijsko tehniko in tudi z vsemi vsadki in instrumenti, ki jih bodo uporabili. Ves informacijski material mora biti na delovnem mestu vedno na voljo.
- Kirurg operater mora biti posebej usposobljen za kirurške posege na hrbtenici in mora poznati biomehanske lastnosti hrbtenice ter ustrezne operacijske tehnike.

Bolniku je treba operacijski postopek razložiti in dokumentirati bolnikovo razumevanje naslednjih informacij:

- Bolnik pozna tveganja, povezana z nevrokirurgijo, splošno kirurgijo, ortopedsko kirurgijo in splošno anestezijo.
- Bolnik je bil obveščen o prednostih in slabostih implantacije in morebitnih alternativnih zdravljenj.
- Vsadek lahko odpove v primeru prekomerne obremenitve, obrabe ali okužbe.
- Življenska doba vsadka je pogojena s telesno maso bolnika in z njegovo fizično aktivnostjo. Vsadek ne sme biti podvržen

prekomernim obremenitvam zaradi ekstremnega naprezanja ali z delom povezanih in športnih aktivnosti.

- Če vsadek odpove, bo potreben korektivni kirurški poseg.
- Bolnik mora redno hoditi na kontrolne pregledne vsadka k svojemu zdravniku.

Med kirurškim posegom

Pred uporabo preberite brošuro o izdelku coflex™ in se seznanite s kirurško tehniko, ustreznimi vsadki in instrumenti.



- Pred uporabo preverite celovitost sterilnega pakiranja. Vsadkov ne smete uporabit, če je pakiranje poškodovano.
- Pred uporabo preverite datum poteka roka uporabnosti.



- Vsadka ne uporabite, če mu je potekel rok uporabe.

Opravite mikrokirurško dekompresijo in izmerite medvretenčni prostor, pri tem pa uporabite poskusni del instrumenta. Vsadek coflex™ namestite na poskusni del instrumenta in ga vstavite v pripravljeno mesto. Po želji lahko krilci vsadka coflex™ odprete z upogibalnimi kleščami coflex™ in ju zaprite s stiskalnimi kleščami coflex™. Krilci razprite le toliko, kot je potrebno, da varno vstavite vsadek.

Po kirurškem posegu

- Bolniku ponovno dajte navodila glede vedenja v pooperativnem obdobju.
- Prepričajte se, da bolnik pozna svoje omejitve glede fizične aktivnosti in da pozna morebitne neželenle učinke.

V prvih šestih tednih po kirurškem posegu se mora bolnik izogibati naporni fizični aktivnosti. Med naporno fizično aktivnost spada tudi dviganje bremen, težjih od 5 kg. Bolnik tudi ne sme izvajati športnih aktivnosti, dokler mu tega zdravnik ne dovoli. Med športne aktivnosti spadajo med drugim plavanje, igranje golfa, tenisa in tek. Če je bolnik prekmalu po operaciji preveč aktiven, lahko pride do pooperativnih zapletov, ki so ali pa tudi niso povezani z vsadkom. Takšni zapleti lahko povzročijo bolečino. V določenih okoliščinah bi bolnik lahko potreboval tudi dodatni kirurški poseg. Po kirurškem posegu mora bolnik zdravnika čim prej obvestiti, če se pojavi bolečina ali oteklini na hrbtni ali če so noge ali zadnjica omrvičeni. Ti simptomi lahko pomenijo, da vsadek coflex™ ne deluje pravilno. Lahko bodo potreben dodatni kirurški posegi. Bolnik mora zdravnika obvestiti o vsakem travmatičnem dogodku, kot je na primer padec.

Revizijski kirurški poseg/odstranitev vsadka

Vsadek coflex™ je predviden za trajno vsaditev in naj ga ne bi odstranitev. Če je potrebnra odstranitev pripomočka, je treba upoštevati naslednja navodila:

- Vsadek coflex™ vizualizirajte z ustreznim kirurškim postopkom.
- Vsadek coflex™ je mogoče odstraniti s standardnimi instrumenti, kot so dleto in razne klešče.
- Paziti je treba, da odstranite kost, ki prerašča krilci pripomočka.
- Nato lahko krilci z manjšim dletom za kosti previdno razprete in pripomoček odstranite s kleščami.

Na željo lahko pri Paradigm Spine dobite revizijski instrument, ki ni del standardnega kompleta. Za stabilizacijo hrbtenice po odstranitvi vsadka coflex™ bodo morda potrebeni dodatni postopki, vključno z vsaditvijo novega vsadka coflex™ ali fuzijo hrbtenice.

Garancija

Garancijske pravice ne veljajo v primerih, če je popravila ali spremembe izvajal nepooblaščeni servis. Proizvajalec ni odgovoren za varnost, zanesljivost ali delovanje pripomočka, če se pripomoček ne uporablja skladno z navodili za uporabo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



Nadaljnje informacije

Če potrebujejo dodatne informacije v zvezi s tem pripomočkom, se obrnite na Paradigm Spine ali pooblaščenega predstavnika.

Patent

Za informacije glede patenta glejte www.surgalign.com

Simboli

	Proizvajalec
	Datum izdelave
	Uporabiti do
LOT	Serijska številka
REF	Kataloška številka
QTY	Vsebina – uporabne enote
STERILE R	Sterilizirano z obsevanjem
	Ne sterilizirajte ponovno
	Ne uporabite, če je pakiranje poškodovano
	Hranite na suhem mestu
	Ni za ponovno uporabo
	Glejte navodila za uporabo ali to spletno mesto.
	Pozor
	Pogojno varno za uporabo v MR-okolju
	Oznaka CE v skladu z direktivo 93/42/EGS



Interlaminárny implantát coflex™

Obsah balenia

Balenie obsahuje jeden implantát coflex™.

Opis

Implantát coflex™ poskytuje anatomickú vertebrálnu flexibilitu. Je dovolená extenzia a flexia voči neutrálnej polohe, zodpovedajúca takmer paralelnej polohe dvoch krídel.

Materiál

Implantát coflex™ je vyrobený z kovanej zliatiny titánu, hliníku 6 a vanádu 4 (ISO 5832-3). Dodáva sa sterilný a je k dispozícii v mnohých veľkostach.

Určený účel použitia

Implantát coflex™ je určený na trvalú implantáciu medzi trírové výbežky 1 alebo 2 bedrových pohybových segmentov a ovláda segmentálny pohyb v prípadoch bedrovej stenózy alebo miernej degeneratívnej nestability. Implantát coflex™ je možné použiť až v 2 bedrových pohybových segmentoch susediacich s jednou alebo viacerými fúzovanými úrovňami.

Indikácie

Rádiograficky potvrdená stredne závažná až ľahká stenóza, izolovaná na 1 alebo 2 úrovne, v regióne L1 až L5 u pacienta so sprievodnou bolesťou v dolnej časti chrbtice alebo bez nej, vrátane stavov ako je spondyloistéza stabilného stupňa 1.

Interlaminárna stabilizácia sa vykonáva po mikrochirurgickej dekomprezii stenózy na danej úrovni či daných úrovnach. Implantát coflex™ je možné použiť až v 2 bedrových pohybových segmentoch susediacich s jednou alebo viacerými fúzovanými úrovňami.

Kontraindikácie

Nepoužívajte implantát coflex™ v nasledujúcich prípadoch:

- Akýkoľvek zdravotný alebo chirurgický stav vylučujúci potenciálny prínos operácie chrbtice
- Akútne alebo chronické systémové, spinálne alebo lokalizované infekcie
- Systémové alebo metabolické ochorenia
- Obezita
- Tehotenstvo
- Lieková závislosť, drogová závislosť alebo alkoholizmus
- Nedostatočná spolupráca pacienta
- Citlivosť na cudzie telesá voči materiálu implantátu
- Spondyloistéza vyššieho stupňa než 1 alebo nestabilná spondyloistéza
- Skolioza väčšia ako 25 stupňov
- Signifikantná osteopénia

Nežiaduce účinky

Možné nežiaduce účinky:

- Klinické zlyhanie (t.j. bolest alebo zranenie) v dôsledku ohnutia, uvolnenia, opotrebovania alebo zlomenia implantátu, pri strate fixácie, dislokácii a/alebo migrácií
- Bolesti a/alebo abnormálne vnemy vyvolané prítomnosťou implantátu
- Primárne a/alebo sekundárne infekcie
- Alergické reakcie na materiál implantátu
- Neurologické poranenie
- Fraktúry stavcov
- Poranenie ciev, nervov a orgánov
- Hematómy a/alebo poruchy hojenia rán, krvácanie
- Žilové trombózy, plúcne embolie a zástava srdca
- Smrť



Bezpečnostné preventívne opatrenia

- Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a oboznámte sa s operačným postupom.
- Uschovajte návod na použitie na mieste prístupu pre všetkých členov personálu.
- Operujúci chirurg musí dôkladne ovládať praktické aj koncepcné aspekty zavedených operačných techník. Za riadny a správny chirurgický výkon implantácie zodpovedá operujúci chirurg.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne komplikácie vzniknuté v dôsledku nesprávnej diagnózy, volby nesprávneho implantátu, nesprávnych operačných techník, obmedzení liečebných metód alebo nedostatočnej asepsie.
- Komponenty modulárneho implantátu od rôznych dodávateľov nesmú byť za žiadnych okolností kombinované.
- V zdravotnej dokumentácii pacienta musí byť vždy zdokumentovaný použitý implantát (názov, katalógové číslo, číslo šarže).
- V priebehu pooperačnej fázy je okrem pohybovej a svalovej rehabilitácie dôležité to, aby lekár pacienta dobre informoval o požiadavkách na správanie sa po operácii.
- Poškodenie štruktúr nesúcich zátaž môže spôsobiť uvoľnenie, dislokáciu a migráciu, ako aj ďalšie komplikácie. Na zaistenie čo najskoršej detektie takýchto katalyzátorov nesprávnej funkcie implantátov je nutné implantát po operácii pravidelne sledovať s použitím vhodných techník.
- Fraktúra krídla implantátu coflex™, ku ktorej môže dôjsť v priebehu prípravy, keď sú krídla vynuté a roztvorené alebo pri zavádzaní, keď sú krídla ohnuté.



- Implantát nikdy nepoužívajte opakovane. Napriek tomu, že sa môže zdáť, že implantát je nepoškodený, predchádzajúce namáhanie mohlo spôsobiť neviditeľné poškodenie, ktoré môže mať za následok zlyhanie implantátu.



- Implantáty nikdy nepoužívajte v prípade, že majú poškodený obal. Samotný implantát s poškodeným obalom môže byť poškodený, a preto sa nesmie použiť.



- Nikdy nepoužívajte implantáty po uplynutí dátumu exspirácie.



Kompatibilita s MR

Neklinickým testovaním bolo preukázané, že interlaminárny implantát coflex™ je bezpečný pri MR za určitých podmienok. Je možné ho bezpečne skenovať za nasledujúcich podmienok:

- Statické magnetické pole 1,5 Tesla (1,5 T) alebo 3,0 Tesla (3,0 T)
- Priestorové gradientové pole do:
 - 11 230 G/cm (112,3 T/m) pre systémy 1,5 T
 - 5 610 G/cm (56,1 T/m) pre systémy 3,0 T.
- Maximálna celotelová spriemerovaná špecifická miera absorpcie (SAR):
 - 2,0 W/kg pri skenovaní počas 15 minút v normálnom prevádzkovom režime pri 1,5 T
 - 2,0 W/kg pri skenovaní počas 15 minút v normálnom prevádzkovom režime pri 3,0 T.

VF zahrивание pri 3,0 T

V neklinickom testovaní s excitáciou telovej cievky vyvolal interlaminárny implantát coflex™ zvýšenie teploty nižšie než 3,5 °C pri maximálnej celotelovej spriemerovanej mieri absorpcie (SAR) 2,0 W/kg, podľa posúdenia kalorimetriou pri skenovaní počas 15 minút v 3,0 T skeneri MR Siemens Trio (MRC20587) so softvérom SYNGO MR A30 4VA30A.



VF zahrievanie pri 1,5 T

V neklinickom testovaní s excitáciou telovej cievky vyvolať interlamínarny implantát coflex™ zvýšenie teploty nižšie než 3,5 °C pri maximálnej celotelovej spriemerovanej mieri absorpcie (SAR) 2,0 W/kg, podľa posúdenia kalorimetriou pri skenovaní počas 15 minút v 1,5 T skeneri MR Siemens Espree (MRC30732) so softvérOM SYNGO MR B17.

 Správanie sa v oblasti VF zahrievania sa nestupňuje s intenzitou statického poľa. Zariadenia, ktoré nevykazujú detegovateľné zahrievanie pri jednej intenzite poľa, môžu vykazovať vysoké hodnoty lokalizovaného zahrievania pri inej intenzite poľa.

MR artefakt

Pri testovaní s použitím 3,0 T systému so sekvenovaním spin-echo tvar artefaktu zobrazení sleduje približnú kontúru zariadenia a rozšíriuje sa radiálne do vzdialenosť 19 mm od implantátu.

Skladovanie, kontrola a sterilizácia

Skladovanie

Implantát je jednotlivo balený v ochrannom obale, ktorý je označený podľa obsahu.

 **STERILE** Implantát je sterilizovaný gama žiareniom (minimálne 25 kGy).

- Implantát vždy uchovávajte v originálnom ochrannom obale.
- Implantát vyberte z obalu až bezprostredne pred použitím.

 • Implantát skladujte na suchom a bezprášnom mieste (štandardné nemocničné prostredie).

Dezinfeckia / čistenie

Implantát coflex™ nie je určený na to, aby bol dezinfikovaný a čistený používateľom.

Opäťovná sterilizácia

 Implantát coflex™ nie je určený na to, aby bol opäťovne sterilizovaný používateľom.

Postup

Implantát coflex™ musí byť implantovaný len s použitím príslušného skúšobného prvku a nástrojov coflex™. Skúšobný prvok a nástroje coflex™ je možné kedykoľvek objednať od výrobcu.

Pred operáciou

Operujúci chirurg vypracuje operačný plán špecifikujúci a dokumentujúci nasledujúce položky:

- Komponent/-y implantátu a ich rozmery.
- Správna poloha komponentu/komponentov implantátu medzi trýmovými výbežkami.
- Určenie orientačných bodov v priebehu operácie.

Pred aplikáciou je nutné splniť nasledujúce podmienky:

- Všetky potrebné komponenty implantátu sú pohotovo k dispozícii.
- Sú prítomné vysoko aseptické operačné podmienky.
- Musia byť k dispozícii všetky implantačné nástroje a musia byť vo funkčnom stave, vrátane skúšobného prvku coflex™.

 Nikdy nepoužívajte a nespracovávajte poškodené alebo chybne nástroje. Obráťte sa na svojho miestneho zástupcu alebo predajcu vo veci opravy alebo výmeny.

 Použitie nástroja na iné úkony než na ktorý je určený môže mať za následok jeho poškodenie/rozbitie alebo poranenie pacienta.

- Operujúci chirurg a tím operačnej sály musia byť dôkladne oboznámení s operačnou technikou a taktiež so sortimentom implantátov a nástrojov, ktoré je potrebné použiť. Úplné informácie o týchto témach musia byť pohotovo k dispozícii na pracovisku.

- Operujúci chirurg musí byť špeciálne vyškolený v oblasti spinálnej chirurgie, princípov biomechaniky chrabtice a v príslušných operačných technikách.

Operačný postup je nutné vysvetliť pacientovi a je nutné zdokumentovať, že pacient rozumie nasledujúcim informáciám:

- Pacient si uvedomuje riziká spojené s neurochirurgickou operáciou, všeobecnu chirurgickou operáciou, ortopedickou operáciou a celkovou anestéziou.
- Pacient je informovaný o výhodách a nevýhodách postupu implantácie a o možných alternatívnych spôsoboch liečby.
- Implantát môže zlyhať v dôsledku nadmerného zaťaženia, opotrebovania alebo infekcie.
- Životnosť implantátu je určená telesnou hmotnosťou a fyzickou aktivitou. Implantát nesmie byť preťažovaný extrémnym namáhaním alebo pracovnými či športovými činnosťami.
- V prípade zlyhania implantátu môže byť nutná korekčná operácia.
- Pacient musí u svojho lekára absolvovať pravidelné kontroly implantátu.

V priebehu operácie

Pred použitím si prestudujte brožúru k výrobku coflex™ a zoznáme sa s chirurgickou technikou, príslušnými implantátmi a nástrojmi.



- Pred použitím overte neporušenosť sterilného balenia. Implantáty nikdy nepoužívajte v prípade, že majú poškodený obal.



- Pred použitím skontrolujte dátum expirácie výrobku. Nikdy nepoužívajte implantáty po uplynutí dátumu expirácie.

Vykonajte mikrochirurgickú dekompreziu a zmerajte interspinózny priestor s použitím skúšobnej časti nástroja. Zavedte implantát coflex™ do zavádzacej časti nástroja a zavedte na pripravené miesto implantácie. V prípade potreby je možné krídla implantátu coflex™ otvoriť s použitím ohýbacích klieští coflex™ a zavrieť s použitím tvarovacích klieští coflex™. Ohnutím roztvorte krídla len do takej miery, do akej je to nevyhnutné na bezpečné zavedenie implantátu.

Po operácii

- Zopakujte pacientovi predoperačné pokyny.
- Ubezpečte sa, či si je pacient vedomý obmedzení fyzickej aktivity a možných nežiaducich účinkov.

V priebehu prvých šiestich týždňov po operácii by sa mal pacient vyhnúť akejkoľvek namáhavej fyzickej činnosti. Medzi príklady namáhavej fyzickej činnosti patrí zdvíhanie bremena ľažšieho ako 5 kg. Pacient nesmie športovať, až kým mu to nedovolí lekár. Medzi športy patria okrem iných plávanie, golf, tenis, športový a rekreačný beh. Ak je pacient príliš aktívny príliš skoro po operácii, môže to mať za následok pooperačné komplikácie súvisiace alebo nesúvisiace s implantátom. To môže spôsobať bolest. Pacient bude možno potrebovať ďalšiu operáciu.

Pacient by mal po operácii informovať lekára čo najskôr, ak sa u neho vyskytne bolest alebo opuch na chrbe alebo necitlivosť končatín alebo zadku. Tieto symptómy môžu byť znamením toho, že implantát coflex™ nefunguje správne. Je možné, že bude potrebná ďalšia operácia. Pacient by mal informovať lekára o každej traumatickej príhode, napríklad o páde.

Revízna operácia / odstránenie implantátu

Implantát coflex™ je určený na trvalú implantáciu a nie je určený na odstránenie. V prípade, že je nutné zariadenie odstrániť, postupujte podľa týchto pokynov:

- Použite adekvátny chirurgický prístup na vizualizáciu implantátu coflex.
- Implantát coflex™ je možné odstrániť s použitím štandardných nástrojov, ako sú dláta, pinzety a kliešte.



- Je nutné dbať na odstránenie kosti prerastajúcej cez krídla zariadenia.
- Potom je možné krídla opatrnne roztvoriť ohnutím s použitím malého kostného dláta pred tým, ako bude možné zariadenie vybrať s použitím pinzety a klieští.

Spoločnosť Paradigm Spine na osobitné požiadanie poskytuje revízny nástroj, ktorý nie je súčasťou štandardnej súpravy. Môžu byť potrebné ďalšie postupy na stabilizáciu chrbtice po odstránení implantátu coflex™, vrátane implantácie nového implantátu coflex™ alebo spinálnej fúzie.

Záruka

Všetky záručné nároky sa rušia v prípade vykonania opráv alebo úprav neautorizovaným servisným strediskom. Výrobca neprijíma zodpovednosť za žiadne účinky na bezpečnosť, spoľahlivosť alebo výkon výrobku, pokiaľ výrobok nie je používaný v súlade s návodom na použitie. Technické zmeny sú vyhradené.

Na získanie ďalších informácií

Ak sú potrebné ďalšie informácie o tomto výrobku, obráťte sa na spoločnosť Paradigm Spine alebo na svojho miestneho autorizovaného zástupcu.

Patent

Ďalšie patentové informácie nájdete na adrese www.surgalign.com

Symboly

	Výrobca
	Dátum výroby
	Dátum expirácie
LOT	Číslo šarže
REF	Katalógové číslo
QTY	Obsah použiteľnej jednotky/použiteľných jednotiek
STERILE R	Sterilizované žiareniom
	Nesterilizujte opakovane
	Nepoužívajte, ak je poškodený obal
	Uchovávajte v suchu
	Nepoužívajte opakovane
	Pozrite si návod na použitie na tejto webovej stránke.
	Pozor
	MR podmienená
CE 0123	Označenie CE podľa smernice 93/42/EHS

